



ESTERILIZADOR **BAUMER**

Registro ANVISA nº: 10345500043

Modelos: HI SPEED, HI SPEED LAC, HI SPEED NX

M A N U A L D E M A N U T E N Ç Ã O

Código

Modelo

Fabricado em

Núm. Série

Baumer - Compromisso com a saúde
Responsável Técnico: Eng. Sérgio Yukio Koseki
CREA-SP: 0601577094 - Cart: 157709/D
Início da Responsabilidade Técnica: 31/01/1994
Fabricado e Distribuído por Baumer S.A.
Divisão STIC - Esterilização e Controle de Infecção
Av. Pref. Antonio Tavares Leite, 181 • Parque da Empresa
Caixa Postal 1081 • 13803-330 • Mogi Mirim • SP • Indústria Brasileira
E-mail: baumer@baumer.com.br

Parabéns!

Você adquiriu um produto Baumer e estamos empenhados em corresponder a sua confiança.

Para garantir a melhor performance de seu produto leia atentamente e siga as instruções contidas neste Manual.

Ressaltamos que as fotos, figuras e desenhos são ilustrativos, estando sujeitos a variações sem notificação prévia.

A Baumer S.A. considera-se responsável pela segurança, confiabilidade e desempenho de seu produto desde que:

- A instalação a ponto, as modificações e os reparos sejam executados somente por um agente autorizado da Baumer S.A.;
- Os pontos de suprimentos estejam de acordo com o Manual de Instalação;
- O produto seja utilizado de acordo com os Manuais de Usuário, de Instalação e de Manutenção.

A Baumer S.A. não se responsabiliza por danos causados durante o transporte de seu produto. É de responsabilidade do Comprador a sua conferência no ato da entrega, acionando imediatamente a transportadora em caso de danos.

Caso decida utilizar pessoal especializado para desembalar o produto, podemos prestar o serviço através de nossa rede de agentes, filiais, ou da Divisão de G.P.V. - Gestão Pós-Venda. Consulte-nos sobre preços e condições.

Também oferecemos opções de Contrato de Manutenção Preventiva (CMP) e suporte técnico especializado, o que proporciona o prolongamento da vida útil de seu produto, maior tranquilidade e a certeza de um perfeito funcionamento a baixo custo.

Colocamo-nos à sua disposição para mais esclarecimentos e esperamos que você possa usufruir de seu produto por muitos anos.

De acordo com a política de contínuo desenvolvimento, a Baumer S.A. reserva-se ao direito de efetuar, sem notificação prévia, modificações no produto mencionado neste documento.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em sistema de recuperação de informações, nem transmitida sob nenhuma forma ou por nenhum meio, seja eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou de qualquer outro modo, sem a autorização prévia da Baumer S.A..

Sumário

1. Introdução	4
Normas aplicáveis:	4
2. Termo de Garantia Limitada Baumer	4
I. Apresentação:	4
II. Prazo da Garantia:	4
III. Condições da Garantia Limitada:	4
IV. Responsabilidades do Comprador:	5
V. Exclusões:	5
VI. Limitações de Responsabilidade do Fabricante:	5
VII. Garantias Adicionais:	6
3. Manutenção	6
Alarmes:	8
Manutenção da impressora:	8
Calibração dos transdutores de pressão modelos B-100-NX, B-200-NX, B-300-NX, B-500-NX:	9
Calibração do Sensor de Temperatura:	10
4. Limpeza	11
5. Peças e Reposições	11
a. B-100-N/NL; B-200-N/NL; B-300-N/NL; B-500-N/NL	11
b. B-100-NX; B-200-NX; B-300-NX; B-500-NX	13
6. Símbolos Gráficos	15
7. Problemas e Soluções	16
8. Esquema Elétrico	17
B-100-N	17
B-200-N; B-300-N; B-500-N	17
B-100-NL	17
B-200-NL; B-300-NL; B-500-NL	17
B-100-NX	17
B-200-NX; B-300-NX; B-500-NX	17
9. Esquema Hidropneumático	18
B-100-N	18
B-200-N; B-300-N; B-500-N	18
B-100-NL; B-200-NL; B-300-NL; B-500-NL	18
B-100-NX; B-200-NX; B-300-NX; B-500-NX	18
10. Vista Explodida	18
B-100-N; B-200-N; B-300-N; B-500-N	18
B-100-NL; B-200-NL; B-300-NL; B-500-NL	18
B-100-NX; B-200-NX; B-300-NX; B-500-NX	18
11. Descarte do Produto	18
12. G.P.V. - Gestão Pós-Venda	18

1. Introdução

O Esterilizador Baumer - modelo HI SPEED, a vapor por alto vácuo, é a nova geração de esterilizadores que associa: Performance, Ergonomia, Economia, Segurança, Estilo e Simplicidade. Destinado a clínicas oftalmológicas e de cirurgia plástica, unidades ambulatoriais, laboratórios de análises clínicas e de controle de qualidade, pequenos, médios e grandes hospitais.

É utilizado para esterilização e secagem de instrumentais cirúrgicos, utensílios, tecidos, luvas, vidrarias, líquidos em frascos de vidro com fechamento ventilado, borrachas e meios de cultura e para o aquecimento terminal sob pressão de leite.

Normas aplicáveis:

- ASME, Seção VIII, Divisão I - ASME Boiler and pressure vessel code.
- NBR 11816:2003 - Esterilizadores a vapor com vácuo, para produtos de saúde.
- ISO 11134:1994 - Sterilization of health care products - Requirements for validation and routine control - Industrial moist heat sterilization.
- NBR IEC 601 - Equipamento Eletromédico - Prescrições gerais para segurança.
- NR 13:1997 - Caldeiras e Vasos de Pressão.

A pedido do cliente e às suas expensas, uma organização credenciada poderá fornecer atestado de conformidade e/ou validação.

2. Termo de Garantia Limitada Baumer

I. Apresentação:

Este termo estabelece as condições de garantia limitada do Produto BAUMER ao Comprador original.

O Comprador deve cumprir os requisitos de instalação, operação e manutenção, conforme constam dos Manuais de Instalação, Operação e Manutenção, recebidos no ato da compra e com a entrega do Produto.

II. Prazo da Garantia:

A garantia inicia-se a partir da emissão da Nota Fiscal de venda e tem os seguintes prazos de duração:

- 13 (treze) meses contra defeito de fabricação para partes gerais, não indicadas em garantia específica;
- 6 (seis) meses para material elétrico / eletrônico (fiação, micros, pressostato, filtros, alarmes, campainhas, válvulas, comandos, conexões, resistências, reparo de válvulas, transdutores de pressão);
- 90 (noventa) dias para componentes de aquecimento (lâmpadas, material de desgaste normal pelo uso do Produto, como guarnições, mangueiras, borrachas, plugs de plástico); e,
- 5 (cinco) anos para vasos de pressão (câmara interna e externa e caldeira de geração de vapor), exceto para as lâmpadas e mesas cirúrgicas;
- 6 (seis) meses para vedações hidráulicas;
- 3 (três) meses para as membranas, desde que a análise de água de alimentação tenha sido aprovada pela Baumer S.A..

III. Condições da Garantia Limitada:

- A Baumer S.A. garante que seus Produtos são livres de defeitos nos materiais e na fabricação pelo período supra mencionado, o qual se inicia na data de emissão da Nota Fiscal;
- Caso um Produto, durante o período de garantia aplicável, apresente defeito coberto pela garantia e por fato comprovadamente imputável à Baumer S.A. será reparado a seu exclusivo critério, respeitada a legislação vigente;
- A Baumer S.A. não garante que a operação de qualquer Produto seja ininterrupta ou livre de erros; e,
- O local de instalação do Produto deve estar de acordo com os requisitos descritos no Manual de Instalação, recebido pelo Comprador no ato da compra.

IV. Responsabilidades do Comprador:

Para a validade da garantia o Comprador se obriga a:

- instalar os pontos de energia elétrica, vapor, ar comprimido e água, bem como manter o ambiente físico arejado e adequado, de acordo com o que consta dos Manuais de Instalação, Operação e Manutenção do Fabricante;
- comprovar as manutenções preventivas, indicadas no Manual de Manutenção, por meio de registros;
- utilizar peças e/ou componentes originais para o Equipamento, ou seja, somente aqueles fornecidos pela Baumer S.A.;
- não permitir intervenções por agentes técnicos não autorizados para reparos, aplicações e instalações de componentes adicionais;
- devolver formalmente ao departamento técnico da Baumer S.A. (fábrica Mogi Mirim), através de seu agente autorizado, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, os componentes e/ou peças substituídos em garantia.

V. Exclusões:

Os seguintes itens, entre outros compatíveis com o ora exposto, não estão cobertos pela garantia:

- Componentes externos ao Produto;
- Materiais de limpeza, conservação e desgaste normal pelo uso;
- Papéis e vidros;
- Mão de obra de manutenção preventiva;
- Ensaio de qualificação e de validação de processos;
- Aferição e calibração periódicas dos instrumentos de medição e controle;
- Atualização de software do controlador (quando for o caso), exceto nos casos em que as falhas comprovadas do programa prejudiquem as condições de operação e segurança;
- Despesas de viagem e estadias do técnico, fretes, embalagens e seguro;
- Custos com terceirização de processos em função de manutenções corretivas e preventivas;
- Danos causados por falhas nos suprimentos de água, energia elétrica (interrupção, sub ou sobre tensão, transientes) ou de deficiência no aterramento;
- Danos causados por mau uso, abuso, queda, negligência, imprudência ou imperícia;
- Danos causados por armazenamento ou uso em condições fora das especificações contidas nos Manuais;
- Danos causados por equipamentos que produzam ou induzam interferências eletromagnéticas ou ainda por problemas de instalação elétrica em desacordo com os Manuais de Instalação, Operação e Manutenção;
- Danos causados por acessórios e Produtos de terceiros adicionados a um Produto comercializado pela Baumer S.A.;
- Danos causados por violação do Produto, tentativa de reparo ou ajuste por terceiros não autorizados pela Baumer S.A.;
- Danos causados por agentes da natureza, como descargas elétricas (raios), inundações, incêndios, desabamentos, terremotos, etc;
- Perdas e danos causados pelo Produto ou por desempenho do Produto, inclusive, mas não limitado, a lucros cessantes, perdas financeiras e limitações de produtividade, resultantes dos atos relacionados a hipóteses de não cobertura desta garantia;
- Danos causados ao Produto instalado após o vencimento dos prazos de garantia acima descritos;
- Danos causados ao Produto decorrentes do transporte.

VI. Limitações de Responsabilidade do Fabricante:

- As obrigações assumidas pela Baumer S.A. em consequência deste Termo de Garantia limitam-se às expressamente aqui incluídas;
- As soluções fornecidas neste Termo de Garantia são as únicas e exclusivas oferecidas ao cliente;
- Sob hipótese alguma a Baumer S.A. será responsável por quaisquer danos diretos, indiretos, inclusive lucros cessantes, especiais, incidentais ou consequências, seja baseado em contrato, ato lícito, prejuízo ou outra teoria legal;
- Em nenhuma circunstância, a responsabilidade da Baumer S.A. por danos materiais excede o limite máximo do preço do Produto que tenha causado tal dano.

VII. Garantias Adicionais:

As garantias estendidas e/ou especiais serão objeto de negociação, à parte, entre a Baumer S.A. e o Comprador. Após a contratação, serão registradas em contrato de fornecimento específico para tal finalidade.

3. Manutenção

O procedimento de manutenção de qualquer equipamento é de vital importância para garantir a qualidade do processo e a longevidade do produto, e deve ser considerado pela instituição como um fator econômico, assim como a aquisição e uso do equipamento.

Conceito de manutenção:

São todas as ações necessárias para manter um equipamento ou sistema em operação ou para restituí-lo ao funcionamento. A manutenção inclui conservação, reparo, modificação, revisão, inspeção e determinação da eficiência do trabalho.

Nos produtos da Baumer S.A., pelo menos duas modalidades de manutenção devem ser previstas: a manutenção corretiva e preventiva.

Manutenção corretiva:

É a execução de tarefas de manutenção não planejadas para restaurar a capacidade de funcionamento de um equipamento ou sistema danificado ou que funciona mal. Economicamente, a manutenção corretiva pode equivaler à perda de recurso não planejado, dada a sua natureza aleatória.

Um bom programa de manutenção preventiva deve contemplar todas as atividades necessárias para manter o equipamento em plena operação pelo intervalo de tempo programado entre as intervenções.

Manutenção preventiva:

Consiste não só na limpeza e inspeção, mas também na troca programada de peças que tenham seu tempo de vida útil estimado, evitando a sua quebra durante o uso. A troca programada de componentes sujeitos a desgaste mantém o equipamento em operação dentro dos parâmetros adequados de qualidade e performance.

A rede de representantes da Baumer S.A. está apta no sentido de oferecer programas exclusivos de manutenção preventiva aos nossos clientes em condições especiais, mesmo durante o período de garantia do produto.



Atenção: Os procedimentos de manutenção preventiva não estão contemplados na garantia e, inclusive a não observância destes poderá anular a garantia do produto.

Nota: Conforme regulamentações da ANVISA (ou consulte regulamentação específica para o país de destino) o teste biológico deve ser executado ao término de todas as manutenções preventivas e corretivas.

Imprescindível: Durante os procedimentos de manutenção, testes de esforço e/ou exames de funcionamento por técnicos credenciados, a área ao redor do equipamento deve estar isolada, sem a presença de usuários. Somente o técnico responsável deve estar na área limitada. A demonstração dos trabalhos executados e a liberação do isolamento se darão, após a conclusão dos procedimentos.

Diariamente:

- Abra a válvula esfera (nº 6) ao final do dia para que ocorra a drenagem da água do gerador de vapor.
- Nos dois primeiros meses reapertar o contator da resistência do gerador.

Semanalmente:

- Realizar a limpeza das superfícies internas da câmara de esterilização, quando estiver fria, não utilizando ferramentas cortantes ou palha de aço. Se a câmara apresentar material incrustado, proceda a limpeza com ACTS® (código Baumer ER-501).
- Remover a grelha do dreno limpando fiapos ou qualquer outro tipo de material que possa causar obstrução ou entupimento.

- Lubrificar a guarnição de silicone de vedação das portas.
- Examinar o funcionamento dos instrumentos do painel do Esterilizador Baumer - modelo HI SPEED.
- Examinar o elemento do filtro de água e limpar se necessário.

Quinzenalmente:

- Limpar o assento das válvulas de retenção e das válvulas solenóides para evitar mau funcionamento por sujeira.

Mensalmente:

- Examinar a válvula de segurança quanto a eventuais vazamentos. Acionar uma ou duas vezes a haste, promovendo escape de vapor sob pressão para verificar o não colamento da guarnição em sua sede (itens nº 9.1 e 9.2).
- Examinar toda a tubulação de água e vapor, observando a presença de eventuais vazamentos.
- A partir do terceiro mês, realizar o reaperto dos contadores.
- Examinar o filtro de entrada de ar para quebra de vácuo. Trocar, se necessário, caso esteja saturado, situação que pode ser verificada pela coloração escura no filtro.

Trimestralmente:

- Limpar o gerador de vapor com produto desincrustante. Após pelo menos três enxágües com água limpa, o gerador estará pronto pra uso novamente.
- Substituir o filtro de entrada de ar, localizado na lateral direita do Esterilizador Baumer - modelo HI SPEED, posição superior. Para esta operação não é necessário o uso de qualquer ferramenta, basta soltar e apertar com a mão. Esta troca pode ter seus intervalos aumentados ou reduzidos conforme análise do filtro.
- Realizar a limpeza das resistências do gerador de vapor, utilizando uma escova não metálica. Através das verificações semanais, pode ser detectada a necessidade desta limpeza em intervalos de tempos menores (nº 12).

Anualmente:

- Efetuar revisão geral em todo o sistema elétrico e mecânico.
- Verificar a calibragem da válvula de segurança.
- Verificar condições do sistema de aterramento.

Outras recomendações:

- Trocar a válvula de segurança por uma nova a cada dois anos.
- Efetuar o ensaio hidrostático da câmara e do gerador de vapor a cada cinco anos.

Lubrificação da guarnição de vedação da porta:



- A vida útil da guarnição é diretamente proporcional à intensidade de uso do Esterilizador Baumer - modelo HI SPEED (número de horas em funcionamento, número de ciclos por dia e cuidados de lubrificação).
- Nunca utilize vaselina líquida como lubrificante. A eficiência de lubrificação é baixa, pois tal lubrificante é removido facilmente pelo calor e compromete a estabilidade da guarnição.
- Recomendamos a utilização de graxa de silicone especialmente desenvolvida para a Baumer S.A., comercializada em potes de 500 ml (código Baumer 86429), utilizando um pequeno pincel ou as próprias mãos enluvadas.
- Lubrificar semanalmente.
- Lubrificar as bordas da canaleta em toda a sua extensão e não o fundo.
- Ao remover a guarnição para limpeza, nunca utilize ferramentas cortantes ou pontiagudas, como chave de fenda, faca, garfo ou outro qualquer. Utilize espátula especial de ponta curva (código Baumer 86428).
- Nunca remova uma guarnição quente, pois ela poderá romper-se na emenda.
- Ao colocar uma guarnição nova no Esterilizador Baumer - modelo HI SPEED, coloque a emenda na parte superior central, encaixando primeiramente as porções retas verticais e horizontais e posteriormente os cantos.



Atenção: Para efetuar a manutenção, aguarde o resfriamento do produto.

Alarmes:

O Esterilizador Baumer - modelo HI SPEED possui um conjunto de alarmes destinados a alertar o operador quanto a problemas de segurança ou falha no produto. Os principais alarmes, suas causas e soluções são os listados a seguir:

ALARME	CAUSA	PROCEDIMENTO
Fim de ciclo:	Situação normal liberação da porta.	Pressione a tecla  para liberar a porta.
Falha: Subtemperatura:	Temperatura abaixo da selecionada.	Contactar Gestão Pós-Venda.
Falha: Sobretemperatura:	Temperatura acima da selecionada.	Contactar Gestão Pós-Venda.
Falha: Sobrepressão C.I. - HI SPEED-NX:	Pressão acima da selecionada.	Contactar Gestão Pós-Venda.
Falha: Sobrepressão C.E. - HI SPEED-NX:	Pressão acima da selecionada.	Contactar Gestão Pós-Venda.
Ciclo abortado pelo lado de carga:	Ciclo abortado pelo usuário.	Aguardar fim do aborto.
Ciclo abortado pelo lado de descarga:	Ciclo abortado pelo usuário.	Aguardar fim do aborto, pressionar o botão  do lado de descarga e abrir a porta de carga.
Falha no Pressostato de Ar:	Falha na alimentação de ar comprimido.	Verificar fornecimento de ar comprimido.
Falha no Pressostato de Água:	Falta de água para alimentar a bomba de vácuo.	Verificar fornecimento de água para a bomba de vácuo.
Falha no Pressostato de Vapor:	<ul style="list-style-type: none"> Disjuntores do comando do gerador desligados. Falha na alimentação de água para o gerador. Resistências de aquecimento queimadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Ligar os disjuntores do comando do gerador. Verificar o abastecimento de água para o gerador. Substituir as resistências.


Manutenção da impressora:

Para trocar o rolo de papel:

1. Abrir a porta frontal e pressionar no mecanismo de impressão onde está marcado "PUSH", para bascular o mecanismo de impressão e facilitar a troca do papel.
2. Inserir o papel na abertura existente no mecanismo.
3. Pressionar a tecla "FEED" para que o papel passe pelo mecanismo saindo pelo outro lado.
4. Pressionar o suporte do mecanismo de impressão para voltá-lo à posição original "PUSH".

Para trocar o cartucho de impressão:

1. Abra a tampa da impressora e remova o cartucho, pressionando-o para baixo.
2. Insira o novo cartucho, posicionando-o corretamente.
3. Empurre cuidadosamente o novo cartucho, girando o botão existente para o perfeito encaixe na fenda do mecanismo de impressão.
4. Código da bobina de papel - 88216 / Código da fita impressora - 87917.

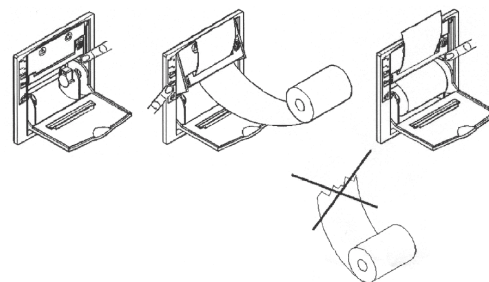

Precauções:

- Não imprima sem papel ou fita de impressão, pois isto causa a rápida deterioração das agulhas de impressão.
- Não mova o carro de impressão com a impressora ligada.
- Não coloque objetos estranhos dentro da impressora (clips para conduzir a ponta do papel).
- Evite impacto em qualquer parte da impressora.
- Mantenha a tampa protetora fechada para evitar danos à impressora.

- Não utilize papel ou fita de impressão em desacordo com o especificado.

Calibração dos transdutores de pressão modelos B-100-NX, B-200-NX, B-300-NX, B-500-NX:

O Esterilizador Baumer - modelo HI SPEED NX permite a calibração dos transdutores da câmara interna e externa pelo software, o que facilita e agiliza a atuação do técnico responsável. É importante salientar que os procedimentos citados a seguir só devem ser executados por técnicos capacitados.

Material:

- Calibrador de Pressão.

Procedimentos para transdutor da câmara interna:

1. Ligar o Esterilizador Baumer e selecionar o ciclo Leak Test.
2. Conectar o calibrador de pressão ao transdutor da câmara interna.
3. Pressionar a tecla "0".
4. Digitar a senha 3785 e confirmar, pressionando a tecla "ENTER".
5. No display surgirá a tela abaixo:

(0) ZERO	(5) SPAN
PCI: X, XX.	

6. Despressurizar o calibrador através da válvula de alívio da bomba de pressão.
7. Zerar a leitura do calibrador, pressionando a tecla "Zero Set", e em seguida a tecla "ENTER".
8. Verificar a leitura de "PCI" na tela de cristal líquido e comparar com a do calibrador.
9. Aguardar cinco segundos para estabilização.
10. Pressionar a tecla "0".
11. Inserir, com o auxílio da bomba de pressão, $2,50 \text{ kgf/cm}^2 \pm 0,05 \text{ kgf/cm}^2$ no calibrador de pressão.
12. Verificar a leitura de "PCI" na tela de cristal líquido e comparar com a do calibrador.
13. Aguardar cinco segundos para estabilização.
14. Caso haja desvio entre as leituras, pressionar a tecla "5".
15. Repetir do item 7 ao item 14, até obter leituras confiáveis.
16. Pressionar a tecla "8" para sair da tela de calibração.

Procedimentos para transdutor da câmara externa:

1. Ligar o Esterilizador Baumer e selecionar o ciclo Leak Test.
2. Conectar o calibrador de pressão ao transdutor da câmara interna.
3. Pressionar a tecla "5".
4. Digitar a senha 3785 e confirmar, pressionando a tecla "ENTER".
5. No display surgirá a tela abaixo:

(0) ZERO	(5) SPAN
PCE: X, XX.	

6. Despressurizar o calibrador através da válvula de alívio da bomba de pressão.
7. Zerar a leitura do calibrador, pressionando a tecla "Zero Set", e em seguida a tecla "ENT".
8. Verificar a leitura de "PCE" na tela de cristal líquido e comparar com a do calibrador.
9. Aguardar cinco segundos para estabilização.
10. Pressionar a tecla "0".
11. Inserir com o auxílio da bomba de pressão $2,50 \text{ kgf/cm}^2 + \text{ou} - 0,05 \text{ kgf/cm}^2$ no calibrador de pressão.
12. Verificar a leitura de "PCE" na tela de cristal líquido e comparar com a do calibrador.
13. Aguardar cinco segundos para estabilização.
14. Caso haja desvio entre as leituras, pressionar a tecla "5".
15. Repetir do item "7" ao item "14", até que não ocorra variação na leitura.
16. Pressionar a tecla "8" para sair da tela de calibração.

Calibração do Sensor de Temperatura:**Material:**

- Forno de Calibração.
- Calibrador Universal.

Procedimentos:

1. Colocar o Sensor Padrão e o Sensor a ser calibrado no Forno de Calibração, de forma que suas “pontas” estejam na mesma altura.
2. Conectar o Sensor Padrão no Calibrador Universal na entrada para PT-100 (Bornes Amarelos) e o Sensor a ser calibrado em sua respectiva entrada no comando.
3. Energizar o Forno de Calibração e Calibrador Universal.
4. Ligar o Forno de Calibração e o Calibrador Universal.
5. Colocar a escala de entrada do Calibrador Universal para PT-100.
6. Ajustar a temperatura do Forno de Calibração até que a temperatura indicada no Calibrador Universal estabilize em $134\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$.
7. Selecionar qualquer ciclo, e pressionar a tecla “9”.
8. Aparecerá a tela “DIGITE SENHA”.
- 8.1. Digitar a senha de acesso 3785, confirmando com a tecla “ENTER”. Aparecerá a temperatura efetiva.
9. Verificar a leitura do comando com a indicação do Calibrador Universal.
10. Caso haja diferença de temperatura, ajustar conforme abaixo.
11. Calcular a diferença entre a leitura do comando e o Calibrador Universal (calibrador - comando).
12. O valor encontrado deverá ser incrementado ou decrementado do fator de ajuste, que é de 15.0, conforme o resultado obtido no item “9” (incrementar se o resultado for positivo ou decrementar caso seja negativo).
13. Para alteração de fator de ajuste pressione a tecla (M), então o campo para o fator de ajuste será habilitado.
14. Verificar novamente a leitura do comando com a indicação do forno e se necessário ajustar novamente conforme item “9” ao item “13”.
15. Pressionar a tecla “8” para sair desta função.
16. Caso o equipamento possua TTS, será mostrado logo a tela para sua calibração conforme item “9” ao item “13”.

Estocagem (inatividade) por longos períodos:**Geral:**

- Manter o produto embalado e protegido de intempéries (cuidado com goteiras).
- Evitar umidade e poeira.
- Manter embalagem plástica.

Bomba de vácuo:

- Forçar o eixo a girar (na direção da seta) com grifo ou alicate de pressão (retirar tampa do motor).
- Lavar o cabeçote com óleo solúvel.
- Efetuar teste de funcionamento.

Portas:

- Manter fechada(s) e travada(s) sem guarnição.
- A guarnição deve ser guardada fora da máquina, lubrificada e embrulhada em plástico.
- A época do start-up do Esterilizador Baumer, efetuar a limpeza e a lubrificação da(s) canaleta(s) da(s) porta(s) e reinstalar a guarnição, também limpa e lubrificada.

Válvula solenóide:

- Bobinas: desligar e embrulhar / acondicionar para armazenagem.
- Conjunto da sede (êmbolo / eixo): vedar para evitar entrada e acúmulo de poeira e sujeira.

Comando eletrônico:

- Na impossibilidade de desconectar, retirar, acondicionar e armazenar fora da máquina, desconectar e embrulhar com plástico todos os conectores (para proteger de pó) e o próprio corpo do comando antes de

ligar novamente. Verificar se não houve descarregamento (desinstalação) das funções do produto no software original instalado.

4. Limpeza

Limpeza da superfície da câmara:

- Se a câmara apresentar material incrustado, borrife sobre a superfície o desincrustante ACTS® (Código Baumer ER-501). A temperatura da câmara deve ser baixa o suficiente para permitir o contato com as mãos do operador.
- Aguarde de 15 a 20 minutos e esfregue a câmara com escova não metálica (ideal escova com cerdas de nylon). Remova o produto com enxágüe e/ou pano úmido.
- Cuidado para não deixar felpas sobre a superfície.
- O uso freqüente do ACTS® (Código Baumer ER-501), é recomendado para superfícies com excesso de material incrustado.

Limpeza da câmara do gerador:

- Utilize um produto desincrustante ACTS® (Código Baumer ER-501).
- Desligue a alimentação das resistências.
- Retire a flange da bóia.
- Derrame a solução na câmara.
- Monte novamente a flange.
- Deixe a solução pelo tempo estipulado pelo fabricante.
- Realize a drenagem do gerador.
- Ligue o gerador para entrada de água limpa.
- Realize nova drenagem.
- Repita os dois últimos passos por três vezes.

Limpeza da grelha do dreno:

- Puxe-a para cima.
- Limpe a grelha.
- Posicione a grelha novamente no dreno.



5. Peças e Reposições

a. B-100-N/NL; B-200-N/NL; B-300-N/NL; B-500-N/NL

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA BAUMER	ESQUEMA ELÉTRICO / HIDRÁULICO	QUANTIDADE
1	Campainha	88027	AL.1	01
2	Fonte 24VCC	891684	FA.1	01
3	Válvula pneumática 1" NA	893827	V.0	01
4	Válvula retenção ½"	86154	-	01
5	Reparo válvula retenção ½"	85891	-	02
6	Válvula esfera ½"	43833	V.4	01
7	Pressostato	895331	P.1 / P.2	01
8	Válvula pneumática seletora	892868	V.2	01
9.1	Válvula segurança ½"	891762	VSE.1	01
9.2	Válvula segurança ½"	85201	VSE.2	01
10	Botão de emergência	98278	BTS.1	01
11	Botão Retentivo	890827	BT.1	01

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA BAUMER	ESQUEMA ELÉTRICO / HIDRÁULICO	QUANTIDADE
12.0	Resistência 9kW	34508	R.0	01
12.1	Resistência 12kW	34509	R.0	01
12.2	Resistência 18kW	34510	R.0	01
12.3	Resistência 26kW	34511	R.0	01
13	Manovacuômetro	892721	MA.2	01
14	Manômetro	892720	MA. 1	01
15	Cilindro pneumático Ø32 B-100-N/L; B-200-N/L	35669	CL	01
15.1	Cilindro pneumático Ø40 B-300-N/L; B-500-N/L	892957	CL	01
16	Botão luminoso vermelho retentivo	891847	BT. 2	01
17	Pressostato	890131	P.3	01
18.1	Guarnição B-100-N/L; B-200-N/L	89332	-	01
18.2	Guarnição B-300-N/L; B-500-N/L	890323	-	01
19	Comando "HI"	896566	-	01
20	Impressora	892739	-	01
21	Bobina papel	88216	-	01
22	Cartucho	87917	-	01
23	Termostato segurança	900984	T.1	01
24	Chave seletora 2 posições	88256	CH.1	01
25	Relé	55291	RL.3 a RL9	01
26	Bóia de nível	87539	B.O.	01
27	Filtro de ar	89521	F.1	01
28	Reparo válvula de retenção 1"	86487	-	01
29	Válvula retenção 1"	45275	-	01
30.1	Válvula solenóide ½"	46979	S.10	01
30.2	Válvula solenóide ½"	46979	S.11	01
31.1	Válvula solenóide 3/2 NF	890188	S.0	01
31.2	Válvula solenóide 3/2 NF	890188	S.1	01
32.1	Válvula solenóide ¼" NF	87731	S.3	04
32.2	Válvula solenóide ¼" NF	87731	S.4	04
32.3	Válvula solenóide ¼" NF	87731	S.5	04
32.4	Válvula solenóide ¼" NF	87731	S.6	04
33	Bomba d'água	88701	M.2	01
34	Sensor PT-100	89532	TCI	01
35	Válvula solenóide ½" NA	85491	-	01
36	Válvula pneumática ½" com regulação	87217	V.1	01
37	Filtro "Y"	45062	F2	01
38	Purgado	48440	-	01
39.1	Micro porta L.C.	89231	MS.1	01
39.2	Micro porta L.D.	89231	MS.2	01
40.1	Bomba vácuo 1,5cv - 60Hz	891057	M.1	01
40.2	Bomba vácuo 1,5cv - 50Hz	891610	M.1	01
40.3	Bomba vácuo 3,0cv - 60Hz	891058	M.1	01
40.4	Bomba vácuo 3,0cv - 50Hz	891705	M.1	01
40.5	Bomba Vácuo 4,0cv - 60Hz	891059	M.1	01
40.6	Bomba Vácuo 4,0cv - 50Hz	891704	M.1	01
41	Válvula segurança ¼"	893010	VSE.3	01

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA BAUMER	ESQUEMA ELÉTRICO / HIDRÁULICO	QUANTIDADE
42	Manômetro	893034	MA.3	01
43	Pressostato	892934	P.4	01
44	Compressor	890385	M.3	01
45	Relé 4VCC – 3 contatos reversíveis	34156	RL.1 e RL.2	01
46.1	Contator resistência 32A	891370	C.1	01
46.2	Contator resistência 50A	92265	C.1	01
46.3	Contator resistência 65A	47929	C.1	01
47	Fusível de proteção	87756	F1 a F10	01
48.1	Disjuntor tripolar 25A	86475	DJ.1	01
48.2	Disjuntor tripolar 40A	88458	DJ.1	01
48.3	Disjuntor tripolar 63A	88456	DJ.1	01
48.4	Disjuntor tripolar 80A	88457	DJ.1	01
49	Contator da Bomba de Vácuo 25A	47925	C.2	01
50.1	Disjuntor motor 220V-1,5cv	890783	DJ.2	01
50.2	Disjuntor motor 220V-3,0cv	891466	DJ.2	01
50.3	Disjuntor motor 220V-4,0cv	891196	DJ.2	01
50.4	Disjuntor motor 380V-1,5cv	890782	DJ.2	01
50.5	Disjuntor motor 380V-3,0cv	890783	DJ.2	01
50.6	Disjuntor motor 380V-4,0cv	891466	DJ.2	01

b. B-100-NX; B-200-NX; B-300-NX; B-500-NX








ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA BAUMER	ESQUEMA ELÉTRICO / HIDRÁULICO	QUANTIDADE
1	Campainha	88027	AL.1	01
2	Fonte 24VCC	891684	FA.1	01
3	Válvula Pneumática 1" NA	893827	V.0	01
4	Válvula de Retenção ½"	86154	-	01
5	Reparo da Válvula de Retenção ½"	85891	-	06
6	Válvula Esfera ½"	43833	V.3	01
7	Pressostato	895331	P.1	01
8	Válvula Pneumática Seletora	892868	V.5	01
9.1	Válvula Segurança ½ "	891762	VSE.1	01
9.2	Válvula Segurança ½ "	85201	VSE.2	01
10	Botão de Emergência	98278	BTS.1	01
11.1	Botão Retentivo	890827	BT.1	01
11.2	Botão Luminoso Vermelho	891847	BT.2	01
12.1	Resistência 12kW	34509	R.0	01
12.2	Resistência 18kW	34510	R.0	01
12.3	Resistência 26kW	34511	R.0	01
13	Manovacuômetro	892721	MA.2	01
14	Manômetro	892720	MA.1	01
15	Cilindro Pneumático Ø32 B-100-NX; B-200-NX	35669	CL	01
15.1	Cilindro pneumático Ø40 B-300-NX; B-500-NX	892957	CL	01
16.1	Guarnição B-100-NX; B-200-NX	89332	-	01
16.2	Guarnição B-300-NX; B-500-NX	890323	-	01
17.1	Transdutor Pressão	87191	TR.1(PCI)	02


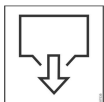



ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA BAUMER	ESQUEMA ELÉTRICO / HIDRÁULICO	QUANTIDADE
17.2	Transdutor Pressão	87191	TR.2(PCE)	02
18	Válvula Agulha com Trava	891071	V.4	01
19	Comando "HI"	896566	-	01
20	Impressora	892739	-	01
21	Bobina de Papel	88216	-	01
22	Cartucho	87917	-	01
23	Termostato de Segurança	900984	T.1	01
24	Chave Seletora duas posições	88256	CH.1	01
25	Relé	55291	RL.3 a RL9	01
26	Bóia de Nível	87539	B.O.	01
27	Filtro de Ar	89521	F.1	01
28	Reparo da Válvula Retenção 1"	86487	-	01
29	Válvula de Retenção 1"	45275	-	01
30.1	Válvula Solenóide ½"	46979	S.10	02
30.2	Válvula Solenóide ½"	46979	S.11	02
31.1	Válvula Solenóide 3/2 NF	893850	S.0	01
31.2	Válvula Solenóide 3/2 NF	893850	S.1	01
31.3	Válvula Solenóide 3/2 NF	893850	S.2	01
31.4	Válvula Solenóide 3/2 NF	893850	S.8	01
31.5	Válvula Solenóide 3/2 NF	893850	S.9	01
32.1	Válvula Solenóide ¼" NF	55010	S.3	02
32.2	Válvula Solenóide ¼" NF	55010	S.4	02
32.3	Válvula Solenóide ¼" NF	55010	S.5	02
32.4	Válvula Solenóide ¼" NF	55010	S.6	02
33	Bomba D'água	87701	M.2	01
34	Sensor PT-100	88701	TCI	01
35.1	Válvula Pneumática ½"	893573	V.2	01
35.2	Válvula Pneumática ½"	893573	V.8	01
35.3	Válvula Pneumática ½"	893573	V.9	01
36	Válvula Pneumática ½" com Regulagem	87217	V.1	01
37	Filtro "Y"	45062	F.2	02
38	Purgado	48440	-	01
39.1	Micro Porta L.C.	89231	MS.1	01
39.2	Micro Porta L.D.	89231	MS.2	01
40.1	Bomba de Vácuo 1,5 cv – 60 Hz	891057	M.1	01
40.2	Bomba de Vácuo 1,5 cv – 50 Hz	891610	M.1.	01
40.3	Bomba de Vácuo 3,0cv - 60Hz	891058	M.1	01
40.4	Bomba de Vácuo 3,0cv - 50Hz	891705	M.1	01
40.5	Bomba de Vácuo 4,0cv - 60Hz	891059	M.1	01
40.6	Bomba de Vácuo 4,0cv - 50Hz	891704	M.1	01
41	Válvula de Segurança ¼"	893010	VSE.3	01
42	Manômetro	893034	MA.3	01
43	Pressostato	892934	P.4	01
44	Compressor	890385	M.3	01
45	Relé 24VCC – 3 contatos rev	34156	RL.1 e RL.2	01
46	Fusível de Proteção	87756	F1 a F10	01
47.1	Contator resistência 32A	891370	C.1	01
47.2	Contator Resistência 40 A	47926	C.1	01
47.3	Contator resistência 50A	92265	C.1	01

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA BAUMER	ESQUEMA ELÉTRICO / HIDRÁULICO	QUANTIDADE
47.4	Contator resistência 65A	47929	C.1	01
48.1	Disjuntor tripolar 25A	86475	DJ.1	01
48.2	Disjuntor tripolar 40A	88458	DJ.1	01
48.3	Disjuntor Tripolar 63 A	88456	DJ.1	01
48.4	Disjuntor tripolar 80A	88457	DJ.1	01
49	Contator Bomba de Vácuo 25 A	47925	C.2	01
50.1	Disjuntor Motor 220V – 1,5cv	890783	DJ.2	01
50.2	Disjuntor Motor 220V - 3,0cv	891466	DJ.2	01
50.3	Disjuntor Motor 220V - 4,0cv	891196	DJ.2	01
50.4	Disjuntor Motor 380V – 1,5cv	890782	DJ.2	01
50.5	Disjuntor Motor 380V - 3,0cv	890783	DJ.2	01
50.6	Disjuntor Motor 380V - 4,0cv	891466	DJ.2	01
51	Bobina da Válvula Manifold	893851	-	01






6. Símbolos Gráficos

Simbologia utilizada no Esterilizador Baumer - modelo HI SPEED:

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Indica pressão na câmara externa.
	Indica pressão da câmara interna.
	Indica pressão da entrada de vapor.
	Indica botão de abertura e fechamento de porta lado descarga (esterilizador com duas portas).
ETIQUETA	DESCRIÇÃO
	Etiqueta de identificação de entrada de água.
	Etiqueta de identificação de entrada de ar.
	Etiqueta de identificação de entrada de vapor.

ETIQUETA	DESCRIÇÃO
	Etiqueta indicadora de não pise.
	Etiqueta de identificação de saída dreno.
	Etiqueta de identificação de eletricidade.
	Etiqueta de identificação de superfície quente.
	Atenção, consultar documentos acompanhantes.

Simbologia utilizada na embalagem do Esterilizador Baumer - modelo HI SPEED:

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Sentido de estocagem.
	Frágil, manusear com cuidado.
	Atenção, consultar documentos acompanhantes.
	Consultar instruções de operação.
	Manter seco.

7.Problemas e Soluções

PROBLEMA	CAUSAS	MEDIDAS CORRETIVAS
Porta não abre:	<ul style="list-style-type: none"> Guarnição enroscando. Falta de pressão de ar comprimido. 	<ul style="list-style-type: none"> Lubrificar guarnição. Verificar a pressão do ar comprimido.
Positivando teste biológico:	<ul style="list-style-type: none"> Falha na penetração de vapor. Tempo de exposição incorreto. Remoção de ar ineficiente. 	<ul style="list-style-type: none"> Verificar a preparação do pacote. Programar tempo adequado. Contatar assistência técnica.

PROBLEMA	CAUSAS	MEDIDAS CORRETIVAS
Câmara interna não atinge a temperatura selecionada:	<ul style="list-style-type: none"> Mau funcionamento do purgador. Queima da resistência elétrica. 	<ul style="list-style-type: none"> Verificar funcionamento. Checar as resistências.
Subida de pressão na câmara interna sem disparo do ciclo:	<ul style="list-style-type: none"> Vazamento de ar comprimido da canaleta para a câmara interna. 	<ul style="list-style-type: none"> Limpar ou trocar guarnição.
Movimento de abertura e fechamento de portas realizado com dificuldade:	<ul style="list-style-type: none"> Falta lubrificação na guarnição de vedação. 	<ul style="list-style-type: none"> Lubrificar a guarnição de vedação
Oscilação na temperatura:	<ul style="list-style-type: none"> Acúmulo de água no dreno. Sensor de temperatura solto. 	<ul style="list-style-type: none"> Desobstruir o dreno. Reapertar o sensor.
Pacotes saem molhados:	<ul style="list-style-type: none"> Preparação de pacotes ou carga inadequada. Vapor úmido. Entrada de ar na câmara interna. 	<ul style="list-style-type: none"> Respeitar o procedimento de pacotes e cargas mencionado no capítulo específico. Verificar o correto funcionamento dos purgadores. Checar a vedação das portas e também válvulas de retenção.
Pacotes, instrumentais ou utensílios manchados:	<ul style="list-style-type: none"> Qualidade do vapor / água. 	<ul style="list-style-type: none"> Checar se a qualidade da água atende as especificações deste manual. Checar o elemento do filtro de água, substituindo-o se necessário. Checar a câmara de geração de vapor quanto à quantidade de minerais e partículas em suspensão depositados em suas paredes, fundo e resistências; limpá-los caso necessário.

Em caso de não resolução do problema ou outros problemas, contatar o agente autorizado Baumer S.A..

8. Esquema Elétrico

- B-100-N**

Anexo no final deste manual (ee895735).

- B-200-N; B-300-N; B-500-N**

Anexo no final deste manual (ee893875; ee894371G; ee894372G; ee894373G).

- B-100-NL**

Anexo no final deste manual (ee894759).

- B-200-NL; B-300-NL; B-500-NL**

Anexo no final deste manual (ee894666; ee894843G; ee894844G; ee894845G).

- B-100-NX**

Anexo no final deste manual (ee893813).

- B-200-NX; B-300-NX; B-500-NX**

Anexo no final deste manual (ee898460; ee898461; ee898462; ee898463).

9. Esquema Hidropneumático

- **B-100-N**

Anexo no final deste manual (H1-100).

- **B-200-N; B-300-N; B-500-N**

Anexo no final deste manual (H1-200).

- **B-100-NL; B-200-NL; B-300-NL; B-500-NL**

Anexo no final deste manual (H1-LAC).

- **B-100-NX; B-200-NX; B-300-NX; B-500-NX**

Anexo no final deste manual (H1-NX).

10. Vista Explodida

- **B-100-N; B-200-N; B-300-N; B-500-N**

Anexo no final deste manual (V1-200).

- **B-100-NL; B-200-NL; B-300-NL; B-500-NL**

Anexo no final deste manual (V1-LAC).

- **B-100-NX; B-200-NX; B-300-NX; B-500-NX**

Anexo no final deste manual (V1-NX).

11. Descarte do Produto

A Baumer S.A. recomenda que o esterilizador seja devolvido à sua unidade fabril, sem custo, em Mogi Mirim/SP Brasil, na Av. Prefeito Antonio Tavares Leite, 181 – CEP: 13803-330 – A/C Gestão Pós-Venda, com a instrução de “Descarte do Produto”. Caso o comprador do produto decida pelo descarte em seu país e/ou cidade, este descarte deve seguir as normas de descarte do local e/ou país destino, bem como enviar um e-mail, carta e/ou fax para a empresa Baumer S.A. que a mesma foi descartada conforme legislação.

12. G.P.V. - Gestão Pós-Venda

Baumer S.A.

Av. Prefeito Antonio Tavares Leite, 181 • Parque da Empresa

CEP: 13803-330 • Mogi Mirim • SP

Caixa Postal: 1081

Fone/Fax: 19 3805-7699

E-mail: gpv@baumer.com.br • baumer@baumer.com.br

EQUIPAMENTO: ESTERILIZADOR HI SPEED B-100-N

ENTRADAS DIGITAIS

X1-9 - Relé porta de carga (RL1)
X1-8 - Relé porta de descarga (RL2)
X1-7 - Micro porta de carga (MS1)
X1-6 - Micro porta de descarga (MS2)
X1-5 - Pressostato 121 C
X1-4 - Relé Térmico Bomba de Vácuo
X1-3 - Pressostato de segurança

ENTRADAS ANALÓGICAS

X5-4 - Sensor PT-100 de controle (TCI)

SAÍDAS DIGITAIS

X1-1 - Válvula de vácuo (S0) - (Opcional)
X2-8 - Sistema de vácuo
X2-7 - Válvula de vapor na C.I. (S1)
X2-6 - Válvula de ar na C.I. (S2)
X2-5 - Alarme (AL1)
X2-4 - Controle da porta (RL7)
X2-3 - Saída para gerador (RL8)



DATA:

DES: PAULO

CONF: RIBEIRO

APROV: KOSEKI

DESENHO ELÉTRICO

Substitui:

Sub:

SUB
LETRA

A

B

NÚMERO DE PÁGINAS: 11

FOLHA:


CAPA

CÓDIGO:

ee895735

SUB-A: ADAPTACAO PARA CLP ZAP-900
 SUB-B: INCLUSAO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA
 SUB-C:

SUB-D:
 SUB-E:
 SUB-F:

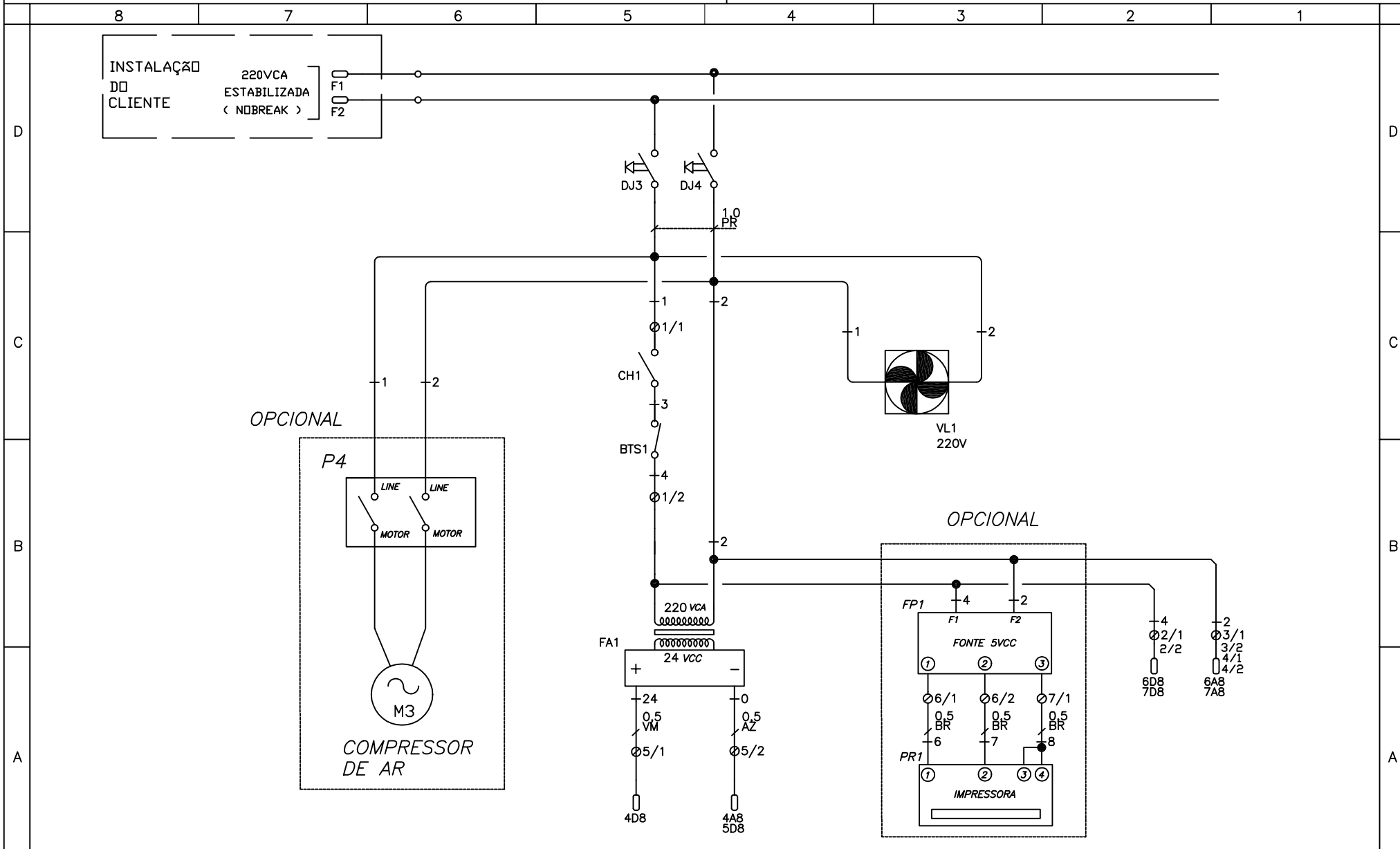

DENOMINAÇÃO: Circuito das fontes

DES: PAULO

CONF: RIBEIRO

APROV: KOSEKI

Substitui: ee895735

SUB
LETRA

A

B

Sub: A

FOLHA:


1/11

CÓDIGO:

ee895735


SUB-A: ADAPTAÇÃO PARA CLP ZAP-900
SUB-B: INCLUSÃO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA
SUB-C:

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

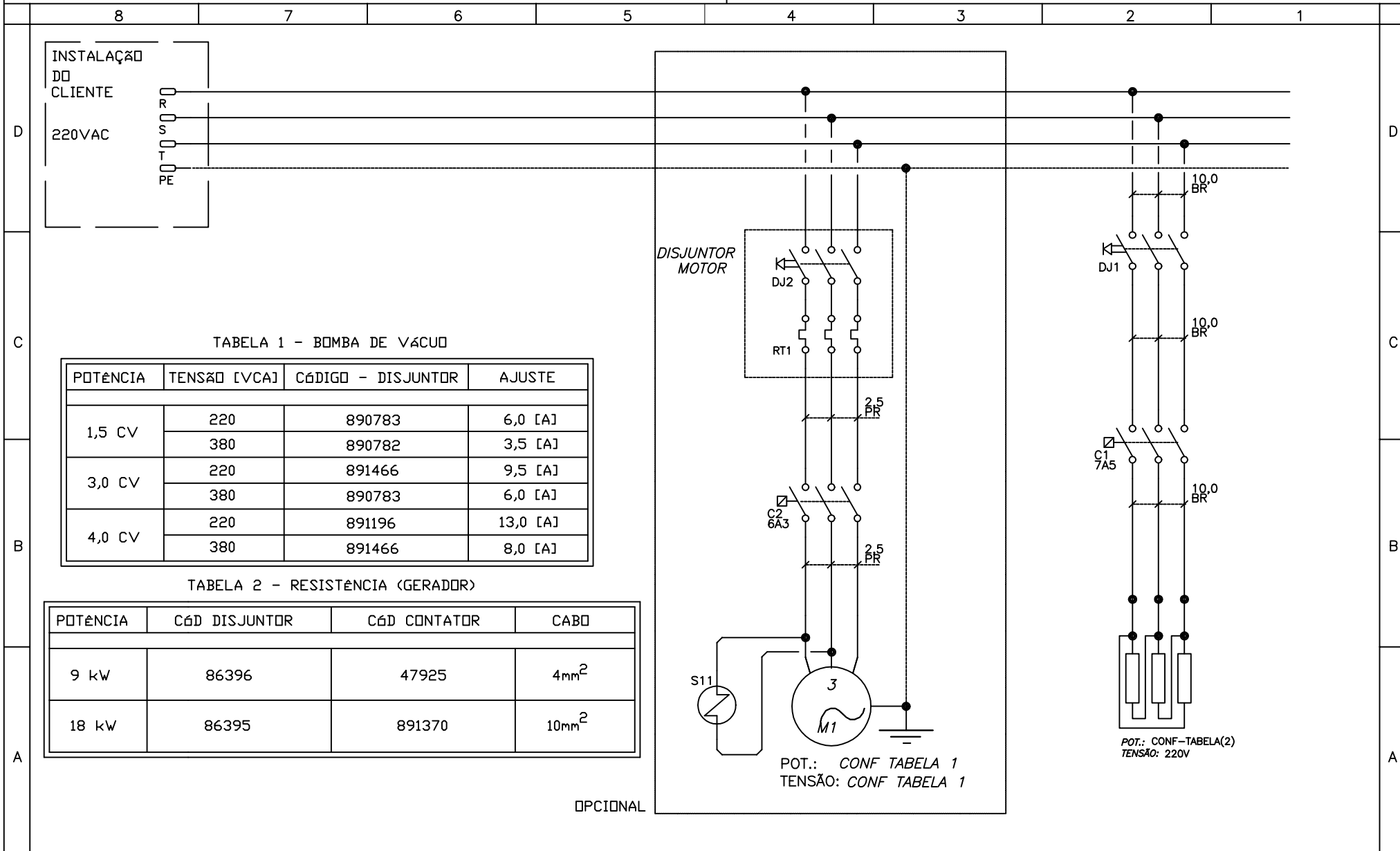

SUB-A: ADAPTAÇÃO PARA CLP ZAP-900
 SUB-B: INCLUSÃO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA
 SUB-C:

SUB-D:
 SUB-E:
 SUB-F:

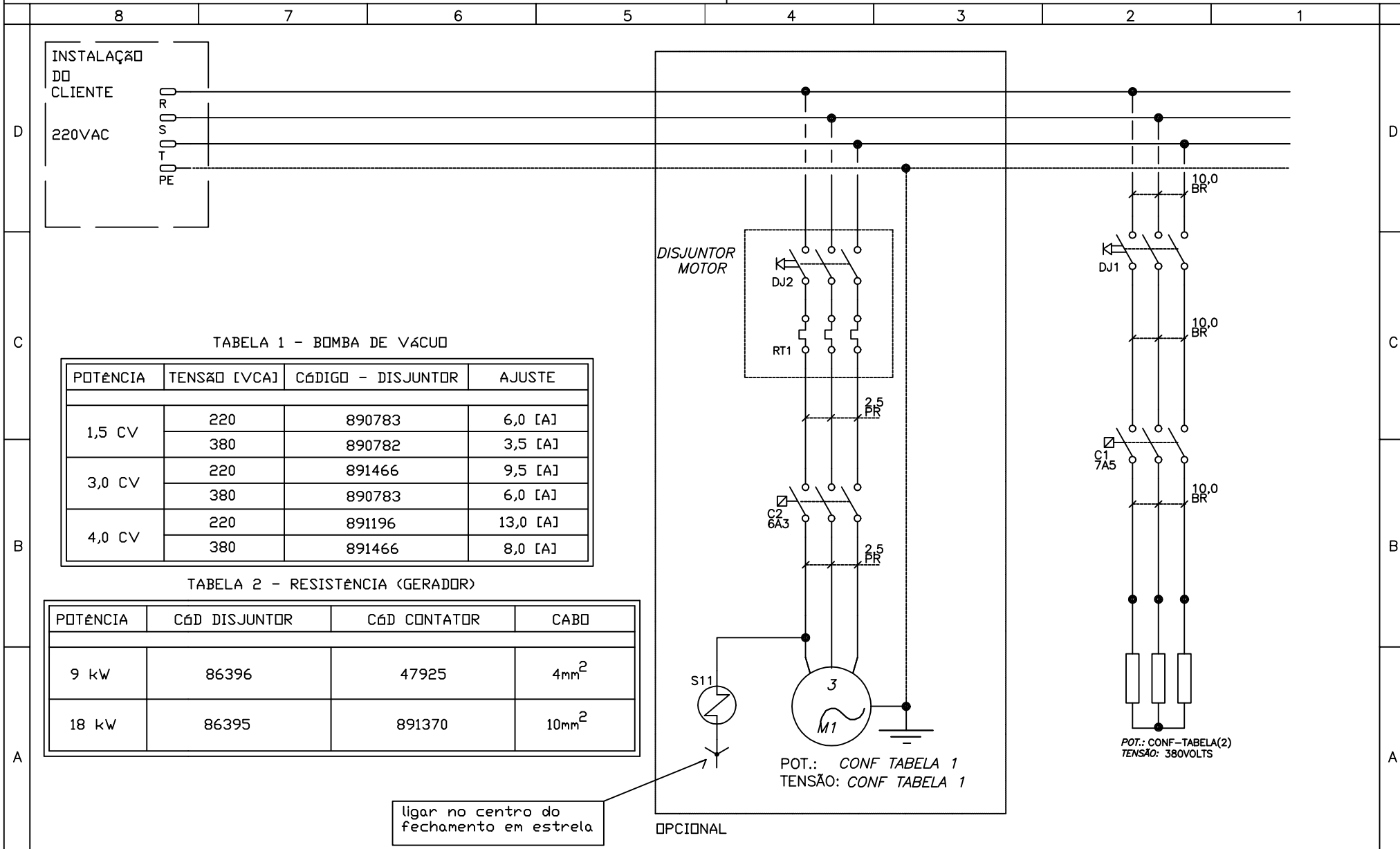

DENOMINAÇÃO: Circuito potência 380V

DES: PAULO

CONF: RIBEIRO

APROV: KOSEKI

Substitui: ee895735

Sub: A

FOLHA:

SUB
LETRA

A

B


3/11

CÓDIGO:

ee895735

SUB-A: ADAPTACAO PARA CLP ZAP-900
 SUB-B: INCLUSAO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA
 SUB-C:

SUB-D:
 SUB-E:
 SUB-F:

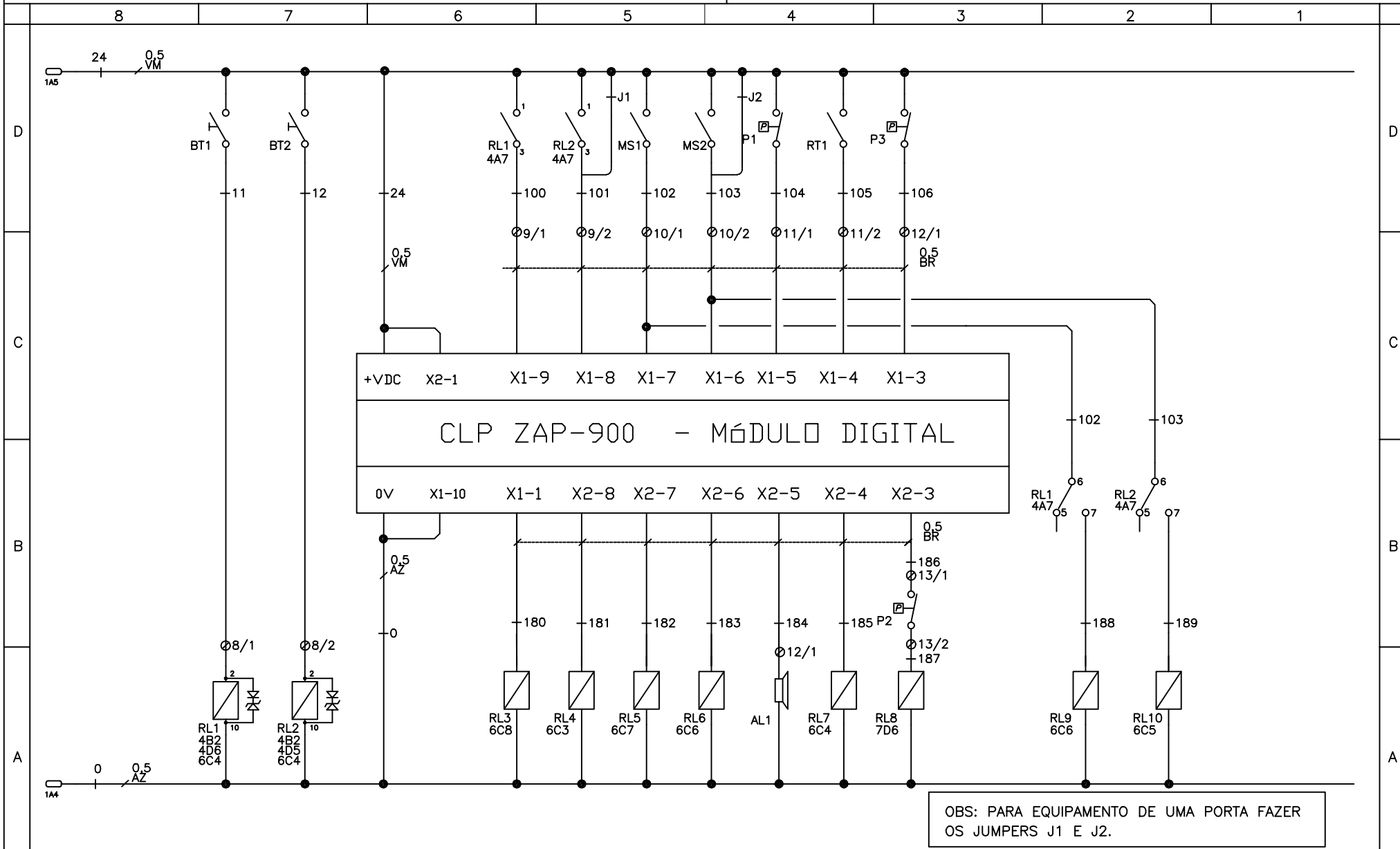

DENOMINAÇÃO: Circuito digital

DES: PAULO

CONF: RIBEIRO

APROV: KOSEKI

Substitui: ee895735

SUB
LETRA

A

B


Sub: A

FOLHA:


4/11

CÓDIGO:



ee895735

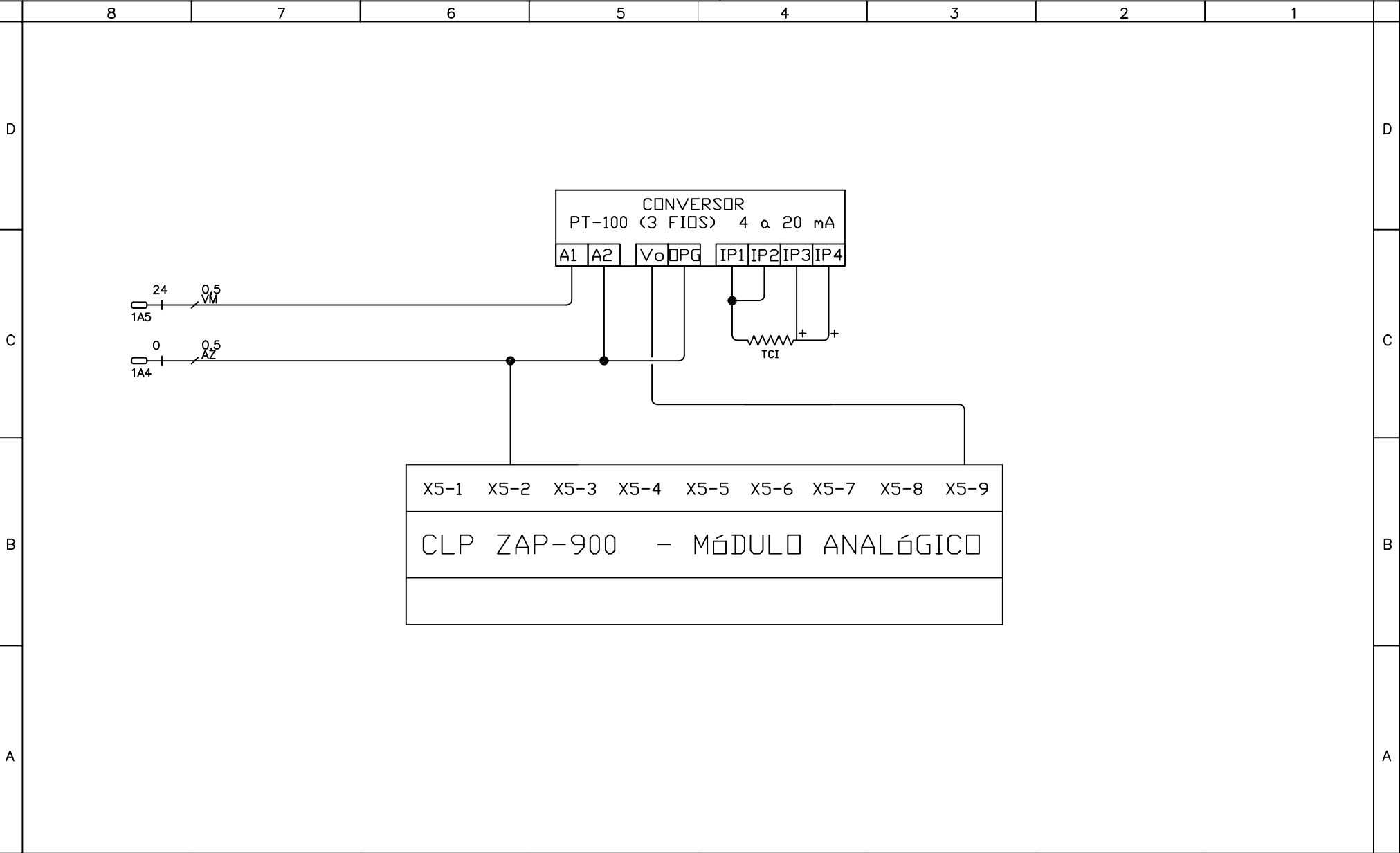


SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

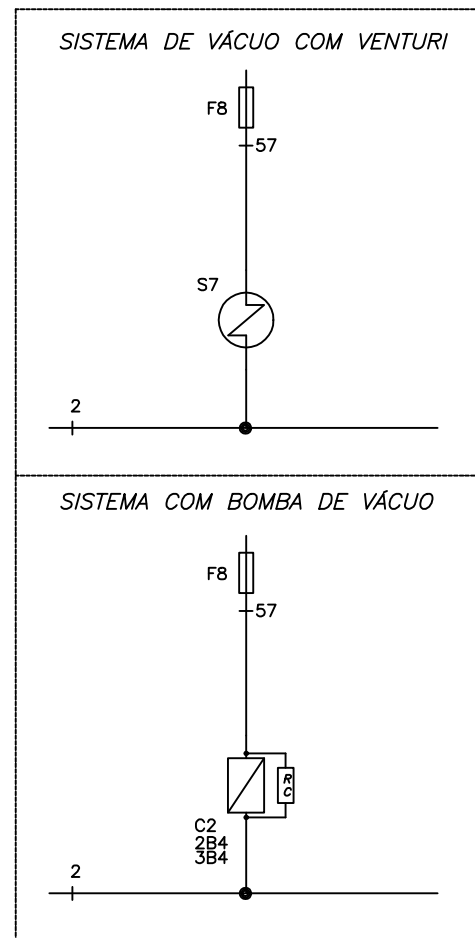

ee895735

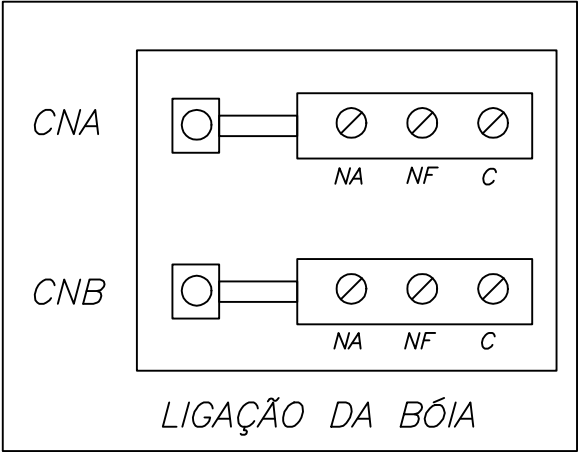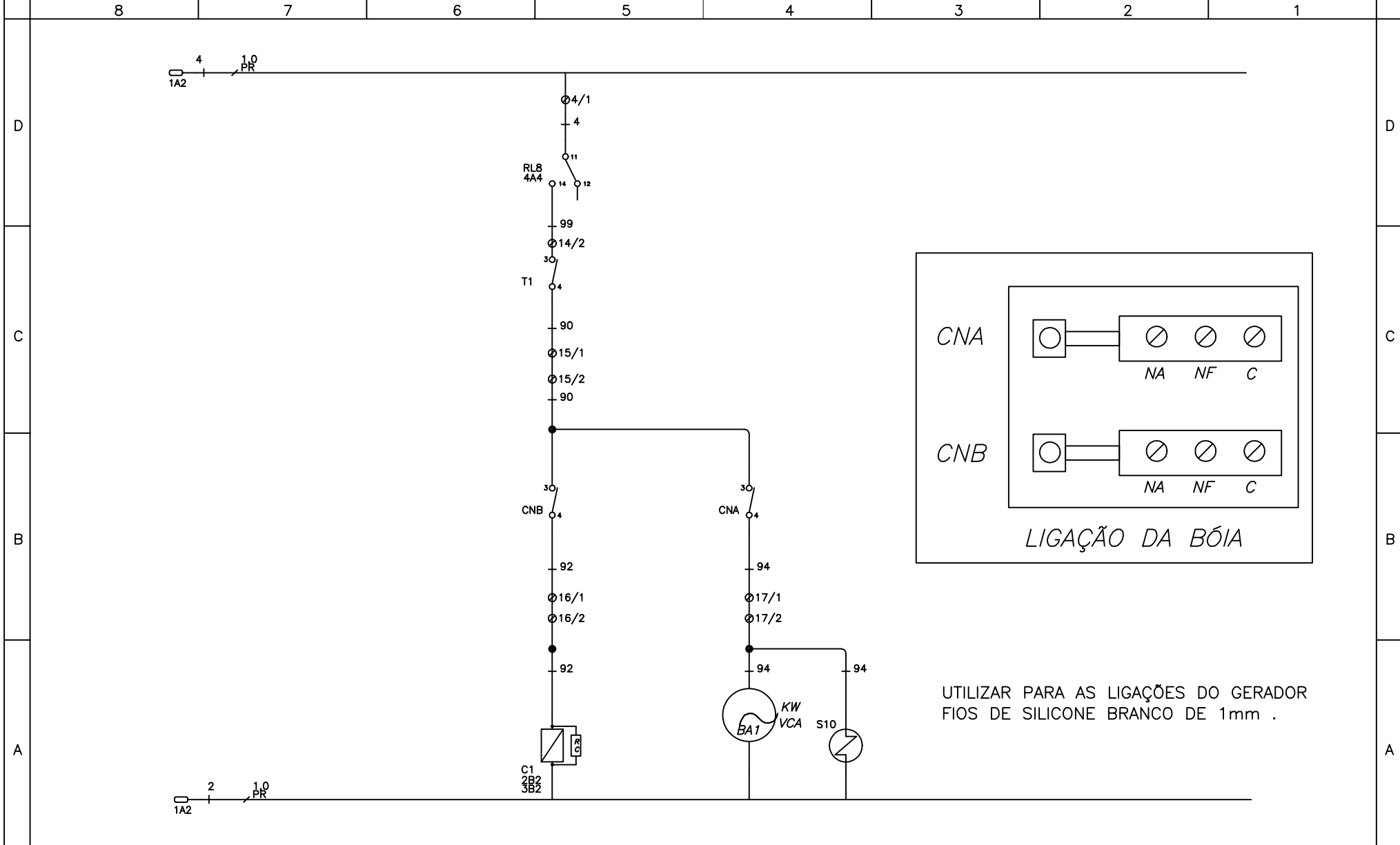


UTILIZAR PARA AS LIGAÇÕES DO GERADOR
FIOS DE SILICONE BRANCO DE 1mm .

SUB-A: ADAPTACAO PARA CLP ZAP-900					SUB-D:						
SUB-B: INCLUSAO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA					SUB-E:						
SUB-C:					SUB-F:						
	8	7	6	5	4	3	2	1			
D	T1	Borne terra			RL3 a RL10	Relés de acoplamento de saídas - 55291			D		
	DJ3/DJ4	Disjuntor monopolares para o comando - 891149			S0	Válvula de vácuo na CI (Opcional)					
	CH1	Chave liga/desliga - 88256			S1	Válvula de vapor na CI					
	BTS1	Botão de emergência - 98278			S2	Válvula de ar na CI					
C	FA1	Fonte de alimentação 24Vcc - HI TECNOLOGIA - 891850			S3	Válvula de ar na canaleta de carga			C		
	FP1	Fonte para a impressora 5Vcc - 87763			S4	Válvula de vácuo na canaleta de carga					
	RT1	Bloco auxiliar disjuntor motor - 891848			S5	Válvula de ar na canaleta de descarga					
	BR1	Barra de aterramento			S6	Válvula de vácuo na canaleta de descarga					
	S7	Válvula de venturi na canaleta (opcional)			S11	Válvula de água para bomba de vácuo					
	BT1	Botão para a porta de carga - 890827			P3	Pressostato de segurança					
B	BT2	Botão para a porta de descarga - 890827			DJ1	Disjuntor da resistência			B		
	RL1	Relé porta de carga - 34156			C1	Contator da resistência					
	RL2	Relé porta de descarga - 34156			DJ2	Disjuntor da bomba de vácuo (Opcional)					
	MS1	Micro porta de carga			C2	Contator da bomba de vácuo (Opcional)					
	MS2	Micro porta de descarga			M3	COMPRESSOR DE AR					
A	P1	Pressostato de 121°C			P4	PRESSOSTATO DO COMPRESSOR DE AR			A		
	P2	Pressostato de 134°C			CV1	Conversor PT-100 para 4 a 20mA - 890083					
	F1 a F9	Fusíveis de proteção (0,5A) - 87756			VL1	Ventilador comando					
	AL1	Campainha para alarme - 88027									
	TCI	Sensor PT-100 de controle									
	8	7	6	5	4	3	2	1			
		DENOMINAÇÃO: Componentes					CÓDIGO: ee895735				
		DES: PAULO		Substitui: ee895735		Sub: A					
		CONF: RIBEIRO		SUB LETRA	A	B					
		APROV: KOSEKI									
		FOLHA: 8/11									

SUB-A: ADAPTACAO PARA CLP ZAP-900
SUB-B: INCLUSAO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA
SUB-C:

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

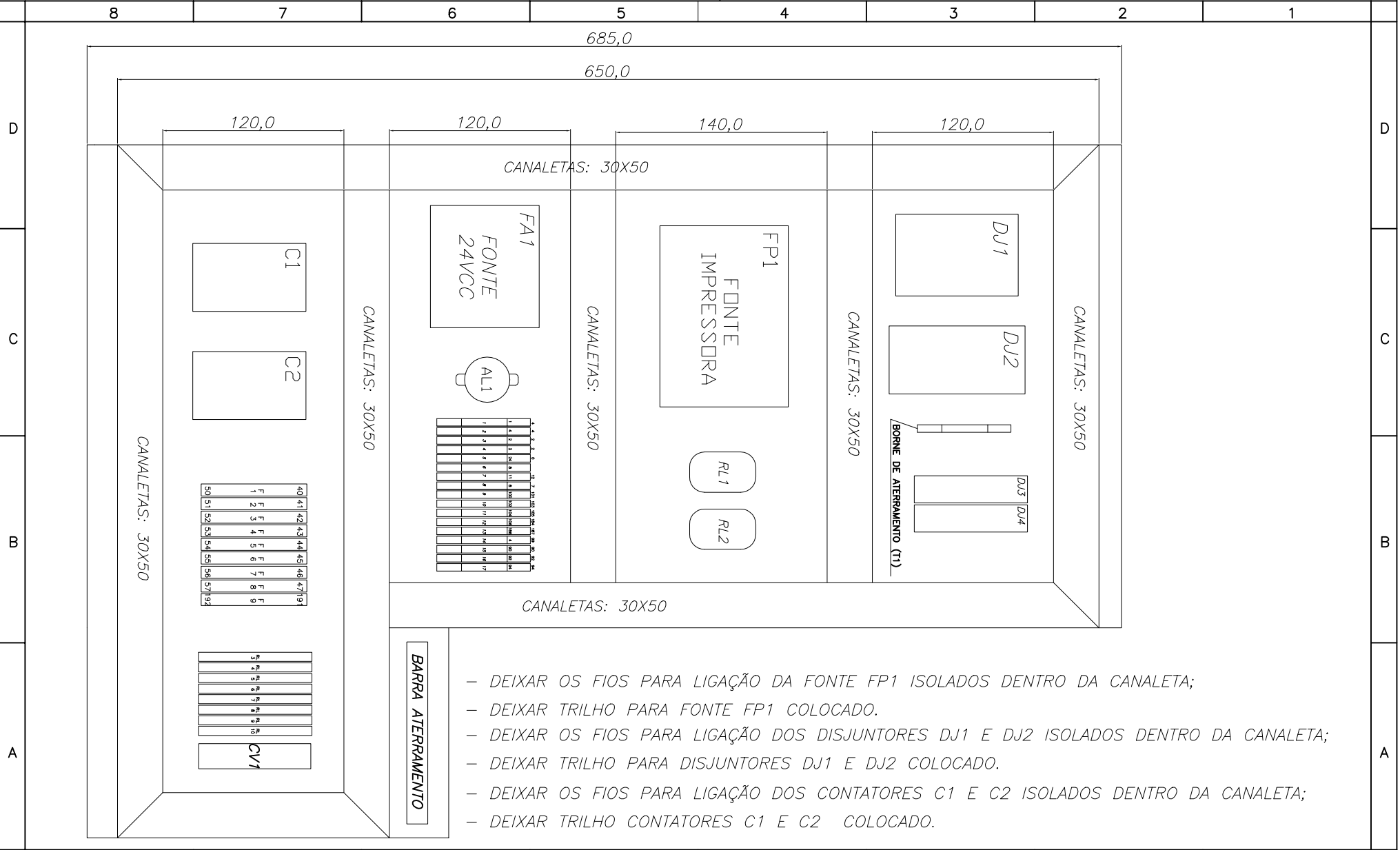

- DEIXAR OS FIOS PARA LIGAÇÃO DA FONTE FP1 ISOLADOS DENTRO DA CANALETA;
- DEIXAR TRILHO PARA FONTE FP1 COLOCADO.
- DEIXAR OS FIOS PARA LIGAÇÃO DOS DISJUNTORES DJ1 E DJ2 ISOLADOS DENTRO DA CANALETA;
- DEIXAR TRILHO PARA DISJUNTORES DJ1 E DJ2 COLOCADO.
- DEIXAR OS FIOS PARA LIGAÇÃO DOS CONTADORES C1 E C2 ISOLADOS DENTRO DA CANALETA;
- DEIXAR TRILHO CONTADORES C1 E C2 COLOCADO.




DENOMINAÇÃO: LAY-OUT PAINEL

DES: PAULO
CONF: RIBEIRO
APROV: KOSEKI

Substitui: ee895735
Sub: A
SUB LETRA A B

FOLHA: 9/11

CÓDIGO: ee895735

8		7		6		5		4		3		2		1	
 BAUMER		DENOMINAÇÃO: Régua de Bone										CÓDIGO:			
		DES: Paulo		Substitui: ee895735				Sub: A		FOLHA: 10/11		ee895735			
		CONF: Ribeiro		SUB LETRA		A		B							
		APROV: Koseki													

EQUIPAMENTO: ESTERILIZADOR HI SPEED B-200/300/500-N

ENTRADAS DIGITAIS

X1-9 - Relé porta de carga (RL1)
X1-8 - Relé porta de descarga (RL2)
X1-7 - Micro porta de carga (MS1)
X1-6 - Micro porta de descarga (MS2)
X1-5 - Pressostato 121 C
X1-4 - Relé Térmico Bomba de Vácuo
X1-3 - Pressostato de segurança

ENTRADAS ANALÓGICAS

X5-4 - Sensor PT-100 de controle (TCI)

SAÍDAS DIGITAIS

X1-1 - Válvula de vácuo (S0)
X2-8 - Bomba de Vácuo (C3)
X2-7 - Válvula de vapor na C.I. (S1)
X2-6 - Válvula de ar na C.I. (S2)
X2-5 - Alarme (AL1)
X2-4 - Controle da porta (RL7)
X2-3 - Saída para gerador (RL8)



DATA:

DES: PAULO

CONF: RIBEIRO

APROV: KOSEKI

DESENHO ELÉTRICO

Substitui: ee893875

Sub: A

SUB
LETRA

A

B

NÚMERO DE PÁGINAS: 10

FOLHA:


CAPA

CÓDIGO:

ee893875

SUB-A: ADAPTACAO PARA CLP ZAP-900
 SUB-B: INCLUSAO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA
 SUB-C:

SUB-D:
 SUB-E:
 SUB-F:

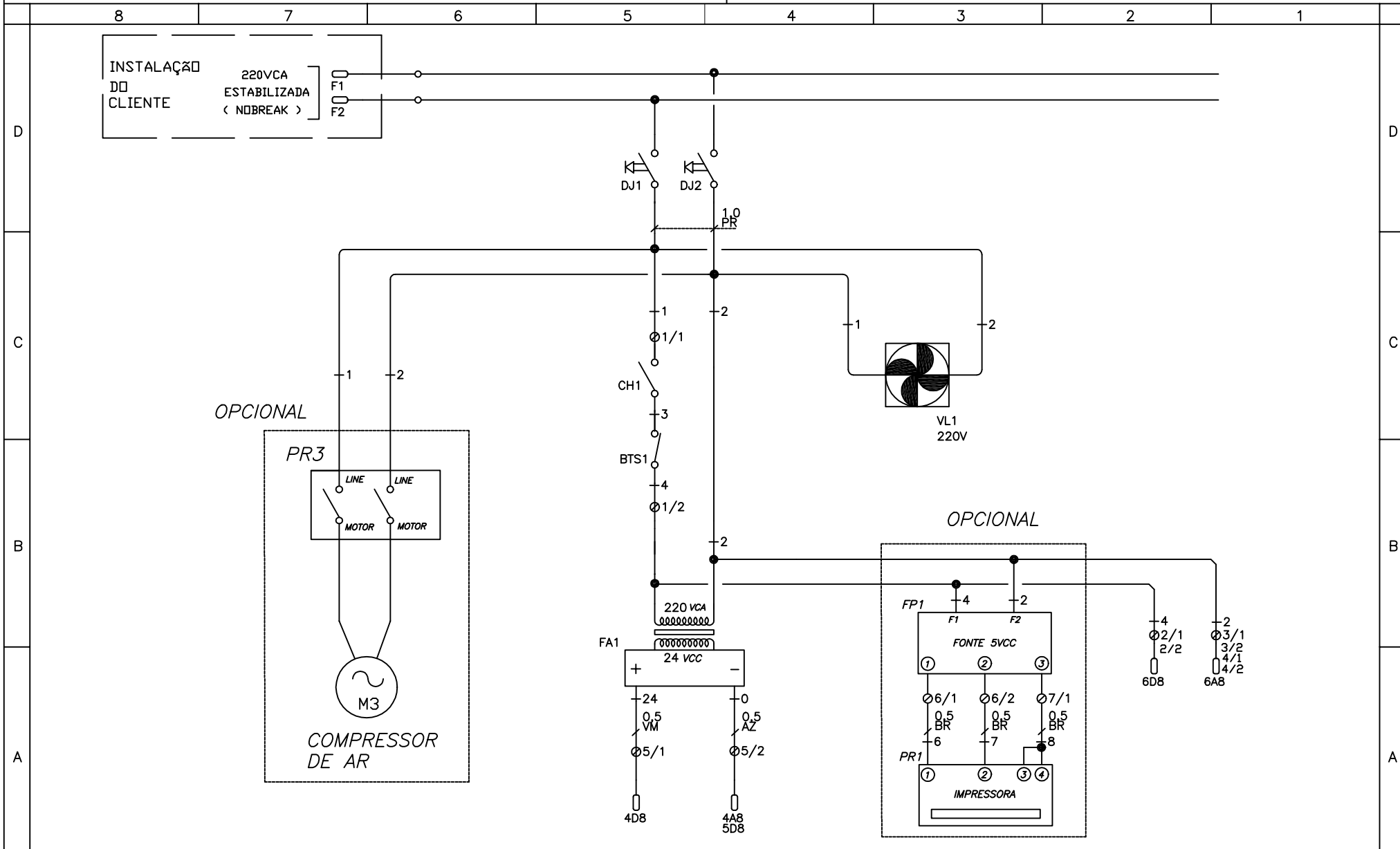

DENOMINAÇÃO: Circuito das fontes

DES: PAULO

Substitui: ee893875

Sub: A

FOLHA:

CONF: RIBEIRO

SUB
LETRA


A


B

1/10

CÓDIGO:


ee893875

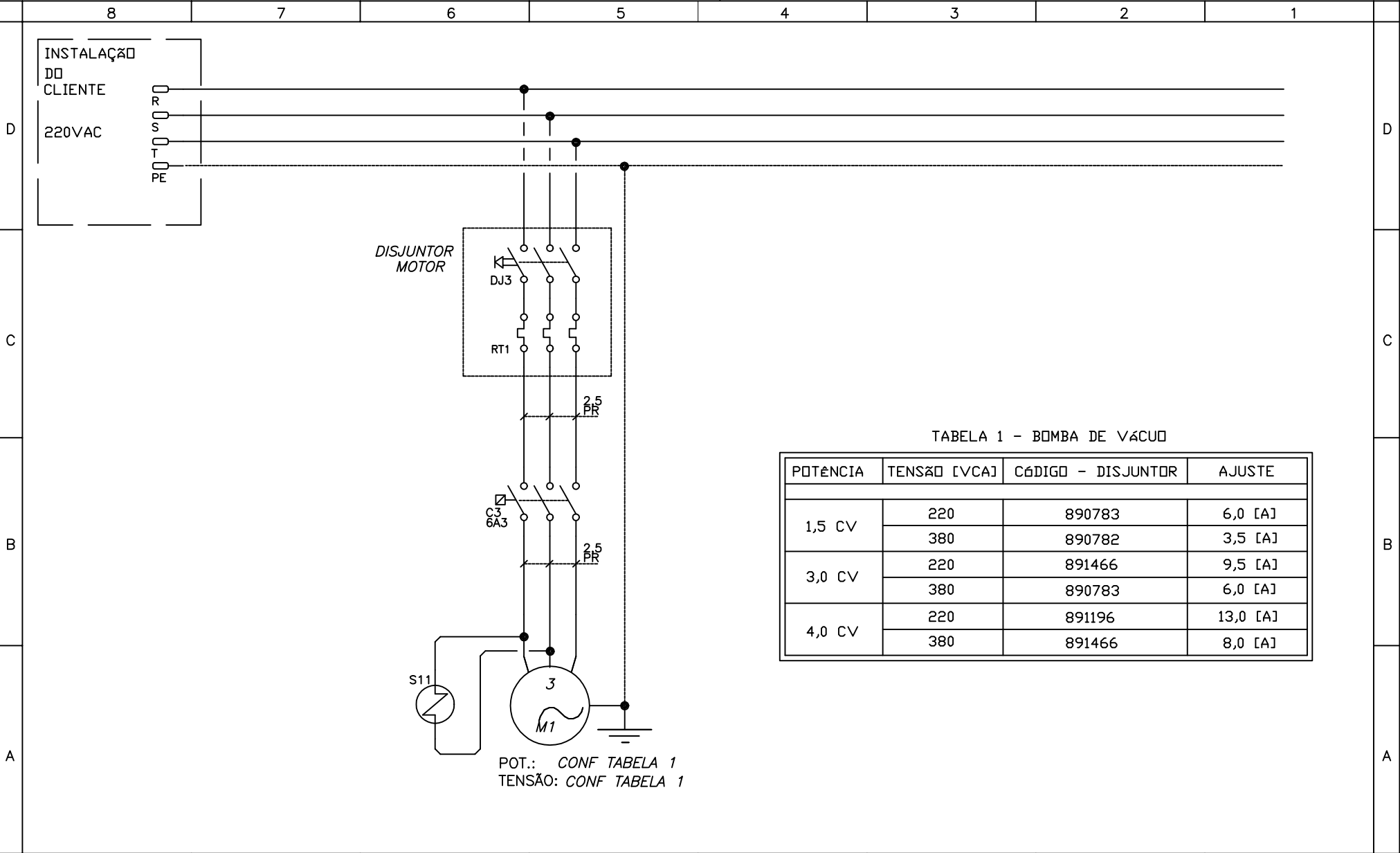

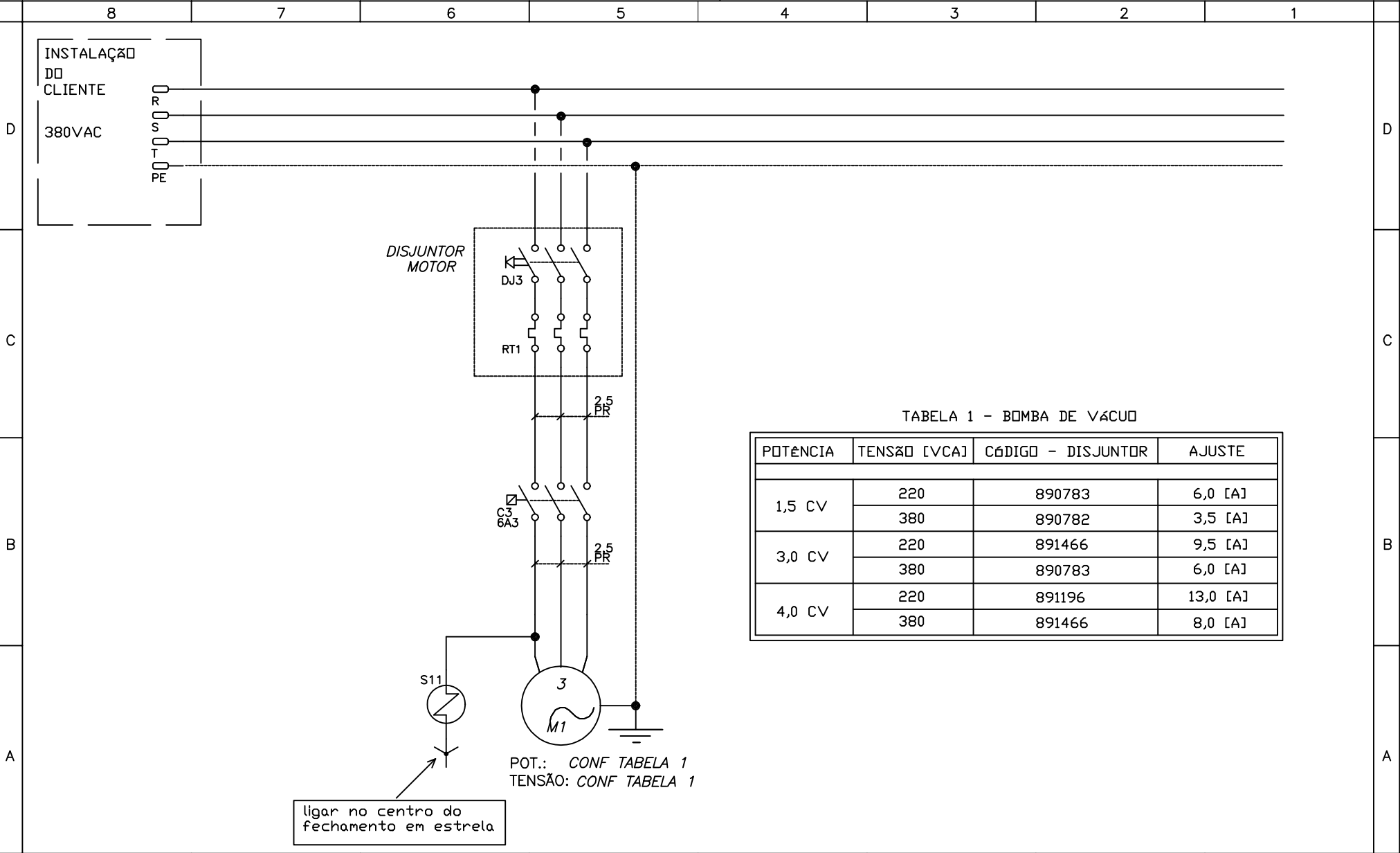

SUB-A: ADAPTACAO PARA CLP ZAP-900
 SUB-B: INCLUSAO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA
 SUB-C:

SUB-D:
 SUB-E:
 SUB-F:

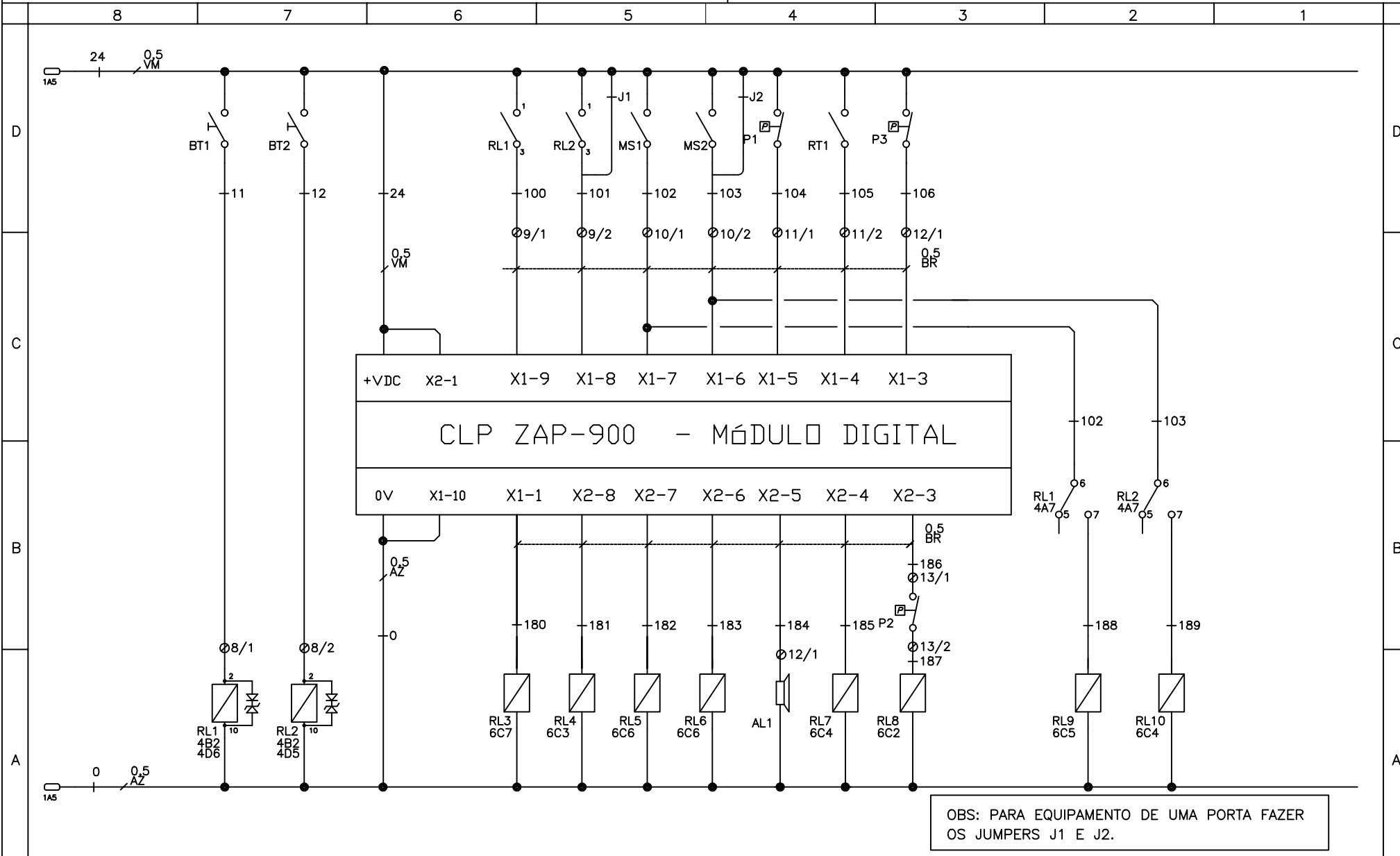

DENOMINAÇÃO: Circuito digital

DES: PAULO

CONF: RIBEIRO

APROV: KOSEKI

Substitui: ee893875


Sub: A

FOLHA:

4/10


CÓDIGO:

ee893875

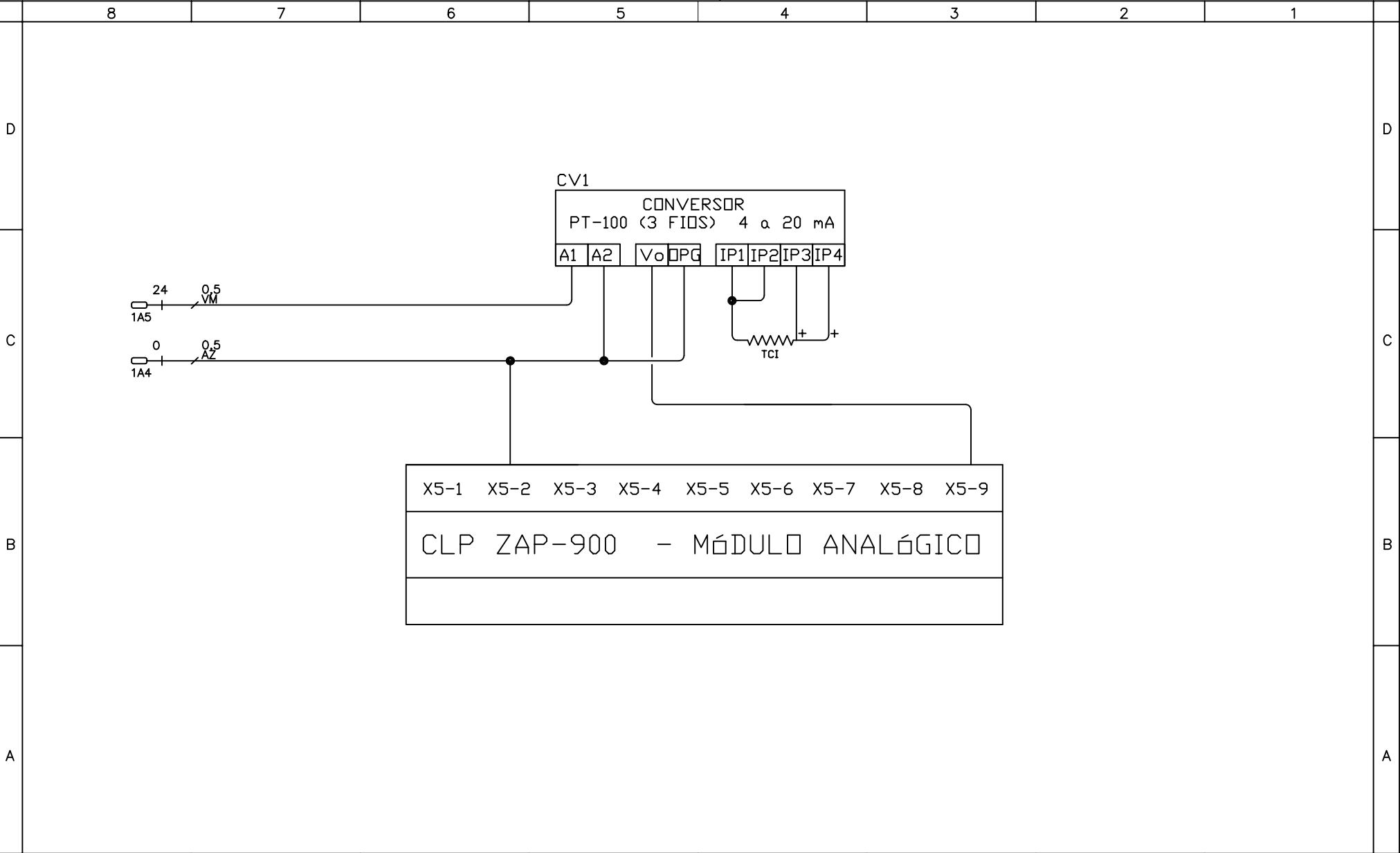

SUB-A: ADAPTACAO PARA CLP ZAP-900
 SUB-B: INCLUSAO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA
 SUB-C:

SUB-D:
 SUB-E:
 SUB-F:

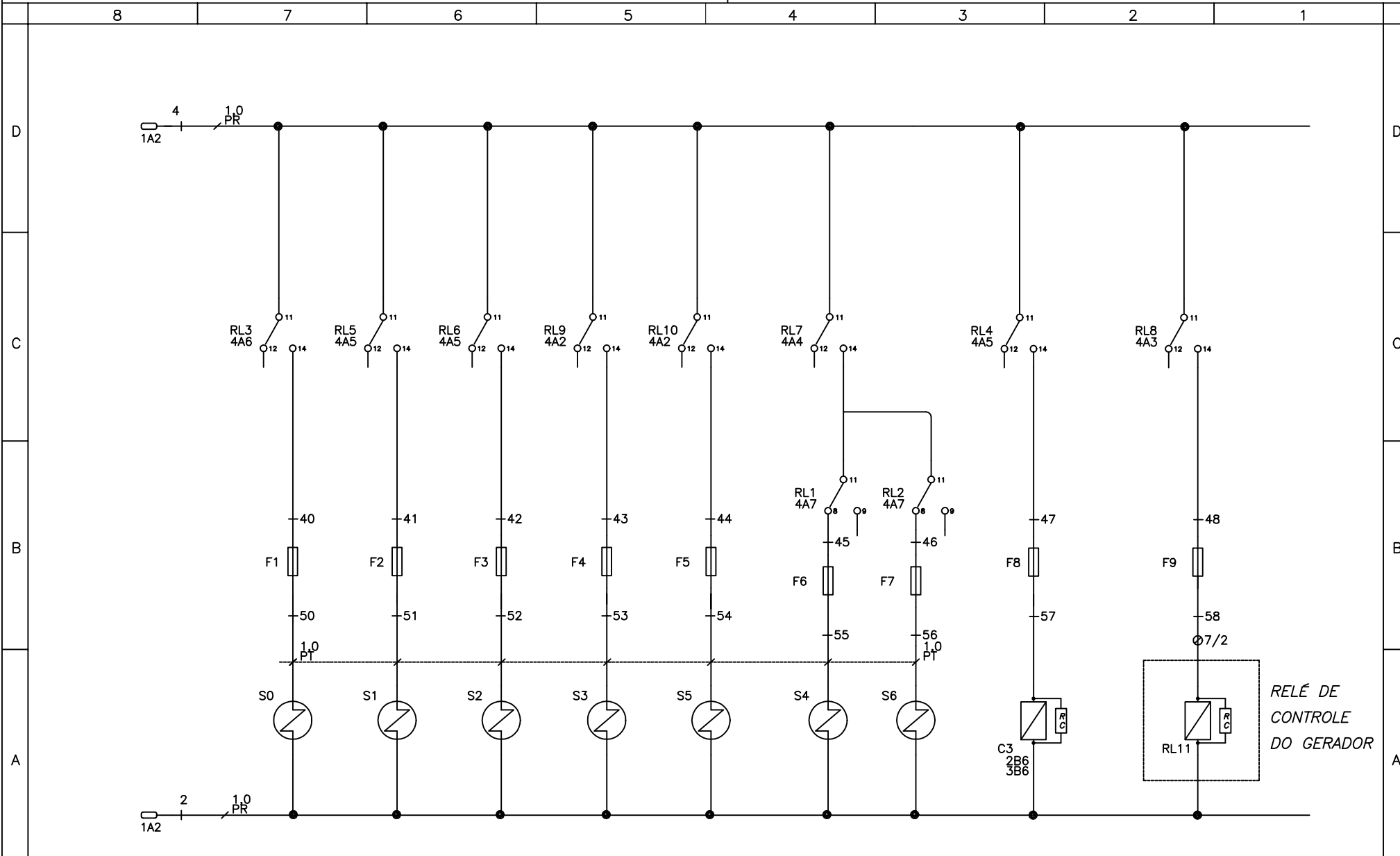

DENOMINAÇÃO: Relés para saídas

DES: PAULO

CONF: RIBEIRO

APROV: KOSEKI

Substitui: ee893875


Sub: A


FOLHA:


6/10

CÓDIGO:


ee893875

SUB-A: ADAPTACAO PARA CLP ZAP-900					SUB-D:								
SUB-B: INCLUSAO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA					SUB-E:								
SUB-C:					SUB-F:								
	8	7	6	5	4	3	2	1					
D	DJ3	Disjuntor motor da bomba de vácuo (vide pq. 02 e 03)			RL3 a RL10	Relés de acoplamento de saídas - 55291			D				
	DJ1/DJ2	Disjuntor monopolares para o comando - 891149			S0	Válvula de vácuo na CI							
	CH1	Chave liga/desliga - 88256			S1	Vávula de vapor na CI							
	BTS1	Botão de emergência - 98278			S2	Válvula de ar na CI							
C	FA1	Fonte de alimentação 24Vcc - HI TECNOLOGIA - 891850			S3	Válvula de ar na canaleta de carga			C				
	FP1	Fonte para a impressora 5Vcc - 87763			S4	Válvula de vácuo na canaleta de carga							
	RT1	Bloco auxiliar disjuntor motor - 891848			S5	Válvula de ar na canaleta de descarga							
	C3	Contator para a bomba de vácuo - 47925			S6	Válvula de vácuo na canaleta de descarga							
	M1	Bomba de vácuo de 1,5 CV			S11	Válvula de água para bomba de vácuo							
	BT1	Botão para a porta de carga - 890827			P3	Pressostato de segurança							
B	BT2	Botão para a porta de descarga - 890827			T1	Borne terra			B				
	RL1	Relé porta de carga - 34156			BR1	Barra de aterramento							
	RL2	Relé porta de descarga - 34156			M3	COMPRESSOR DE AR							
	MS1	Micro porta de carga			P4	PRESSOSTATO DO COMPRESSOR DE AR							
	MS2	Micro porta de descarga			CV1	Conversor PT-100 para 4 a 20mA - 890083							
	P1	Pressostato de 121°C			VL1	Ventilador comando							
A	P2	Pressostato de 134°C							A				
	F1 a F9	Fusíveis de proteção (0,5A) - 87756											
	AL1	Campainha para alarme - 88027											
	TCI	Sensor PT-100 de controle											
	8	7	6	5	4	3	2	1					
		DENOMINAÇÃO: Componentes					CÓDIGO: ee893875						
		DES: PAULO		Substitui: ee893875		Sub: A				FOLHA: 7/10			
		CONF: RIBEIRO		SUB LETRA	A	B							
		APROV: KOSEKI											

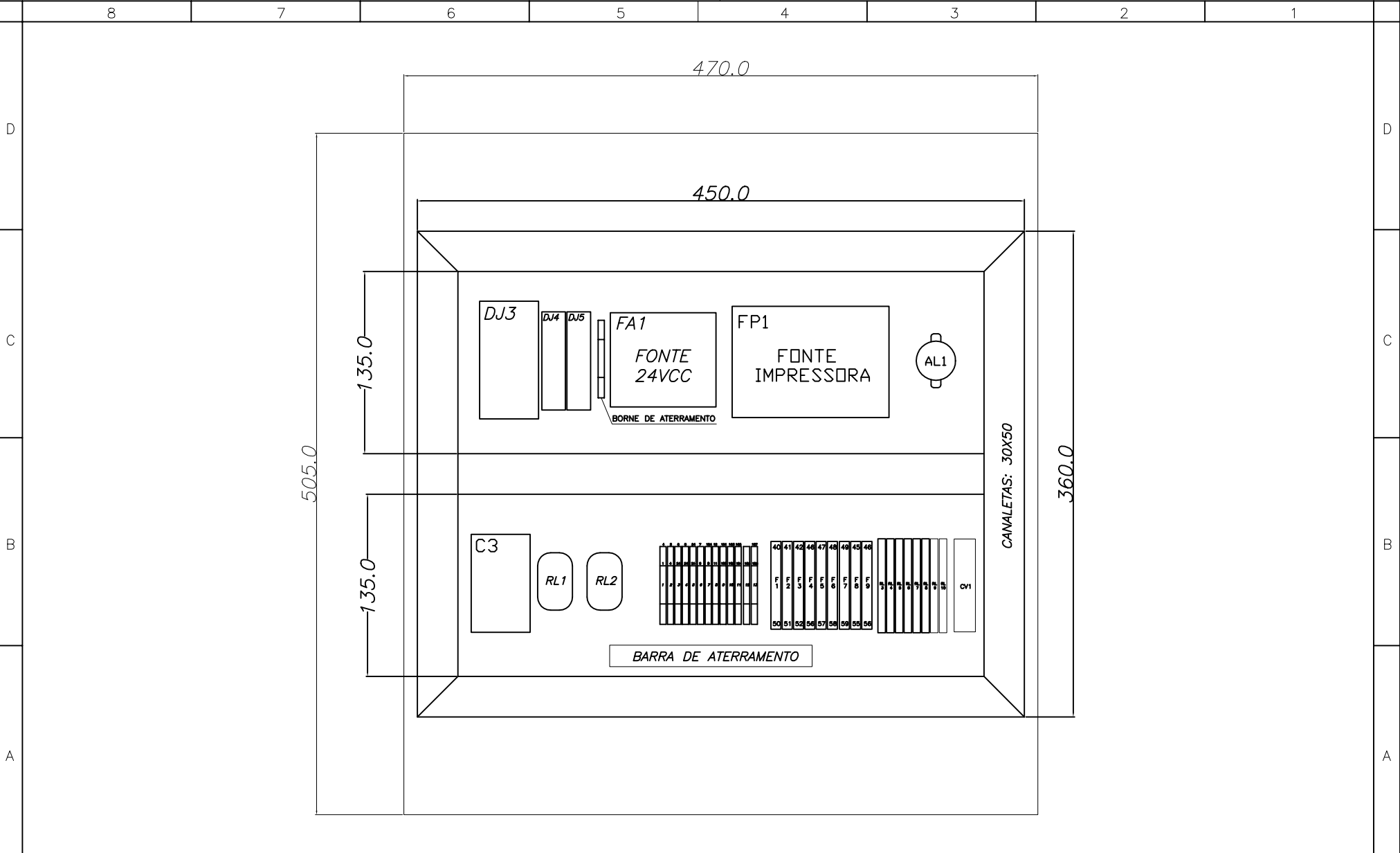

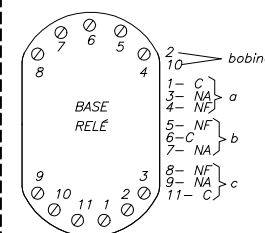
	8	7	6	5	4	3	2	1																																																																																																																
D	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>-xx NÚMERO DE ANILHA DO FIO</p> <p>Øxx NÚMERO DE BORNE SIMPLES</p> <p>Øxx/x NÚMERO DE BORNE DUPLO</p> <p style="margin-left: 20px;">1-Borne externo 2-Borne interno</p> <p>xx COR E BITOLA DO FIO</p> <p>BR - Cabo branco</p> <p>VM - Cabo vermelho</p> <p>AZ - Cabo azul</p> <p>PR - Cabo preto</p> <p>REFERÊNCIA CRUZADA</p> <p>2A3</p> <p style="margin-left: 20px;">↑ Número da coluna ↑ Número da linha ↑ Número da página</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;">  <p>BASE RL1 E RL2</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> 1234 </div> <p>FORNE 5VCC IMPRESSORA AMCP (MOD. NOVO)</p> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 10px; margin: 0 auto; text-align: center; font-size: 8px;">220VCA</div> </div> <p>LAYOUT DE LIGAÇÃO DA FORNE DA IMPRESSORA</p> </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>OBS.: A LIGAÇÃO DOS TERRAS DEVEM SER FEITAS EM UMA BARRA DE COBRE PARAFUSADA NO CHASSI DO COMANDO.</p> </div> </div> </div>								D																																																																																																															
C									C																																																																																																															
B									B																																																																																																															
A	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">4</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">4</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">7</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">58</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">12</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">101</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">103</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">105</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">184</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">187</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">102</td> <td style="text-align: center;">104</td> <td style="text-align: center;">106</td> <td style="text-align: center;">186</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="text-align: center;"> <p>CH1 ALIMENTAÇÃO PRINTER CONTROLADOR</p> <p>BTS1 24V / 220V RELES DE CONTROLE DE PORTA</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">40</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">41</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">42</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">43</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">44</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">45</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">46</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">47</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">48</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">F 1</td> <td style="text-align: center;">F 2</td> <td style="text-align: center;">F 3</td> <td style="text-align: center;">F 4</td> <td style="text-align: center;">F 5</td> <td style="text-align: center;">F 6</td> <td style="text-align: center;">F 7</td> <td style="text-align: center;">F 8</td> <td style="text-align: center;">F 9</td> <td></td> <td style="text-align: center;">RL 3</td> <td style="text-align: center;">RL 4</td> <td style="text-align: center;">RL 5</td> <td style="text-align: center;">RL 6</td> <td style="text-align: center;">RL 7</td> <td style="text-align: center;">RL 8</td> <td style="text-align: center;">RL 9</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">51</td> <td style="text-align: center;">52</td> <td style="text-align: center;">53</td> <td style="text-align: center;">54</td> <td style="text-align: center;">55</td> <td style="text-align: center;">56</td> <td style="text-align: center;">57</td> <td style="text-align: center;">58</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div>									4	4	2	2	0	7	58	12	101	103	105	184	187			1	4	2	2	24	6	8	11	100	102	104	106	186			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																	40	41	42	43	44	45	46	47	48									F 1	F 2	F 3	F 4	F 5	F 6	F 7	F 8	F 9		RL 3	RL 4	RL 5	RL 6	RL 7	RL 8	RL 9	50	51	52	53	54	55	56	57	58									A
	4	4	2	2	0	7	58	12	101	103	105	184	187																																																																																																											
	1	4	2	2	24	6	8	11	100	102	104	106	186																																																																																																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																																																																																																											
40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																
F 1	F 2	F 3	F 4	F 5	F 6	F 7	F 8	F 9		RL 3	RL 4	RL 5	RL 6	RL 7	RL 8	RL 9																																																																																																								
50	51	52	53	54	55	56	57	58																																																																																																																

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

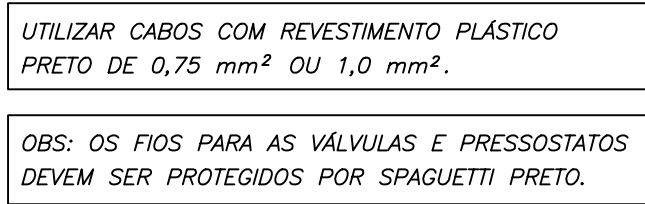

EQUIPAMENTO: ESTERILIZADOR HI SPEED B-200/300/500-N
COMANDO GERADOR 24 kW

	DATA:		DESENHO ELÉTRICO						NÚMERO DE PÁGINAS: 4		CÓDIGO: ee894371
	DES:	Paulo	Substitui:			Sub:			FOLHA: CAPA		
	CONF:	Ribeiro	SUB LETRA								
	APROV:	Koseki									

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:



220 VCA	380 VCA
31,5 [A]	18,3 [A]

TABELA 1 - REFERÊNCIA

C1 e C2	CONTADORES DAS RESISTENCIAS - 47925
DJ1 e DJ2	DISJUNTORES TRIFÁSICOS - 86395
BA1	BOMBA DE ÁGUA
CN1	CONTROLE NÍVEL ALTO BÓIA
CN2	CONTROLE NÍVEL BAIXO BÓIA
S10	VÁLVULA DE ÁGUA PARA O GERADOR



BAUMER

DENOMINAÇÃO: Circuito gerador 24kW B-200/300/500-N

DES:	Paulo
------	-------

Substitui:

Sub:

FOLHA:

CONF: Ribeiro


SUB
LETRA

APROV: Koseki

$$1/4$$

CÓDIGO:

ee894371

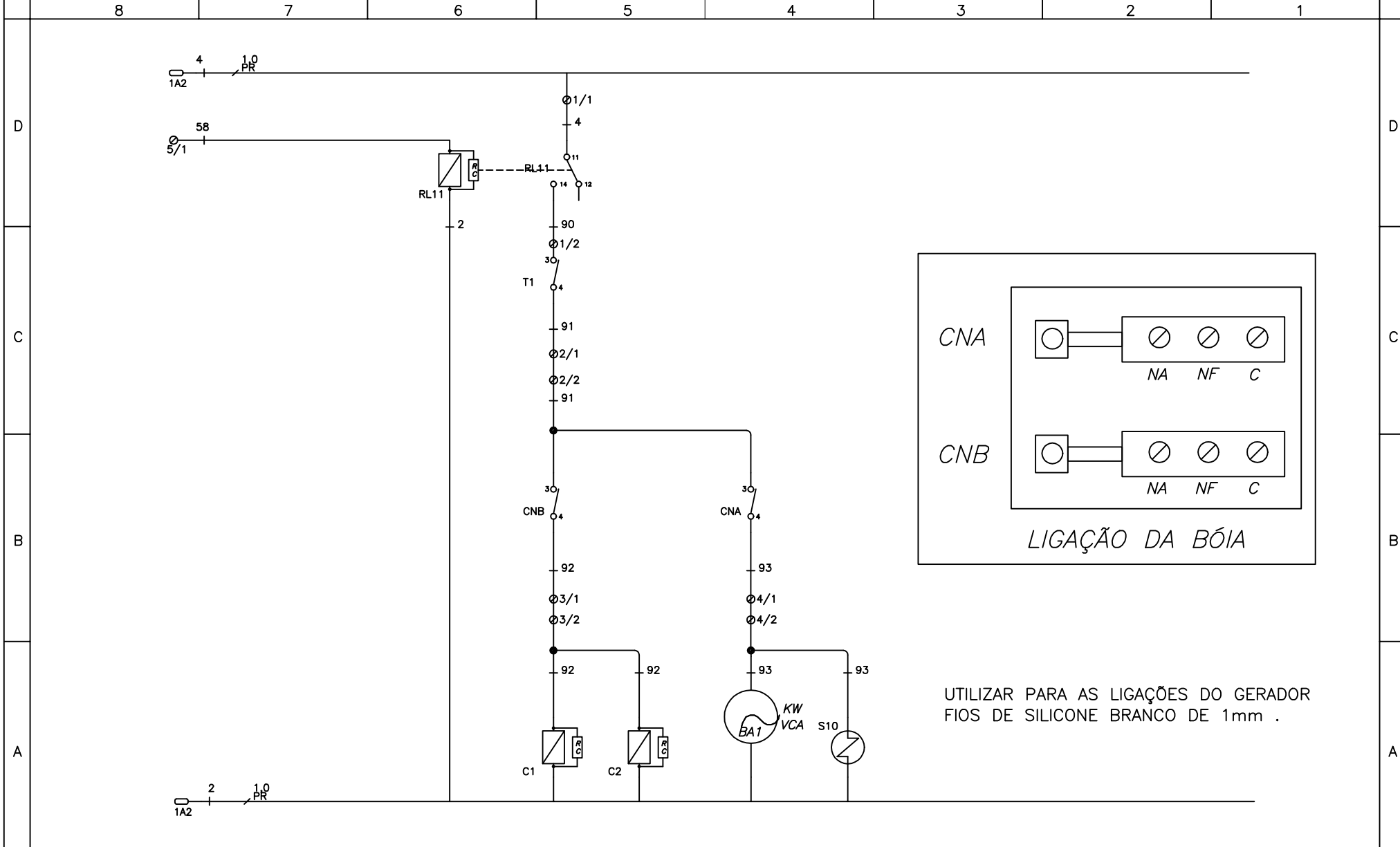

UTILIZAR PARA AS LIGAÇÕES DO GERADOR
FIOS DE SILICONE BRANCO DE 1mm .



DENOMINAÇÃO: Controle gerador 24kW B-200/300/500-N

DES: Paulo

CONF: Ribeiro

APROV: Koseki

Substitui:

SUB
LETRA

Sub:

FOLHA:


2/4

CÓDIGO:

ee894371

SUB-A:
SUB-B:
SUB-C:

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

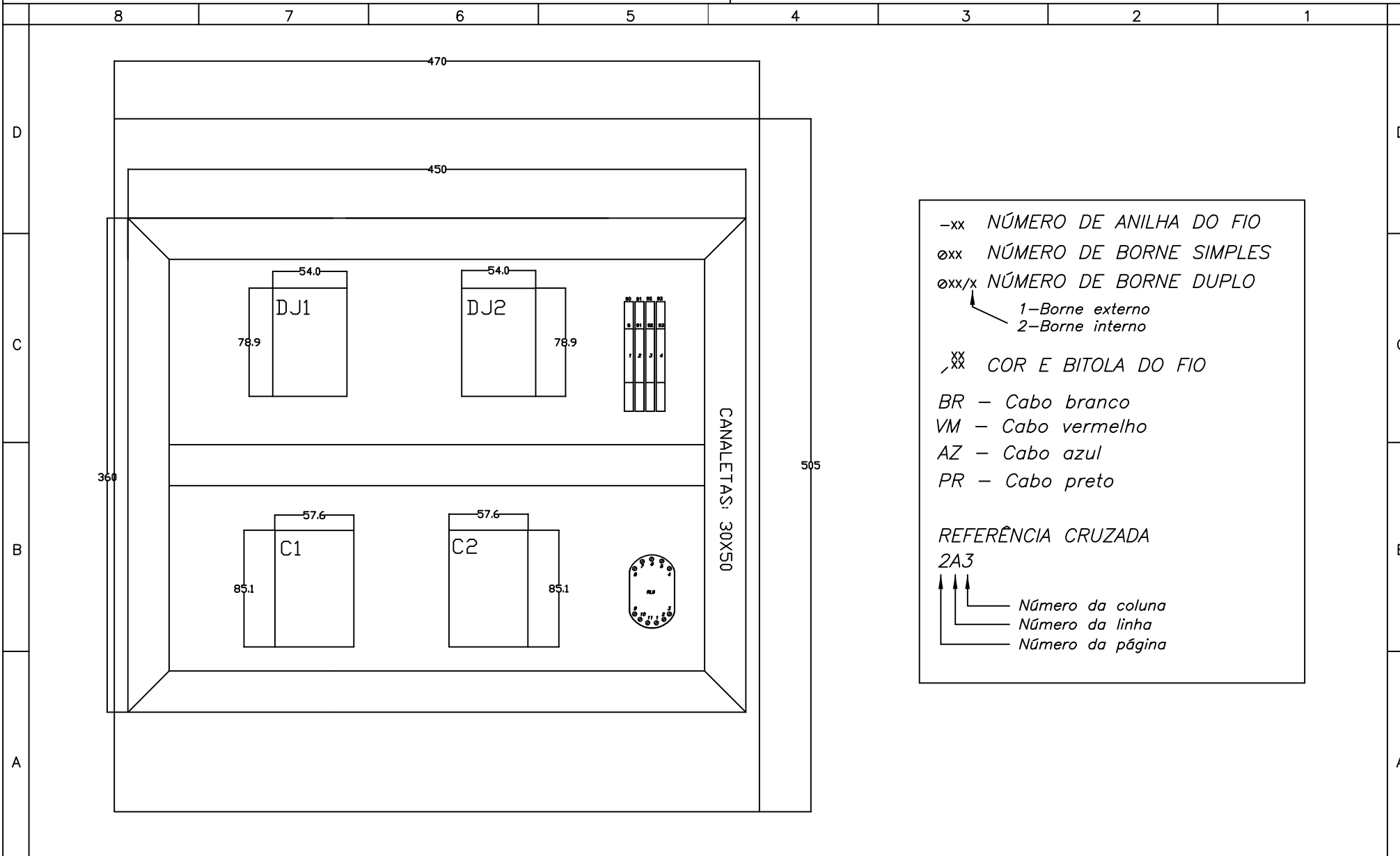

DENOMINAÇÃO: Layout gerador 24kW B200/300/500-N

DES: Paulo

Substitui:

Sub:

FOLHA:

CONF: Ribeiro


SUB
LETRA

APROV: Koseki

3/4

CÓDIGO:

ee894371

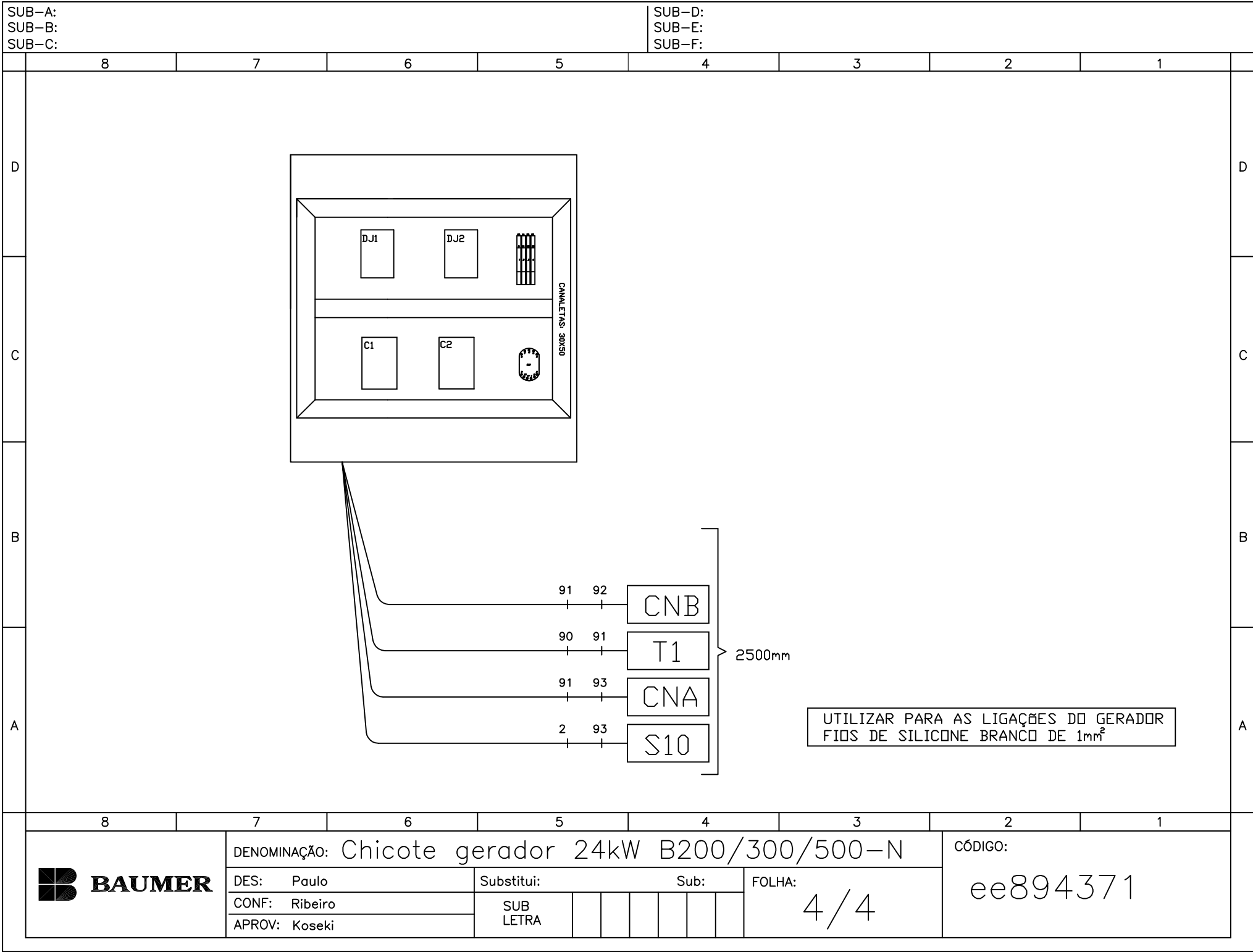

EQUIPAMENTO: ESTERILIZADOR HI SPEED B-200/300/500-N
COMANDO GERADOR 36kW



DATA:

DES: Paulo

CONF: Ribeiro

APROV: Koseki

DESENHO ELÉTRICO

Substitui:

Sub:

SUB
LETRA

NÚMERO DE PÁGINAS: 4

FOLHA:

CAPA

CÓDIGO:

ee894372

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:



220 VCA	380 VCA
47,4 [A]	27,4 [A]

TABELA 1 - REFERÊNCIA

C1 e C2	CONTADORES DAS RESISTENCIAS – 47926
DJ1 e DJ2	DISJUNTORES TRIFÁSICOS – 88456
BA1	BOMBA DE ÁGUA
CN1	CONTROLE NÍVEL ALTO BÓIA
CN2	CONTROLE NÍVEL BAIXO BÓIA
S10	VÁLVULA DE ÁGUA PARA O GERADOR




FOLHA:

SUB
LETRA
$$1/4$$

ee894372

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

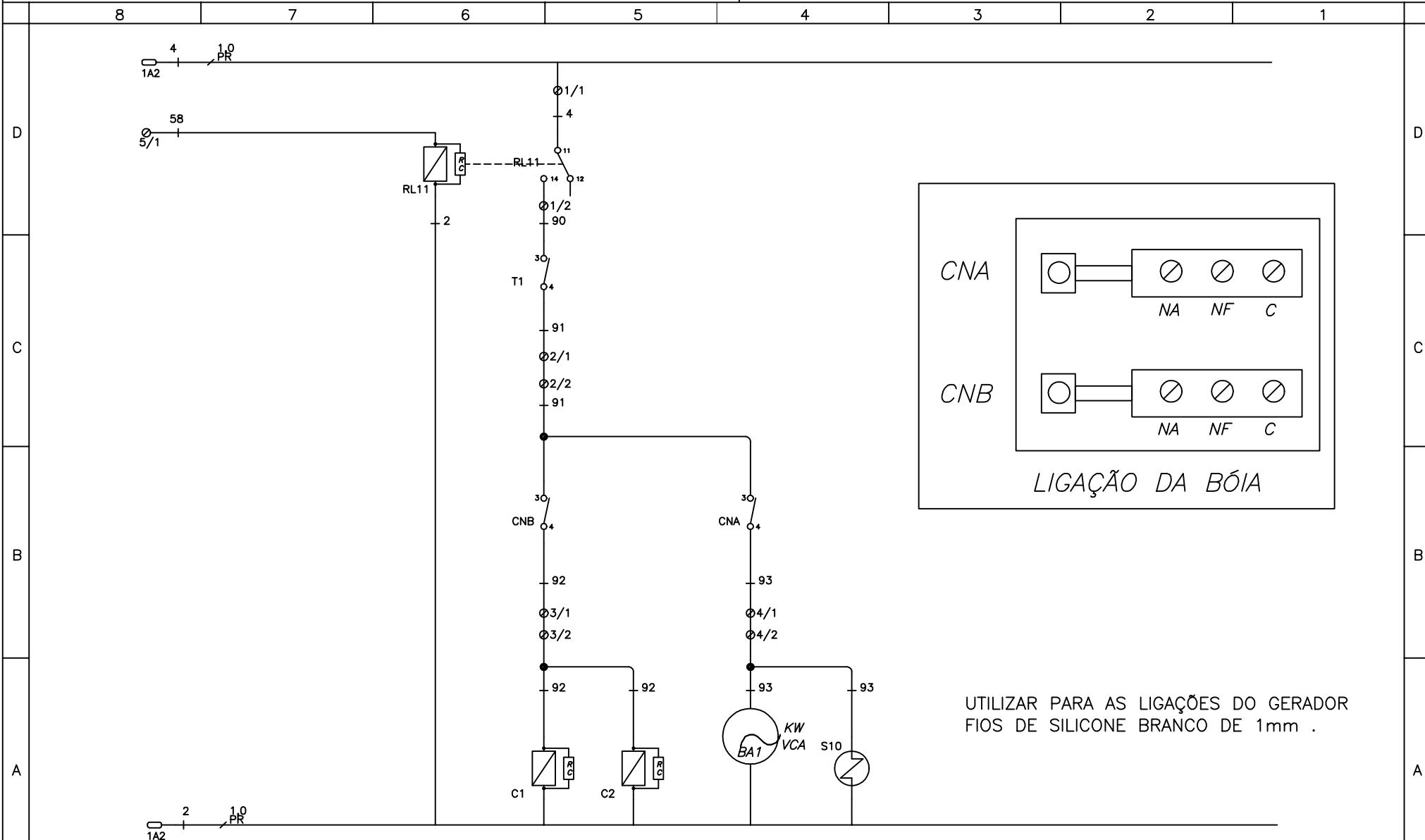

CÓDIGO:

FOLHA:


SUB
LETRA

2/4

ee894372

SUB-A:
SUB-B:
SUB-C:

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

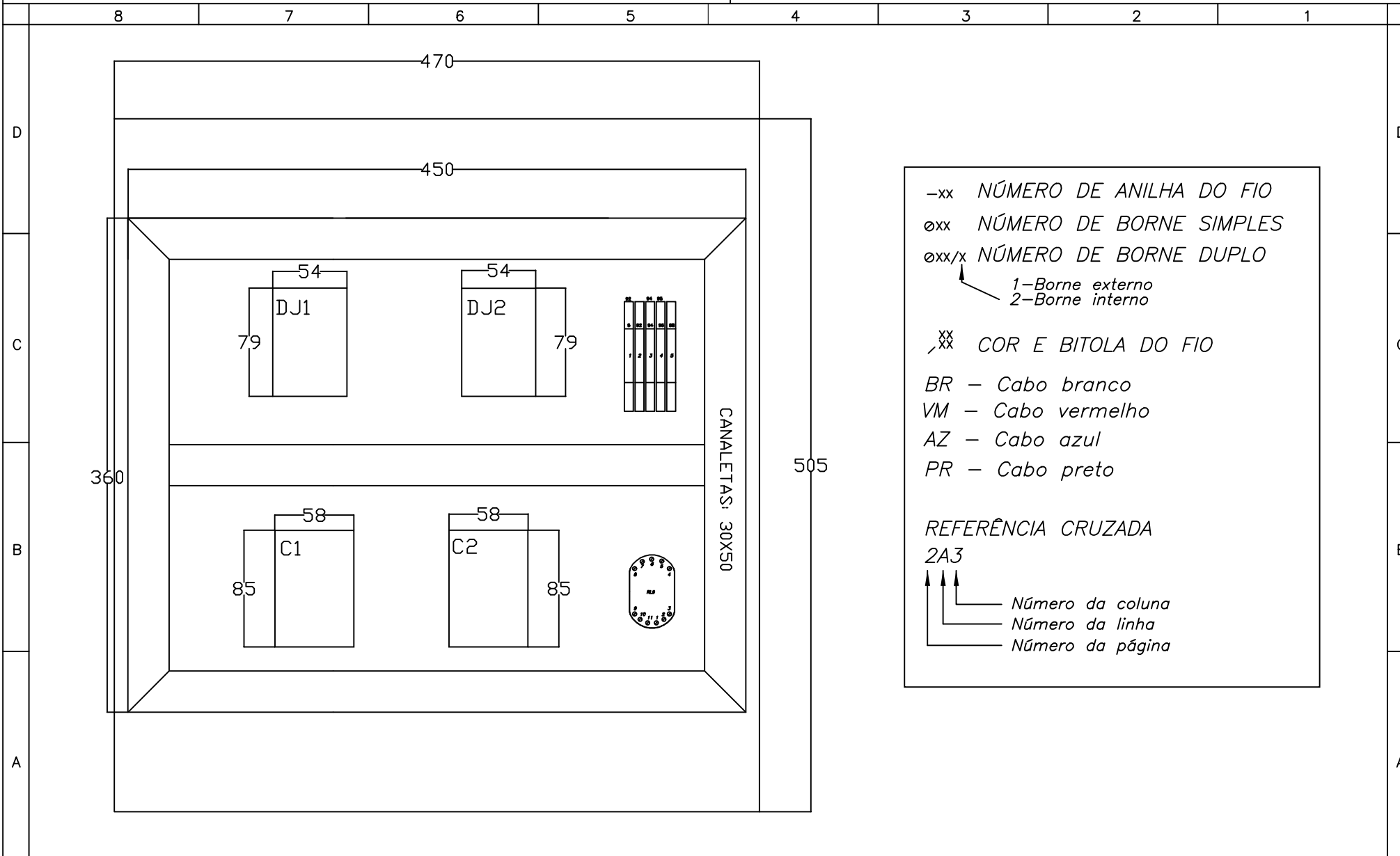

DENOMINAÇÃO: Layout gerador 36kW B200/300/500-N

DES: Paulo

Substitui:

Sub:

FOLHA:

CONF: Ribeiro


SUB
LETRA

APROV: Koseki

3/4

CÓDIGO:

ee894372

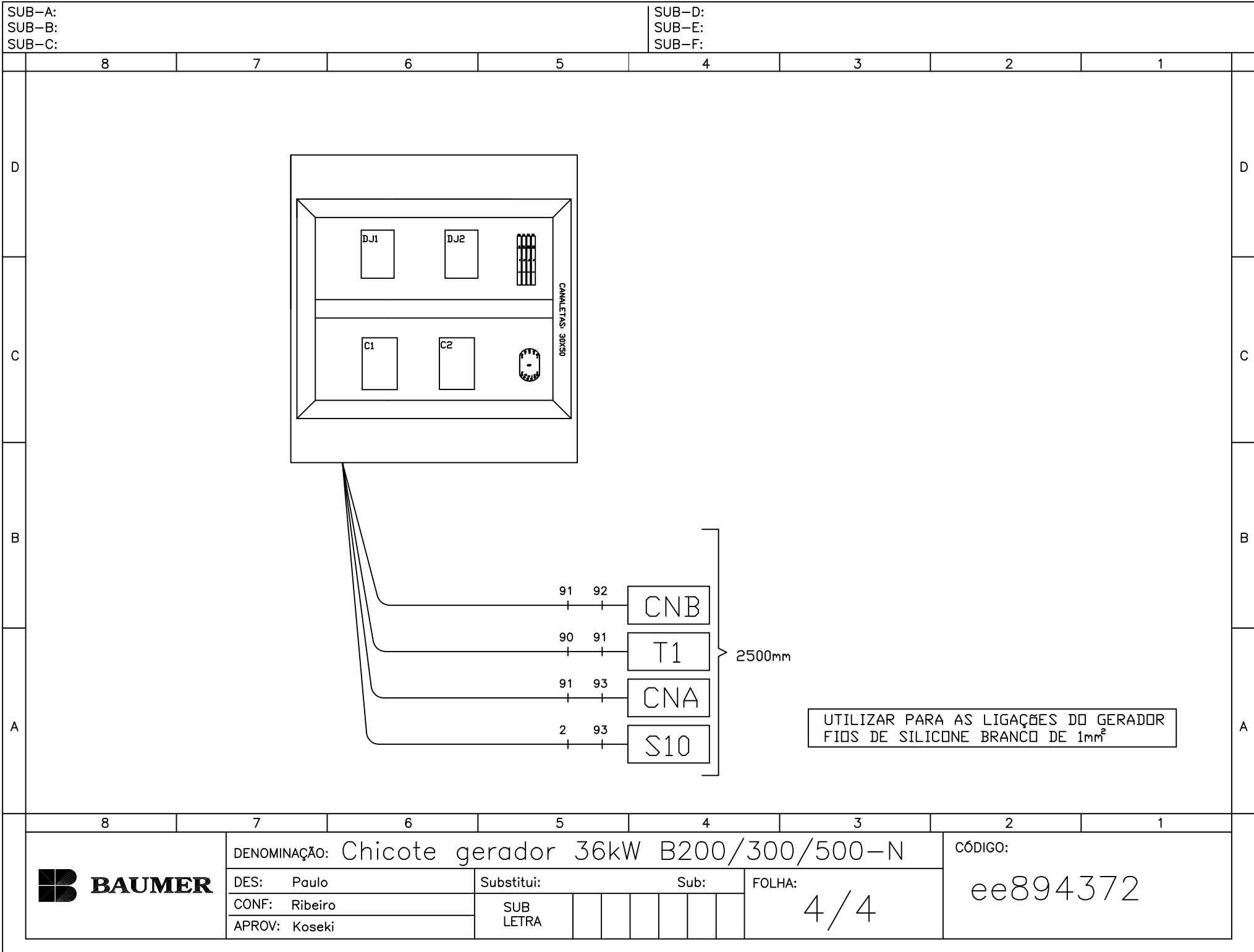

DENOMINAÇÃO: Chicote gerador 36kW B200/300/500-N

DES: Paulo

Substitui:

Sub:

FOLHA:

CONF: Ribeiro


SUB
LETRA

4/4


CÓDIGO:

ee894372

EQUIPAMENTO: ESTERILIZADOR HI SPEED B-200/300/500-N
COMANDO GERADOR 52kW


	DATA:		DESENHO ELÉTRICO					NÚMERO DE PÁGINAS: 4		CÓDIGO: ee894373
	DES:	Paulo	Substitui:			Sub:			FOLHA: CAPA	
	CONF:	Ribeiro	SUB LETRA							
	APROV:	Koseki								

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

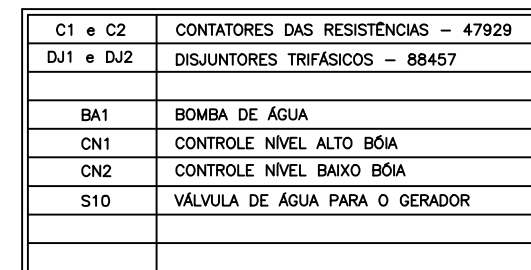


ee894373

APROV: Koseki

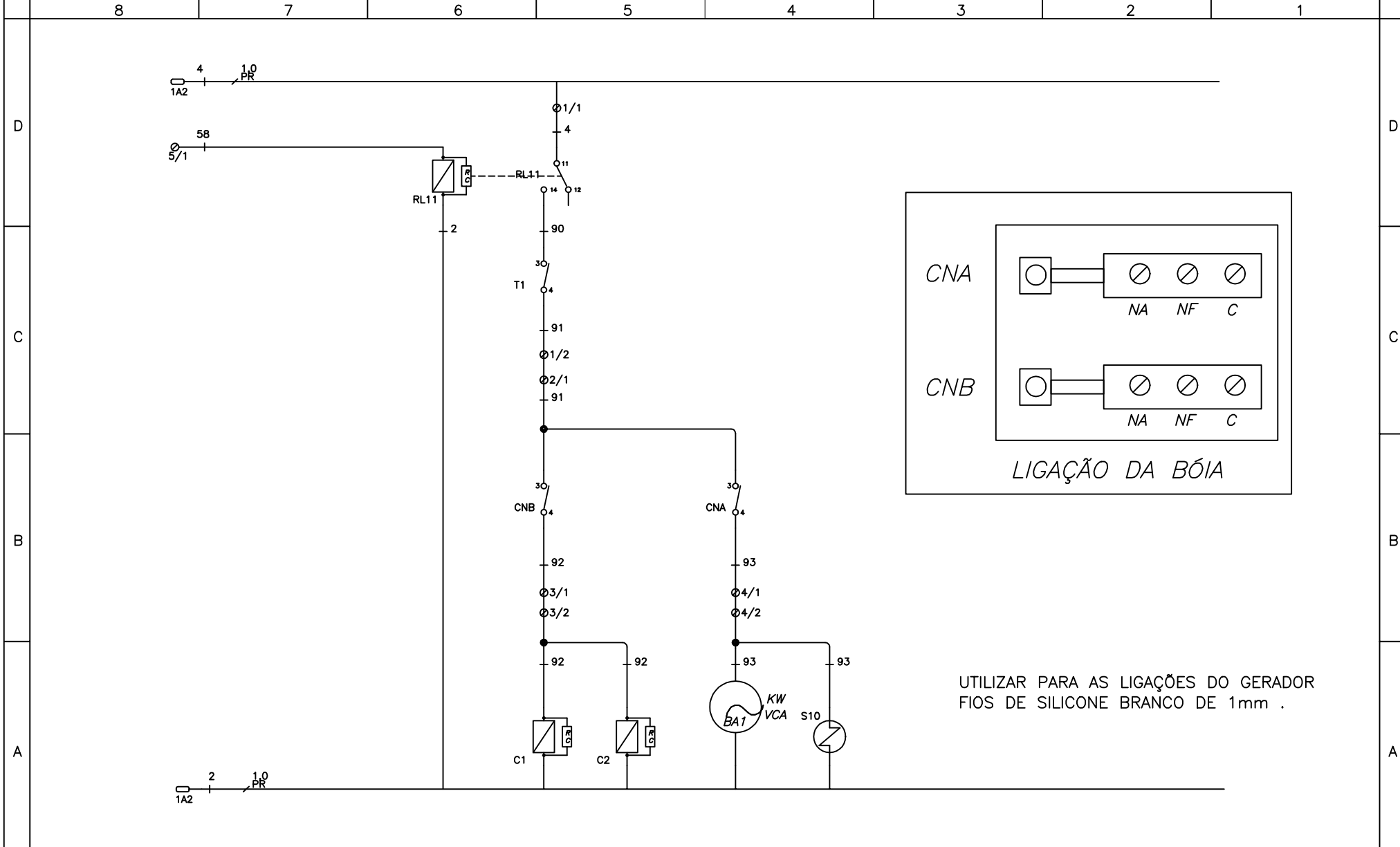

SUB-A:
SUB-B:
SUB-C:

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

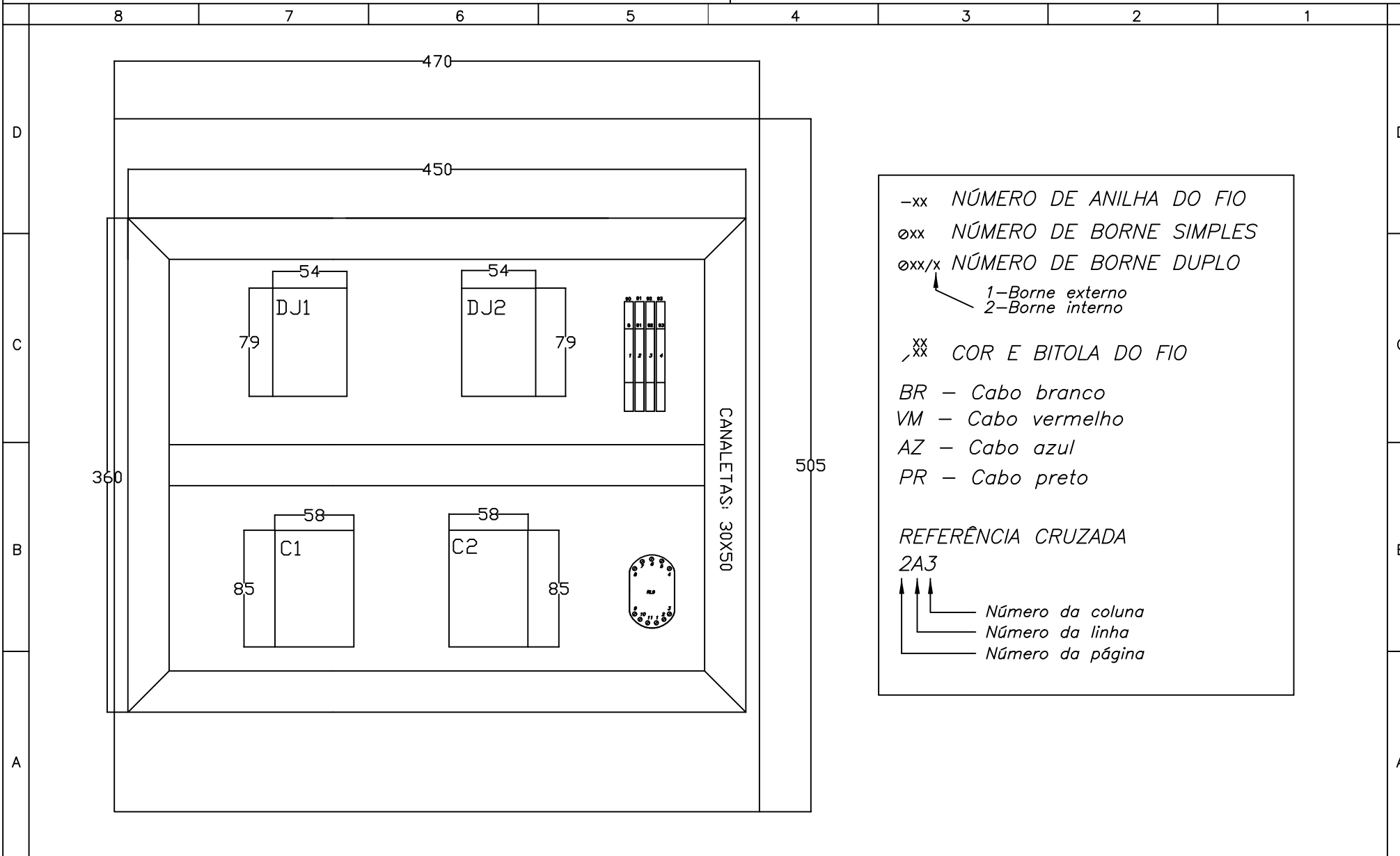

DENOMINAÇÃO: Layout gerador 52kW B200/300/500-N

DES: Paulo

Substitui:

Sub:

FOLHA:

CONF: Ribeiro


SUB
LETRA

APROV: Koseki


3/4

CÓDIGO:

ee894373

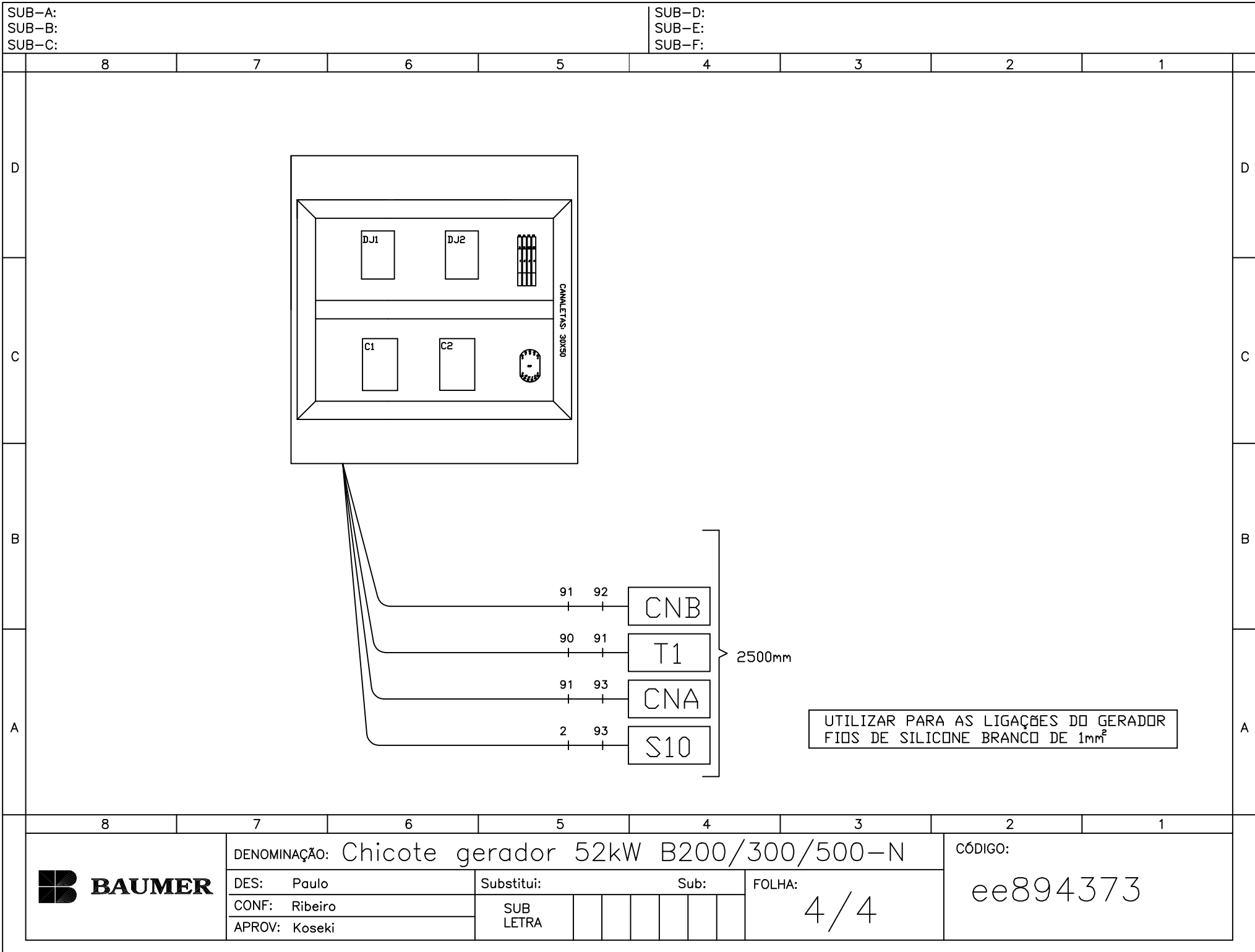

N. H1-100

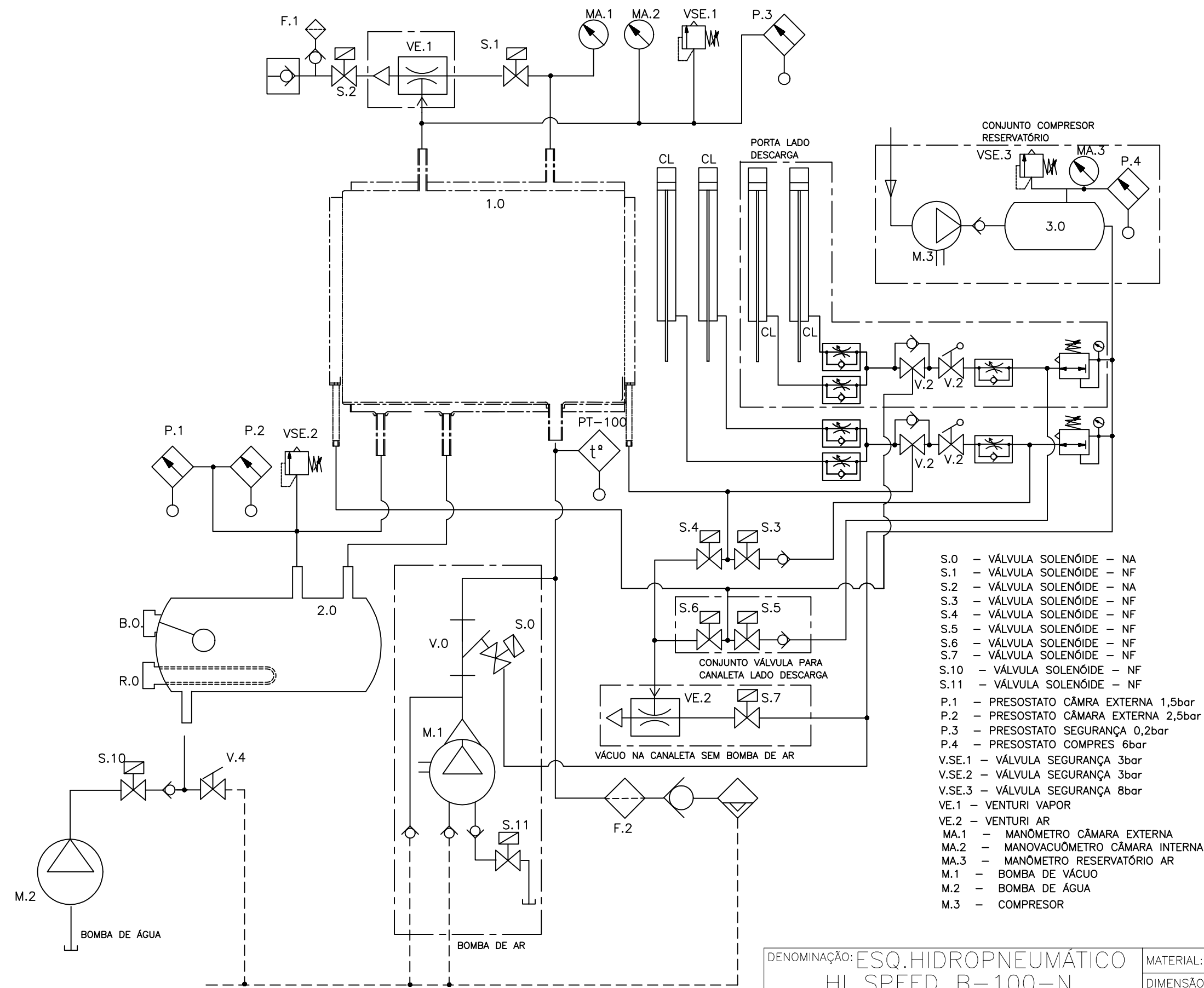

- LINHA DE AR SEM PRESSÃO
— LINHA DE AR PRESSURIZADA
— LINHA DE VAPOR
— LINHA DE CONDENSADO
— LINHA DE ÁGUA
- - - LINEA DE DRENAGEM

- S.0 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NA
S.1 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
S.2 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NA
S.3 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
S.4 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
S.5 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
S.6 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
S.7 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
S.10 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
S.11 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
P.1 - PRESOSTATO CÂMARA EXTERNA 1,5bar
P.2 - PRESOSTATO CÂMARA EXTERNA 2,5bar
P.3 - PRESOSTATO SEGURANÇA 0,2bar
P.4 - PRESOSTATO COMPRES 6bar
V.SE.1 - VÁLVULA SEGURANÇA 3bar
V.SE.2 - VÁLVULA SEGURANÇA 3bar
V.SE.3 - VÁLVULA SEGURANÇA 8bar
VE.1 - VENTURI VAPOR
VE.2 - VENTURI AR
MA.1 - MANÔMETRO CÂMARA EXTERNA
MA.2 - MANOVACUÔMETRO CÂMARA INTERNA
MA.3 - MANÔMETRO RESERVATÓRIO AR
M.1 - BOMBA DE VÁCUO
M.2 - BOMBA DE ÁGUA
M.3 - COMPRESOR
R.0 - RESISTÊNCIA
B.0 - BÓIA DE NÍVEL
PT-100 - SENSOR TEMPERATURA
CL - CILINDRO PNEUMÁTICO
V.2 - VÁLVULA PNEUMÁTICA SELETORA
V.0 - VÁLVULA PNEUMÁTICA NF
V.4 - VÁLVULA ESFERA
◊ - VÁLVULA RETENÇÃO
◊ - F.1 - FILTRO AR
◊ - F.2 - FILTRO VAPOR
◊ - PURGADOR
◊ - REGULADOR DE FLUXO
◊ - REGULADOR DE PRESSÃO
1.0 - ESTERILIZADOR
2.0 - GERADOR DE VAPOR
3.0 - RESERVATÓRIO DE AR

DENOMINAÇÃO: ESQ.HIDROPNEUMÁTICO HI SPEED B-100-N		MATERIAL:		N:	
ACABAMENTO:		DIMENSÃO:			
OBS:		TRATAMENTO:		PESO:	
USADO EM:		SUBSTITUI:		SUB	
DES:RILDO		ESCALA:		SUB LETRA	
CONF:				CÓDIGO	
APROV:				H1-100	

GRAU DE PRECISÃO = PROCEDIMENTO DTBH-008		SUPERFÍCIES	
MÉDIO (m)	USINAGEM	~ limpo em bruto	
GROSSO (g)	FURADEIRA/CORTE/ESTAMPARIA/VIRADEIRA	▽ desbastado	
MUITO GROSSO (mg)	CALDEIRARIA / SOLDA	▽ alisado	
		▽ polido	



— LINHA AR SEM PRESSÃO
— LINHA DE AR PRESSURIZADA
— LINHA DE VAPOR
— LINHA DE CONDENSADO
— LINHA DE ÁGUA
- - - LINHA DE DRENAGEM

R.0 - RESISTÊNCIA
B.0 - BÓIA DE NÍVEL
PT-100 - SENSOR TEMPERATURA
CL - CILINDRO PNEUMÁTICO
V.0 - VÁLVULA PNEUMÁTICA NA
V.1 - VÁLVULA PNEUMÁTICA NF
V.2 - VÁLVULA PNEUMÁTICA SELETORA
V.3 - VÁLVULA PNEUMÁTICA PILOTADA
V.4 - VÁLVULA ESFERA
— VÁLVULA RETENÇÃO
— F.1 - FILTRO AR
— F.2 - FILTRO VAPOR
— PURGADOR
— REGULADOR DE FLUXO
— REGULADOR DE PRESSÃO
1.0 - ESTERILIZADOR
2.0 - GERADOR DE VAPOR
3.0 - RESERVATÓRIO DE AR


S.0 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
S.1 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
S.2 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NA
S.3 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
S.4 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
S.5 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
S.6 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
S.10 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
S.11 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
P.1 - PRESSOSTATO CÂMARA EXTERNA. 1,5bar
P.2 - PRESSOSTATO CÂMARA EXTERNA 2,5bar
P.3 - PRESSOSTATO SEGURANÇA 0,2
P.4 - PRESSOSTATO COMPRES 6bar
V.SE.1 - VÁLVULA SEGURANÇA 3bar
V.SE.2 - VÁLVULA SEGURANÇA 3bar
V.SE.3 - VÁLVULA SEGURANÇA 8bar
MA.1 - MANÔMETRO CÂMARA EXTERNA
MA.2 - MANOVACUÔMETRO CÂMARA INTERNA.
MA.3 - MANÔMETRO RESERVATÓRIO AR
M.1 - BOMBA DE VÁCUO
M.2 - BOMBA D'ÁGUA
M.3 - COMPRESSOR


SUBSTITUI: SUB
SUB LETRA
CÓDIGO
H1-200

DENOMINAÇÃO: ESQ. HIDROPNEUMÁTICO		MATERIAL:		N:	
HI SPEED B-200/300/500-N		DIMENSÃO:			
ACABAMENTO:		TRATAMENTO:		PESO:	
OBS:					
USADO EM:					
		DES:RILDO	01/09/2006	ESCALA:	
		CONF:			
		APROV:			

GRAU DE PRECISÃO = PROCEDIMENTO DTBH-008	
MÉDIO (m)	USINAGEM
GROSSO (g)	FURADEIRA/CORTE/ESTAMPARIA/VIRADEIRA
MUITO GROSSO (mg)	CALDEIRARIA / SOLDA

SUPERFÍCIES	
~	limpo em bruto
▽	desbastado
▽▽	alisado
▽▽▽	polido

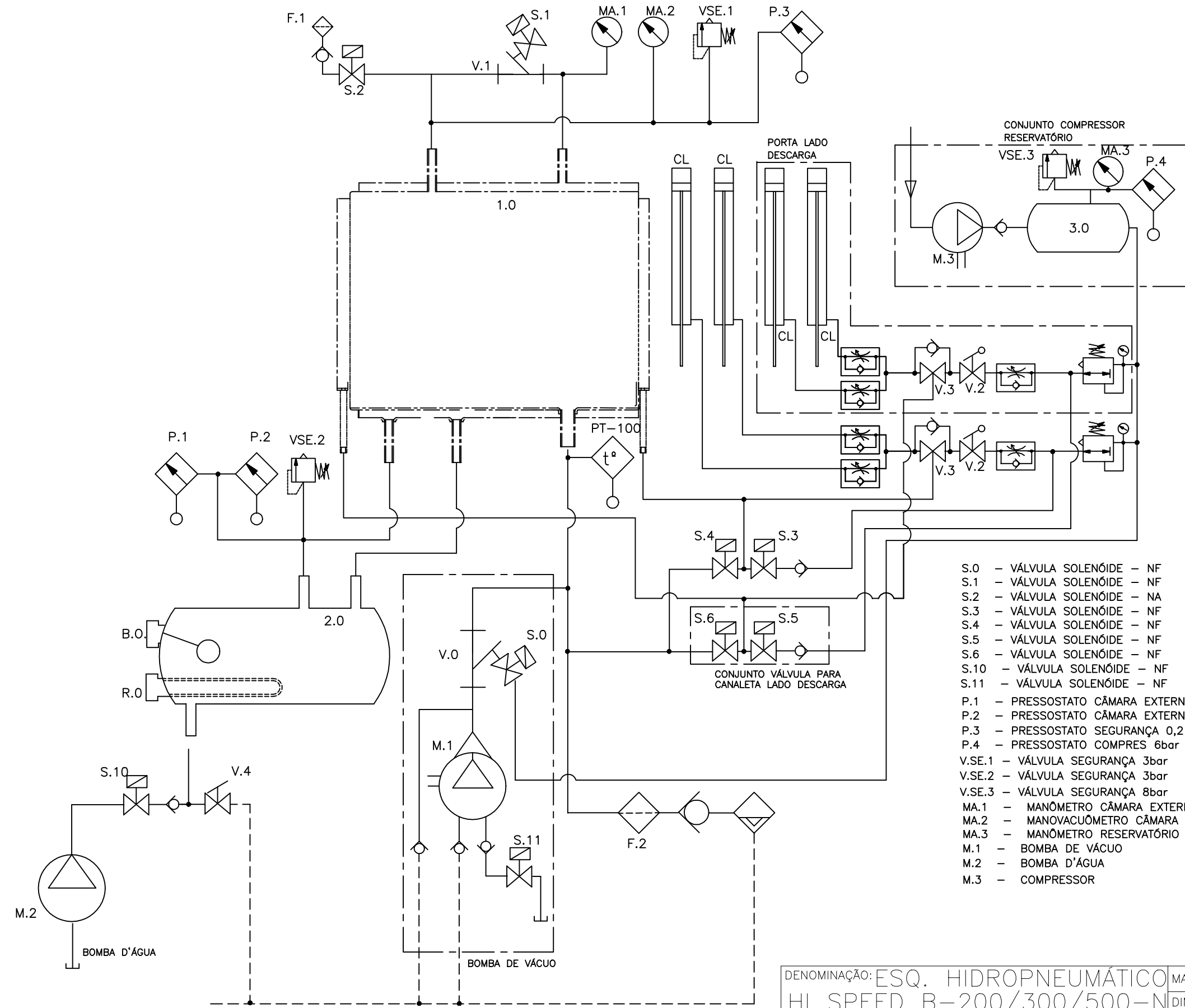

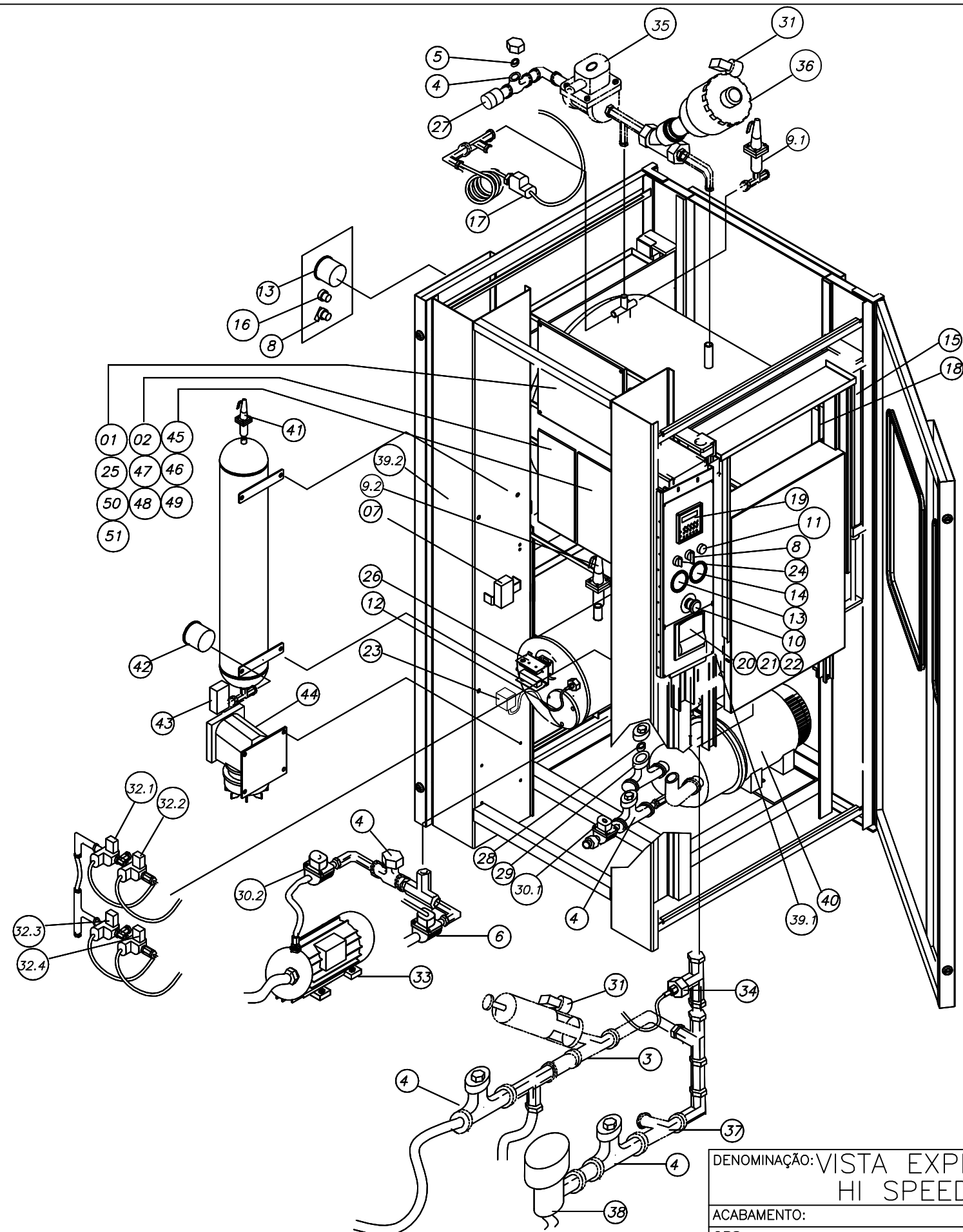

DENOMINAÇÃO: VISTA EXPLODIDA HI SPEED N		MATERIAL:		N:	
ACABAMENTO:		DIMENSÃO:			
OBS:		TRATAMENTO:		PESO:	
USADO EM:		SUBSTITUI:		SUB	
DES: RILDO		CONF:		APROV:	
ESCALA:		SUB LETRA		CÓDIGO	
		V1-200			

GRAU DE PRECISÃO = PROCEDIMENTO DTBH-008		SUPERFÍCIES	
MÉDIO (m)	USINAGEM	~	limpo em bruto
GROSSO (g)	FURADEIRA/CORTE/ESTAMPARIA/VIRADEIRA	▽	desbastado
MUITO GROSSO (mg)	CALDEIRARIA / SOLDA	▽▽	alisado
		▽▽▽	polido



EQUIPAMENTO: ESTERILIZADOR HI SPEED B-100-NL

ENTRADAS DIGITAIS

X1-9 - Relé porta de carga (RL1)
X1-8 - Relé porta de descarga (RL2)
X1-7 - Micro porta de carga (MS1)
X1-6 - Micro porta de descarga (MS2)
X1-5 - Pressostato de início de ciclo
X1-4 - Relé Térmico Bomba de Vácuo (RT1)
X1-3 - Pressostato de segurança

Entradas Analógicas

X5-4 - Sensor PT-100 de controle (TCI)

SAÍDAS DIGITAIS

X1-1 - Válvula de vácuo C.I. (S0)
X2-8 - Bomba de vácuo (C3)
X2-7 - Válvula de vapor na C.I. (S1)
X2-6 - Válvula de ar na C.I. (S2)
X2-5 - Alarme (AL1)
X2-4 - Controle da porta (RL7)
X2-2 - Válvula de vapor na C.E. (S7)



DATA:

DES: PAULO

CONF: RIBEIRO

APROV: KOSEKI

DESENHO ELÉTRICO

Substitui: ee894759

Sub: A

SUB
LETRA

A

B

NÚMERO DE PÁGINAS: 11

FOLHA:


CAPA

CÓDIGO:

ee894759

SUB-A: ADAPTACAO AO CLP ZAP-900
 SUB-B: INCLUSAO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA
 SUB-C:

SUB-D:
 SUB-E:
 SUB-F:

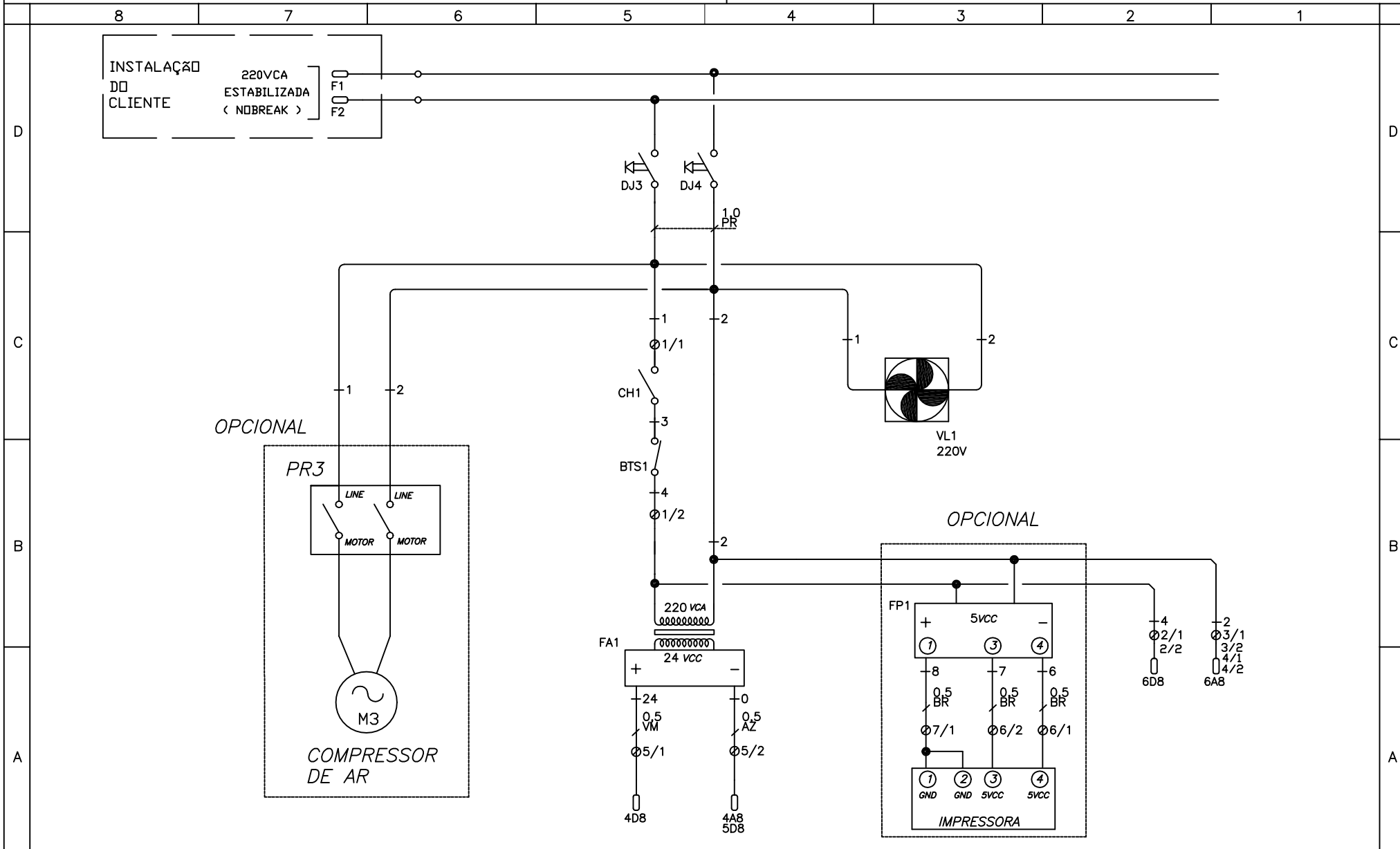

DENOMINAÇÃO: Circuito das fontes

DES: PAULO

CONF: RIBEIRO

APROV: KOSEKI

Substitui: ee894759

SUB
LETRA

A

B

Sub: A

FOLHA:

1/11

CÓDIGO:

ee894759

SUB-A: ADAPTACAO AO CLP ZAP-900
SUB-B: INCLUSAO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA
SUB-C:

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

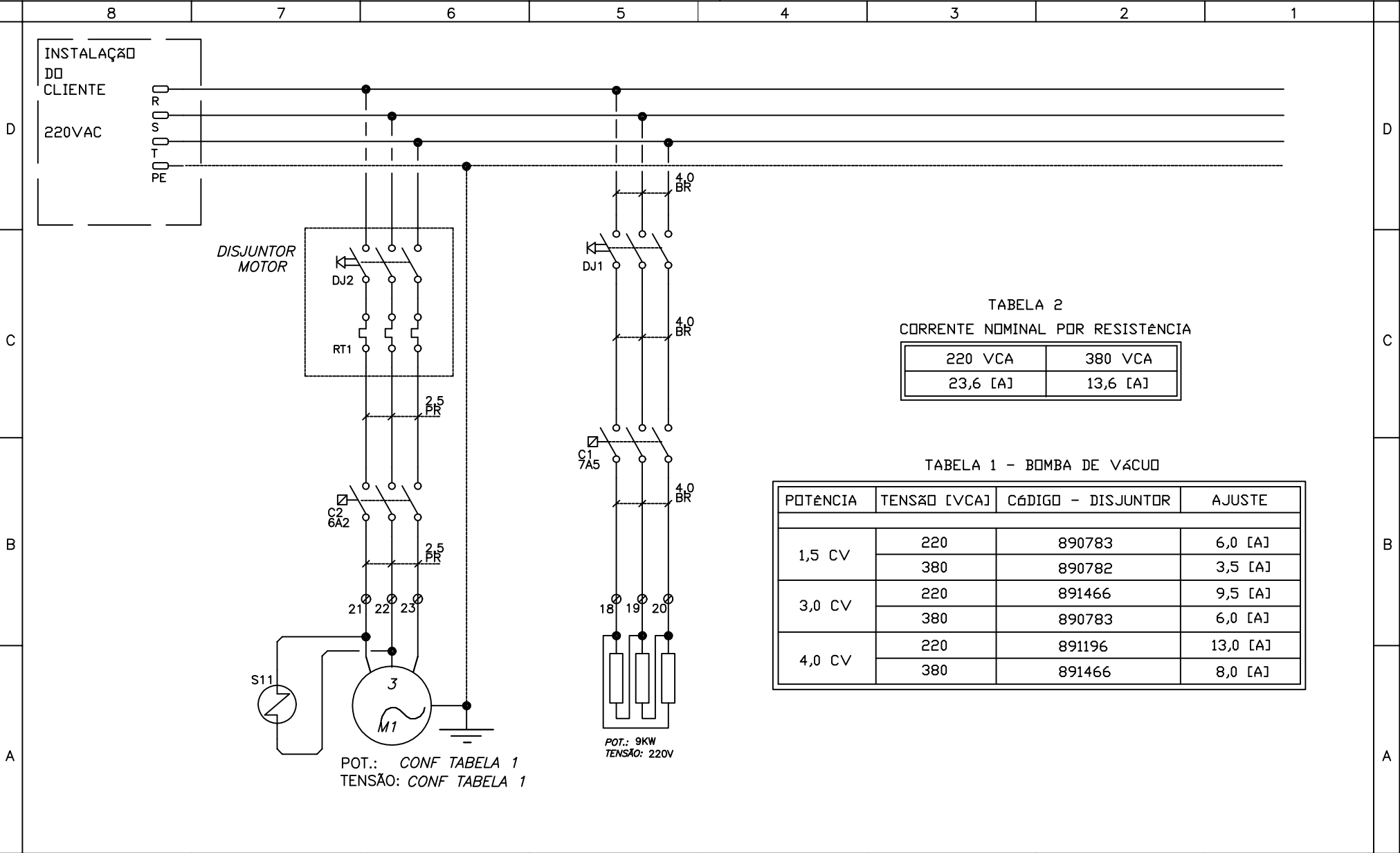


TABELA 2
CORRENTE NOMINAL POR RESISTÊNCIA

220 VCA	380 VCA
23,6 [A]	13,6 [A]

TABELA 1 - BOMBA DE VÁCUO

POTÊNCIA	TENSÃO [VCA]	CÓDIGO - DISJUNTOR	AJUSTE
1,5 CV	220	890783	6,0 [A]
	380	890782	3,5 [A]
3,0 CV	220	891466	9,5 [A]
	380	890783	6,0 [A]
4,0 CV	220	891196	13,0 [A]
	380	891466	8,0 [A]



DENOMINAÇÃO: Circuito potência 220V

DES: PAULO

CONF: RIBEIRO

APROV: KOSEKI

Substitui: ee894759

Sub: A

FOLHA:


2/11

CÓDIGO:

ee894759

SUB-A: ADAPTAÇÃO AO CLP ZAP-900
SUB-B: INCLUSÃO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA
SUB-C:

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

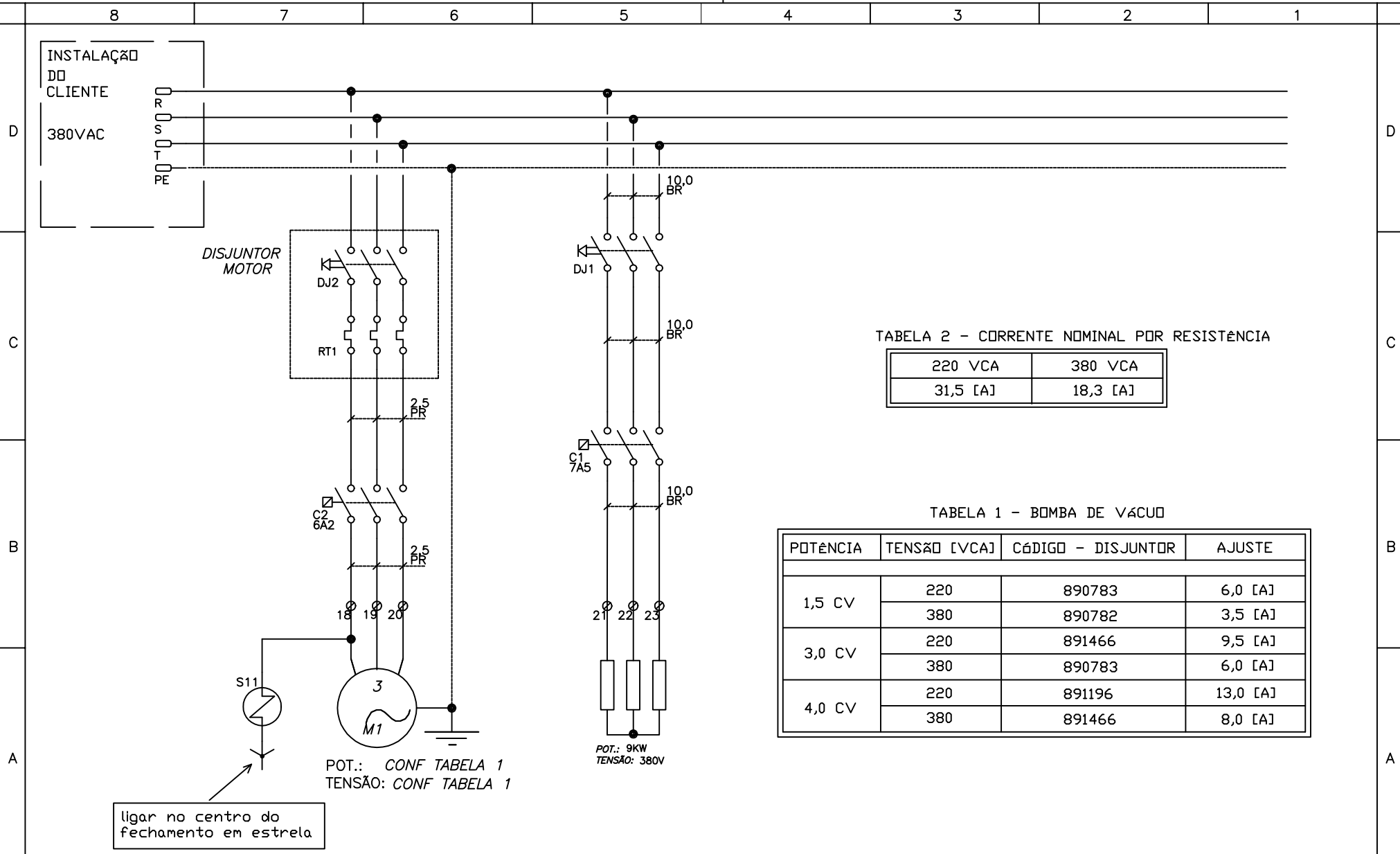

DENOMINAÇÃO: Circuito potência 380V

DES: PAULO

CONF: RIBEIRO

APROV: KOSEKI

Substitui: ee894759

Sub: A

FOLHA:


3/11

CÓDIGO:

ee894759

SUB-A: ADAPTACAO AO CLP ZAP-900
 SUB-B: INCLUSAO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA
 SUB-C:

SUB-D:
 SUB-E:
 SUB-F:

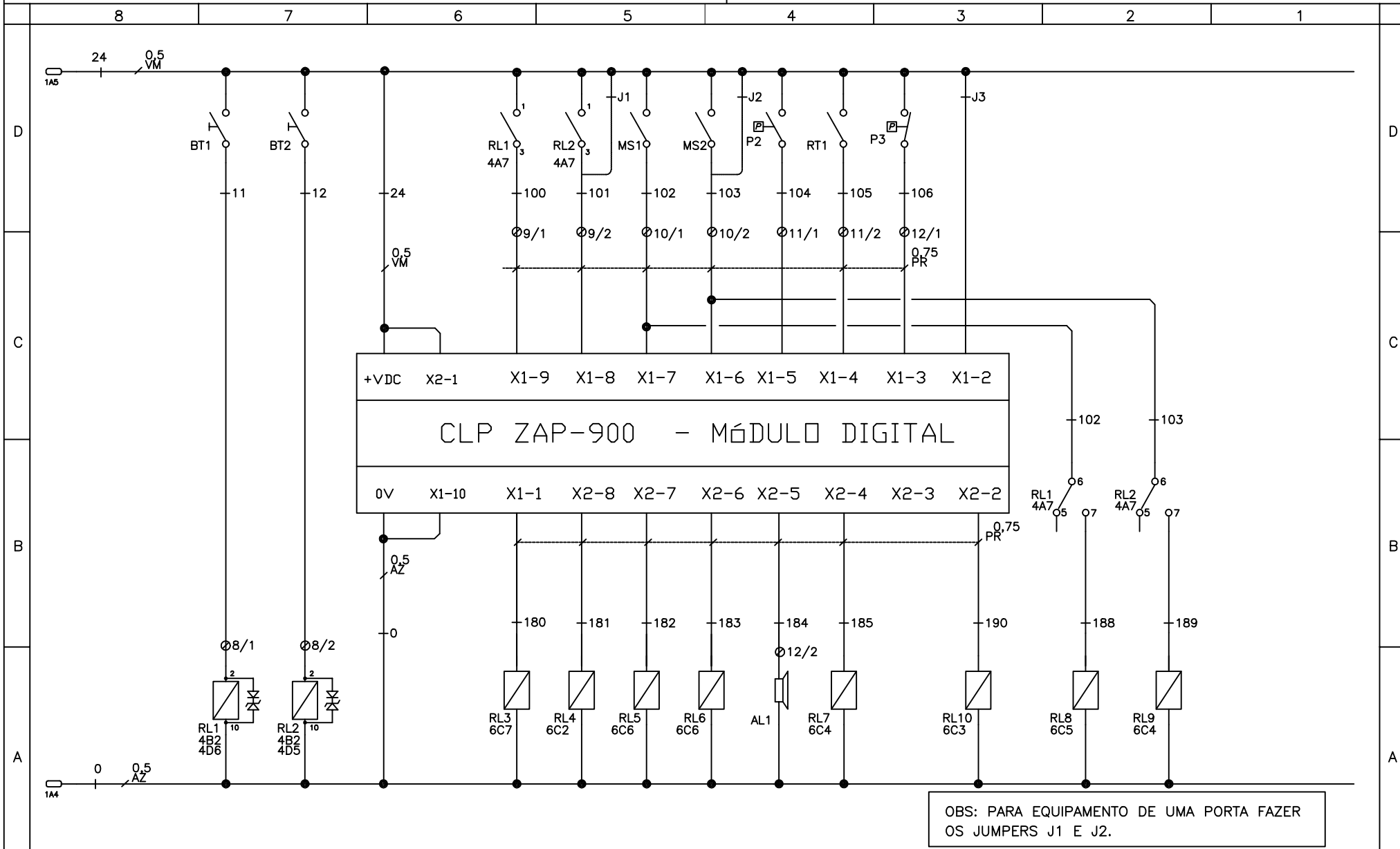

DENOMINAÇÃO: Circuito digital

DES: PAULO

CONF: RIBEIRO

APROV: KOSEKI

Substitui: ee894759

SUB
LETRA

A

B


Sub: A

FOLHA:


4/11

CÓDIGO:

ee894759

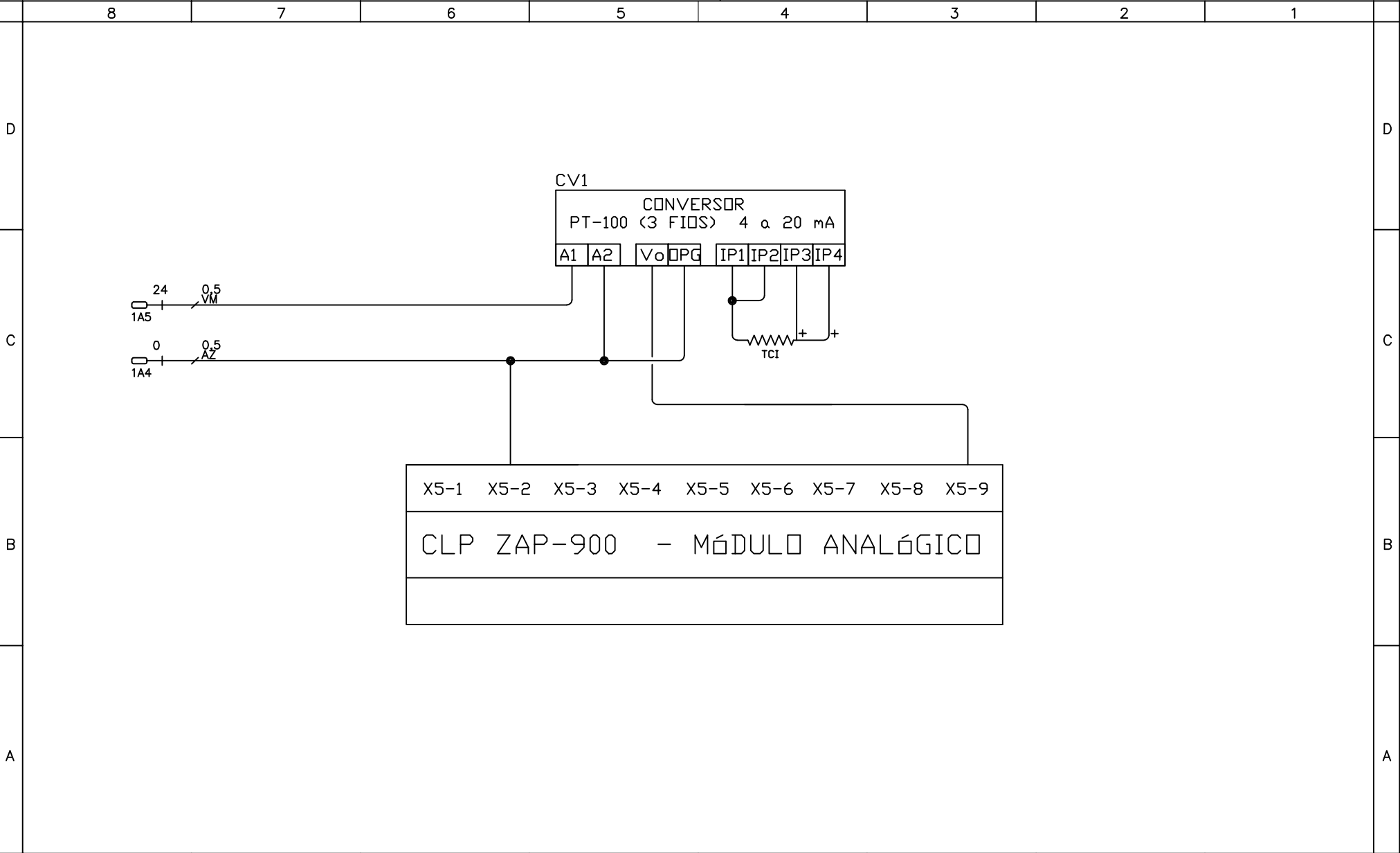


SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

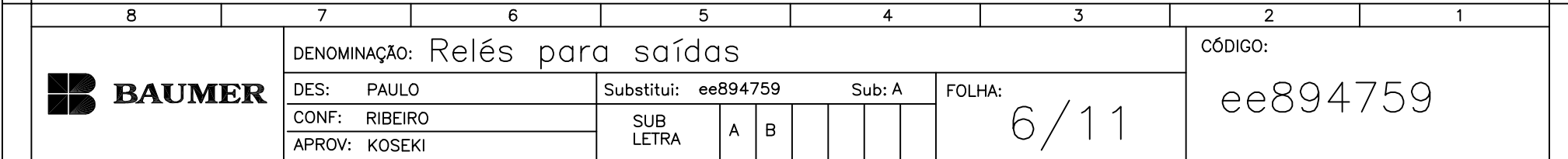

SUB-A: ADAPTACAO AO CLP ZAP-900
 SUB-B: INCLUSAO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA
 SUB-C:

SUB-D:
 SUB-E:
 SUB-F:

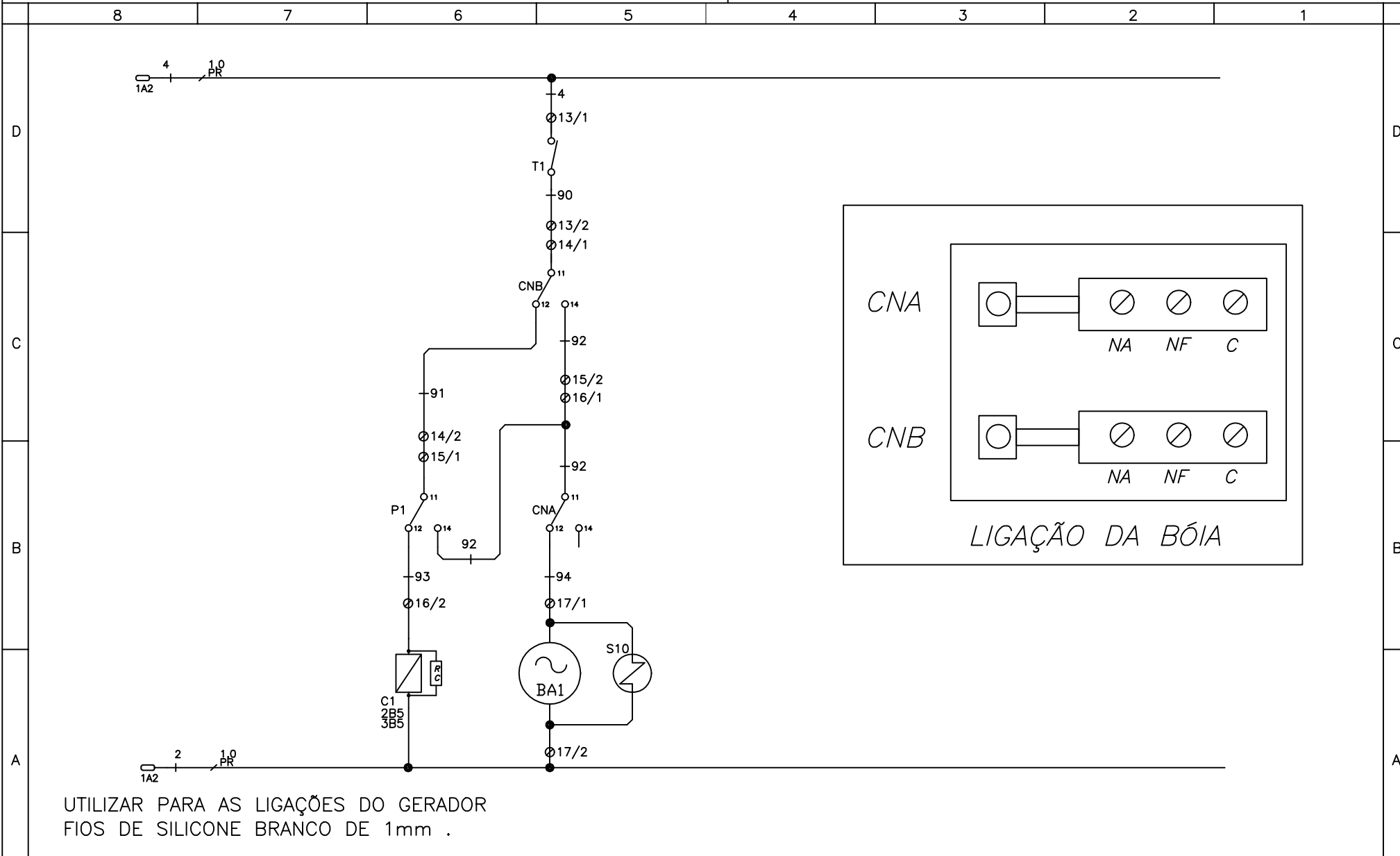

DENOMINAÇÃO: Controle gerador B100-NL

DES: Paulo

CONF: Ribeiro

APROV: Koseki

Substitui: ee894759


Sub: A

FOLHA:

7/11


CÓDIGO:

ee894759

SUB-A: ADAPTACAO AO CLP ZAP-900					SUB-D:												
SUB-B: INCLUSAO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA					SUB-E:												
SUB-C:					SUB-F:												
8		7		6		5		4		3		2		1			
D	DJ2	Disjuntor motor da bomba de vácuo										RL3 a RL10	Relés de acoplamento de saídas - 55291				D
	DJ3/DJ4	Disjuntor monopolares para o comando - 891149										S0	Válvula de vácuo na CI				
	CH1	Chave liga/desliga - 88256										S1	Válvula de vapor na CI				
	BTS1	Botão de emergência - 98278										S2	Válvula de ar na CI				
C	FA1	Fonte de alimentação 24Vcc - HI TECNOLOGIA - 891850										S3	Válvula de ar na canaleta de carga				C
	FP1	Fonte para a impressora 5Vcc - 87763										S4	Válvula de vácuo na canaleta de carga				
	RT1	Bloco auxiliar disjuntor motor - 891848										S5	Válvula de ar na canaleta de descarga				
	C2	Contator para a bomba de vácuo - 47925										S6	Válvula de vácuo na canaleta de descarga				
	M1	Bomba de vácuo de 1,5 CV										S11	Válvula de água para bomba de vácuo				
	BT1	Botão para a porta de carga - 890827										P3	Pressostato de segurança				
B	BT2	Botão para a porta de descarga - 890827										T1	Borne terra				B
	RL1	Relé porta de carga - 34156										BR1	Barra de aterramento				
	RL2	Relé porta de descarga - 34156										S12	Válvula de vapor na CE				
	MS1	Micro porta de carga										DJ1	Disjuntor resistência 86396				
	MS2	Micro porta de descarga										C1	Contator resistência 47925				
	P1	Pressostato de 121 C										P2	Pressostato de inicio de ciclo				
A	S10	Válvula de água para o gerador de vapor										M3	COMPRESSOR DE AR				A
	F1 a F9	Fusíveis de proteção (0,5A) - 87756										P3	PRESSOSTATO DO COMPRESSOR DE AR				
	AL1	Campainha para alarme - 88027										CV1	Conversor PT-100 para 4 a 20mA - 890083				
	TCI	Sensor PT-100 de controle										VL1	Ventilador comando				
8		7		6		5		4		3		2		1			
		DENOMINAÇÃO: Componentes										CÓDIGO:					
		DES: PAULO			Substitui: ee894759				Sub: A		FOLHA:			ee894759			
		CONF: RIBEIRO			SUB LETRA		A		B		8/11						
		APROV: KOSEKI															

SUB-A: ADAPTACAO AO CLP ZAP-900
SUB-B: INCLUSAO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA
SUB-C:

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

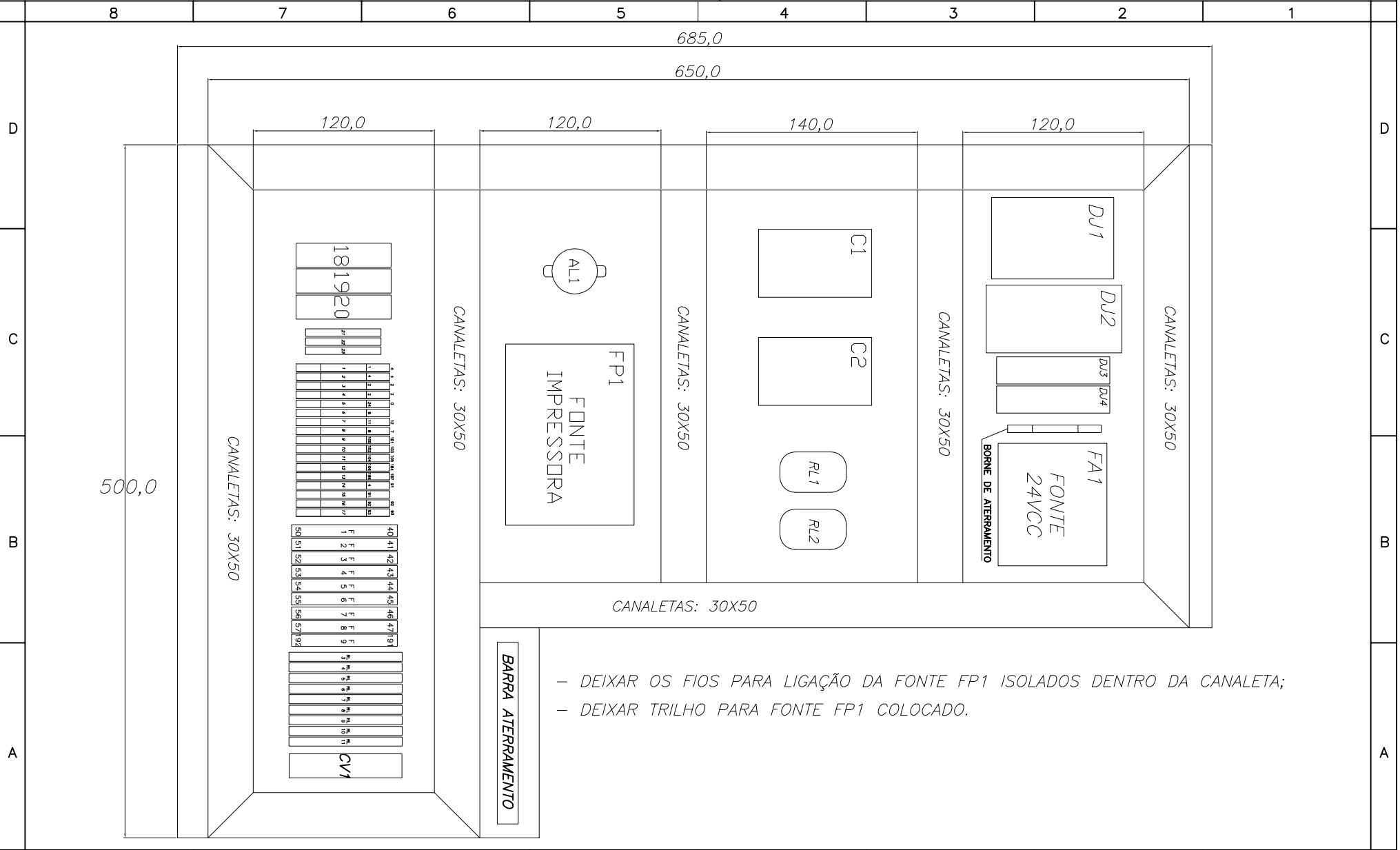

- DEIXAR OS FIOS PARA LIGAÇÃO DA FONTE FP1 ISOLADOS DENTRO DA CANALETA;
- DEIXAR TRILHO PARA FONTE FP1 COLOCADO.



DENOMINAÇÃO: Chassi do comando elétrico

DES: PAULO
CONF: RIBEIRO
APROV: KOSEKI



Substitui: ee894759 Sub: A
SUB LETRA A B

FOLHA: 9/11

CÓDIGO: ee894759

SUB-A: ADAPTAÇÃO PARA CLP ZAP-900
SUB-B: INCLUSAÇÃO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA
SUB-C:

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

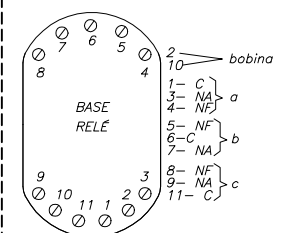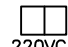	8	7	6	5	4	3	2	1																																																																																																					
D	<div><div><div><div>1 2 3 4</div><div>FORNE 5VCC IMPRESSORA AMCP (MOD. NOVO)</div><div>220VCA</div></div></div><div>BASE RL1 E RL2</div><div>LAYOUT DE LIGAÇÃO DA FONTE DA IMPRESSORA</div></div>								D																																																																																																				
C	<div>OBS.: A LIGAÇÃO DOS TERRAS DEVEM SER FEITAS EM UMA BARRA DE COBRE PARAFUSADA NO CHASSI DO COMANDO.</div>								C																																																																																																				
B	<div><div>181920</div><div>21 22 23</div><table border="1"><thead><tr><th>4</th><th>4</th><th>2</th><th>2</th><th>0</th><th>7</th><th>12</th><th>101</th><th>103</th><th>105</th><th>184</th><th>90</th><th>91</th><th>92</th><th>93</th><th>2</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>4</td><td>2</td><td>2</td><td>24</td><td>6</td><td>8</td><td>11</td><td>100</td><td>102</td><td>104</td><td>106</td><td>4</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>94</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td></tr></tbody></table><div><div>CH1 BTS1</div><div>ALIMENTAÇÃO 24V / 220V</div><div>PRINTER</div><div>CONTROLADOR</div><div>CONTROLE GERADOR</div><div>RELES DE CONTROLE DE PORTA</div></div><table border="1"><tbody><tr><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>191</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>F 1</td><td>F 2</td><td>F 3</td><td>F 4</td><td>F 5</td><td>F 6</td><td>F 7</td><td>F 8</td><td>F 9</td><td>RL 3</td><td>RL 4</td><td>RL 5</td><td>RL 6</td><td>RL 7</td><td>RL 8</td><td>RL 9</td><td>RL 10</td></tr><tr><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>192</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div> <div>B</div>								4	4	2	2	0	7	12	101	103	105	184	90	91	92	93	2	1	4	2	2	24	6	8	11	100	102	104	106	4	90	91	92	94	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	40	41	42	43	44	45	46	47	191									F 1	F 2	F 3	F 4	F 5	F 6	F 7	F 8	F 9	RL 3	RL 4	RL 5	RL 6	RL 7	RL 8	RL 9	RL 10	50	51	52	53	54	55	56	57	192								
4	4	2	2	0	7	12	101	103	105	184	90	91	92	93	2																																																																																														
1	4	2	2	24	6	8	11	100	102	104	106	4	90	91	92	94																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																																																																																													
40	41	42	43	44	45	46	47	191																																																																																																					
F 1	F 2	F 3	F 4	F 5	F 6	F 7	F 8	F 9	RL 3	RL 4	RL 5	RL 6	RL 7	RL 8	RL 9	RL 10																																																																																													
50	51	52	53	54	55	56	57	192																																																																																																					
A									A																																																																																																				

-xx NÚMERO DE ANILHA DO FIO
0xx NÚMERO DE BORNE SIMPLES
0xx/x NÚMERO DE BORNE DUPLO
1-Borne externo
2-Borne interno
xx COR E BITOLA DO FIO
BR - Cabo branco
VM - Cabo vermelho
AZ - Cabo azul
PR - Cabo preto
REFERÊNCIA CRUZADA
2A3
Número da coluna
Número da linha
Número da página



DENOMINAÇÃO: Régua de borne

DES: Paulo

CONF: Ribeiro

APROV: Koseki

Substitui: ee894759

Sub: A

FOLHA:


10/11

CÓDIGO:

ee894759

SUB-A: ADAPTAÇÃO AO CLP ZAP-900
SUB-B: INCLUSÃO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA
SUB-C:

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

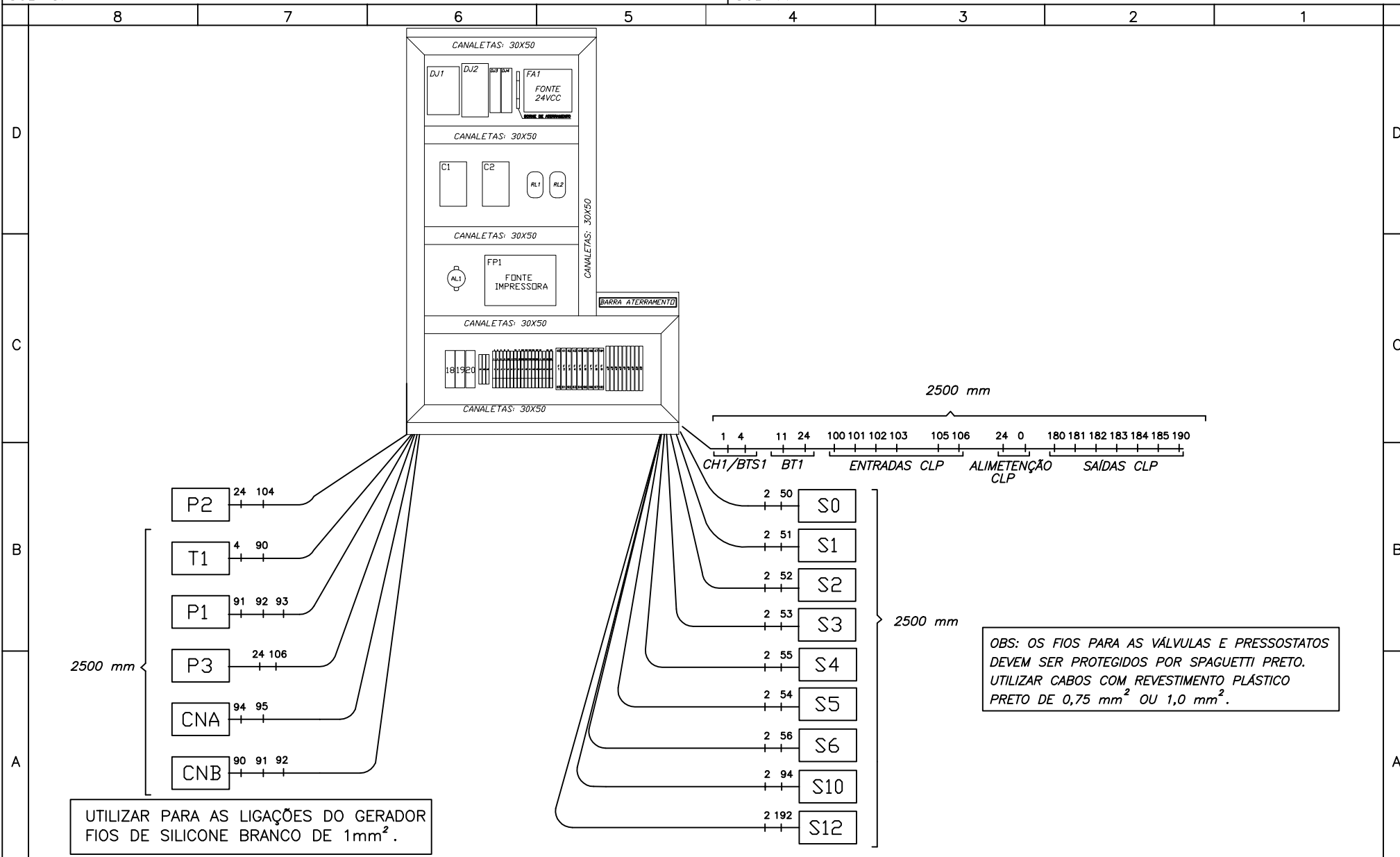

DENOMINAÇÃO: Chicote elétrico de ligação

DES: PAULO

CONF: RIBEIRO

APROV: KOSEKI

Substitui: ee894759

Sub: A

FOLHA:

11/11

CÓDIGO:

ee894759

EQUIPAMENTO: ESTERILIZADOR HI SPEED B-200/300/500-NL

ENTRADAS DIGITAIS

X1-9 - Relé porta de carga (RL1)
X1-8 - Relé porta de descarga (RL2)
X1-7 - Micro porta de carga (MS1)
X1-6 - Micro porta de descarga (MS2)
X1-5 - Pressostato de início de ciclo
X1-4 - Relé Térmico Bomba de Vácuo (RT1)
X1-3 - Pressostato de segurança

Entradas Analógicas

X5-4 - Sensor PT-100 de controle (TCI)

SAÍDAS DIGITAIS

X1-1 - Válvula de vácuo C.I. (S0)
X2-8 - Bomba de vácuo (C3)
X2-7 - Válvula de vapor na C.I. (S1)
X2-6 - Válvula de ar na C.I. (S2)
X2-5 - Alarme (AL1)
X2-4 - Controle da porta (RL7)
X2-2 - Válvula de vapor na C.E. (S7)



DATA:

DES: PAULO

CONF: RIBEIRO

APROV: KOSEKI

DESENHO ELÉTRICO

Substitui: ee894666

Sub: A

SUB
LETRA

A

B

NÚMERO DE PÁGINAS: 10

FOLHA:


CAPA

CÓDIGO:

ee894666

SUB-A: ADAPTACAO AO CLP ZAP-900
 SUB-B: INCLUSAO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA
 SUB-C:

SUB-D:
 SUB-E:
 SUB-F:

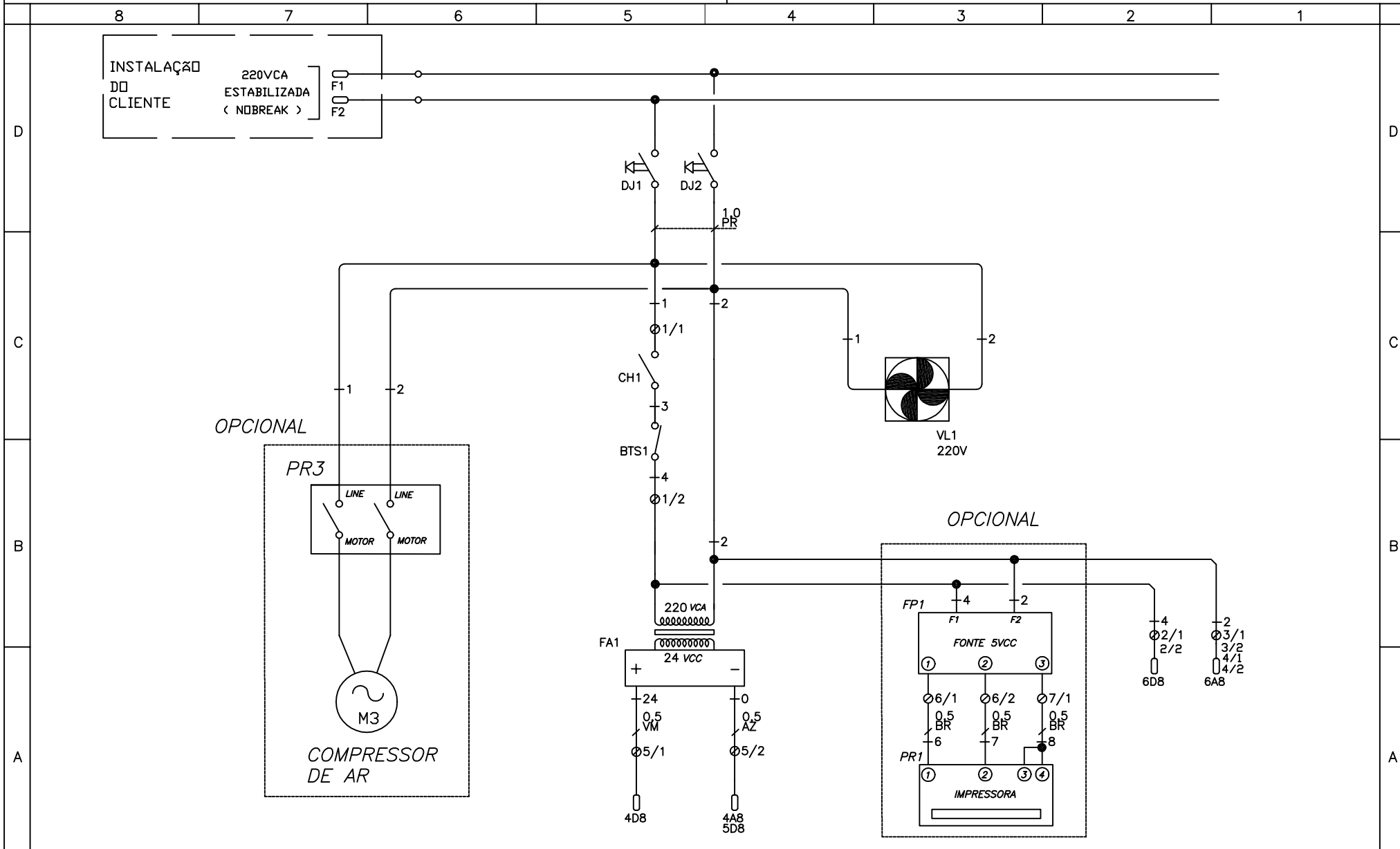

DENOMINAÇÃO: Circuito das fontes

DES: PAULO

CONF: RIBEIRO

APROV: KOSEKI

Substitui: ee894666

Sub: A

SUB
LETRA

A


B

FOLHA:

1/10


CÓDIGO:

ee894666

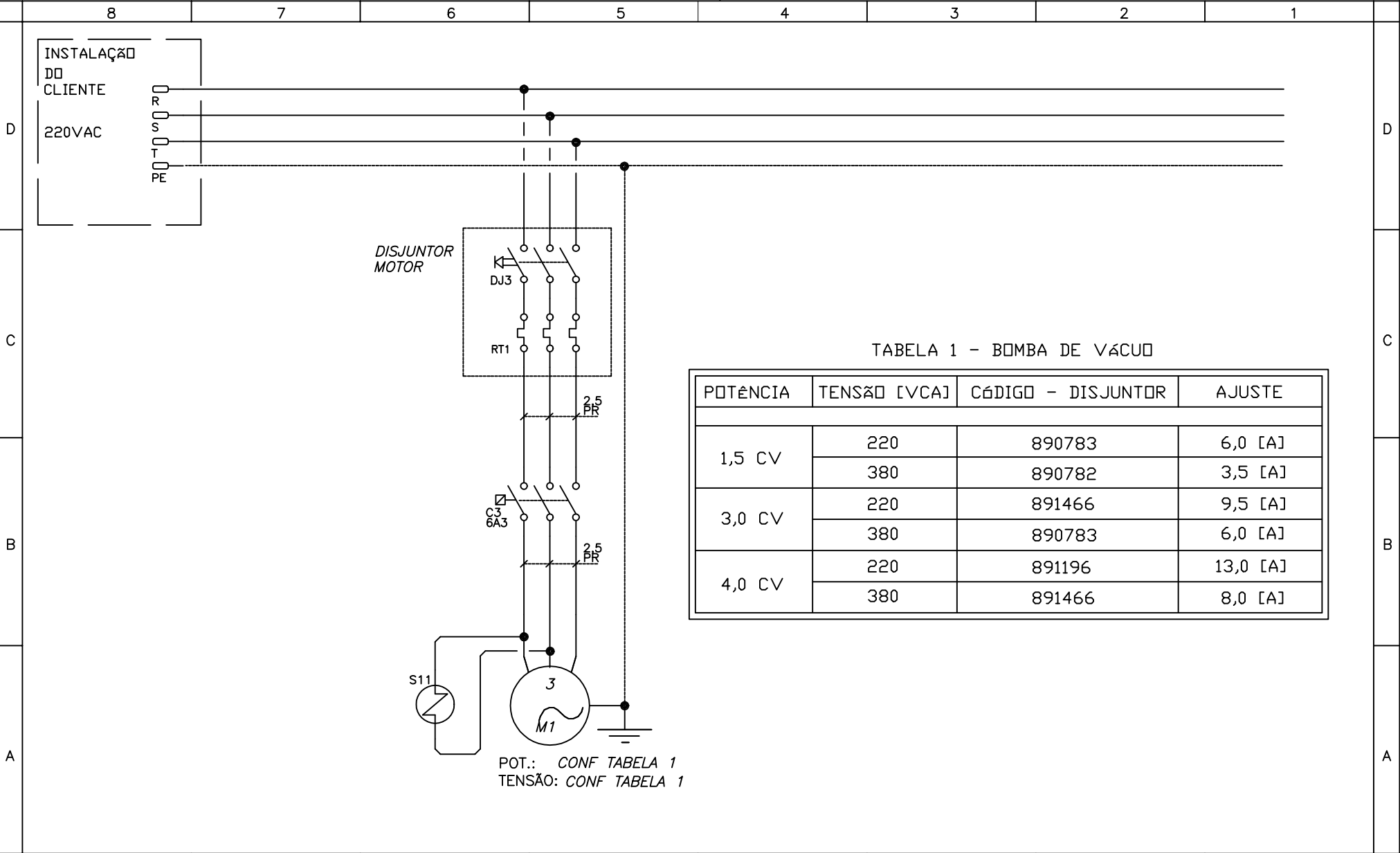

SUB-A: ADAPTACAO AO CLP ZAP-900
SUB-B: INCLUSAO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA
SUB-C:

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

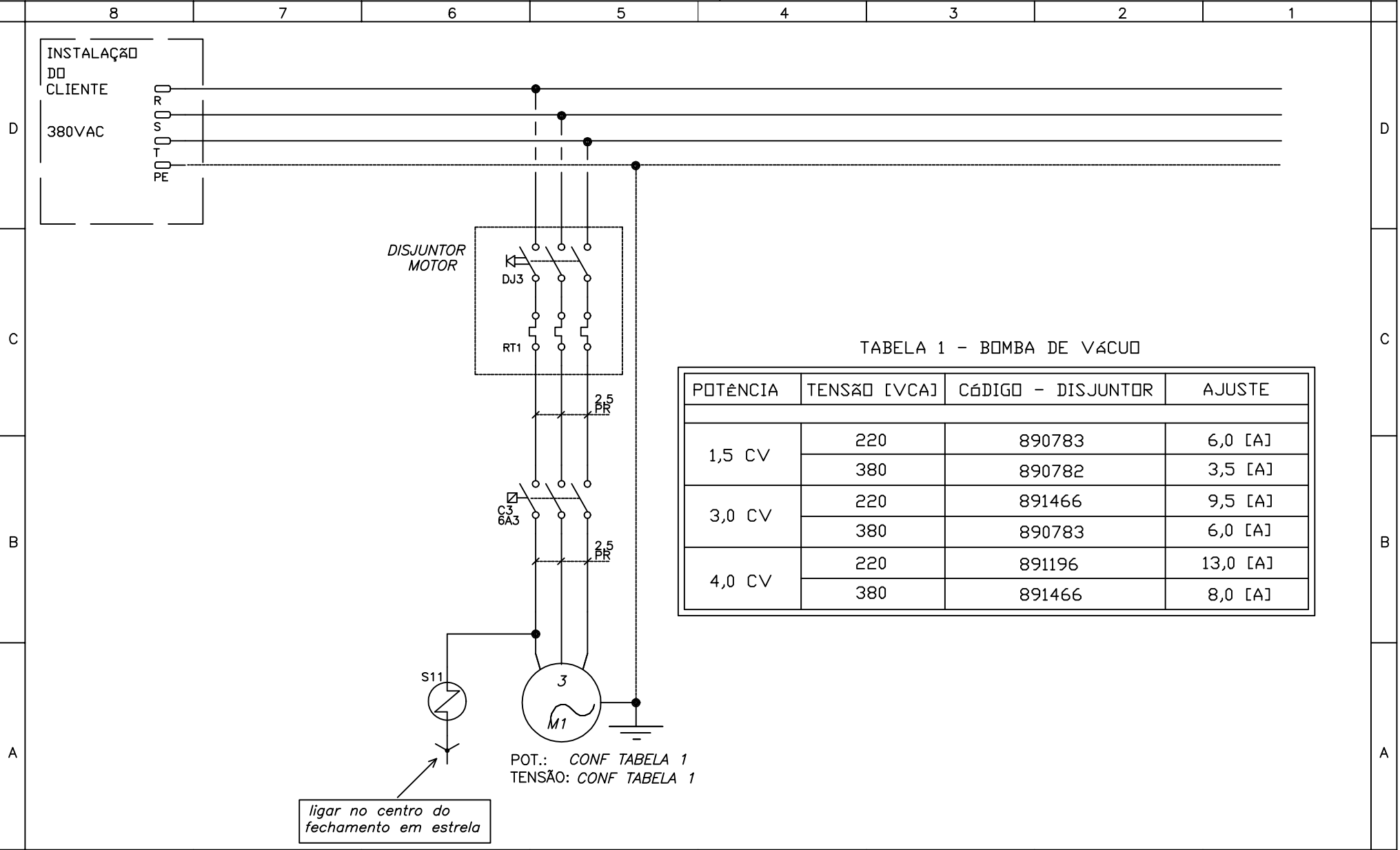

DENOMINAÇÃO: Circuito potência 380V

DES: PAULO
CONF: RIBEIRO
APROV: KOSEKI


Substitui: ee894666 Sub: A
SUB LETRA A B

FOLHA: 3/10

CÓDIGO:
ee894666

SUB-A: ADAPTACAO AO CLP ZAP-900
 SUB-B: INCLUSAO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA
 SUB-C:

SUB-D:
 SUB-E:
 SUB-F:

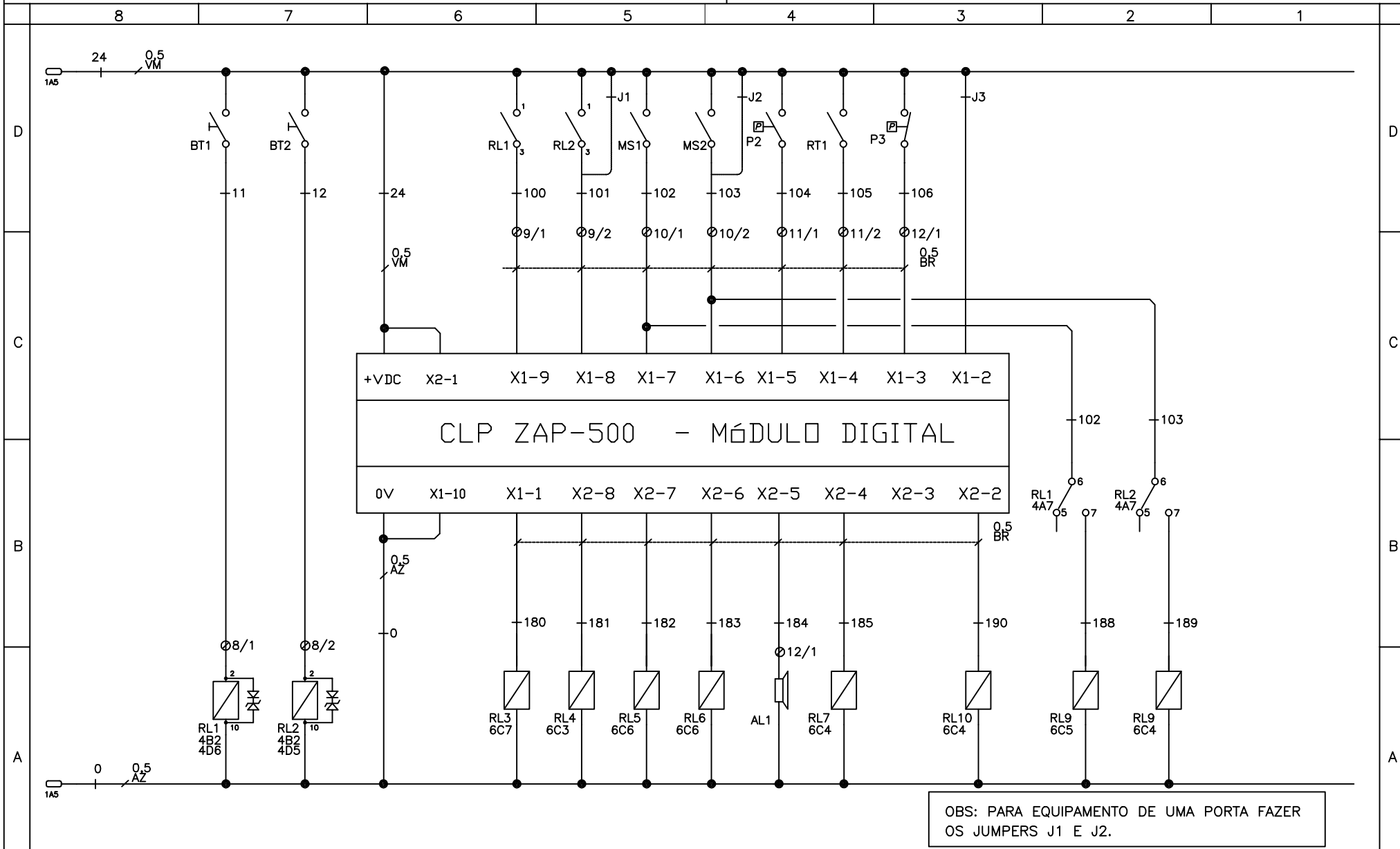

DENOMINAÇÃO: Circuito digital

DES: PAULO

CONF: RIBEIRO

APROV: KOSEKI

Substitui: ee894666

SUB
LETRA

A

B


Sub: A

FOLHA:

4/10


CÓDIGO:

ee894666

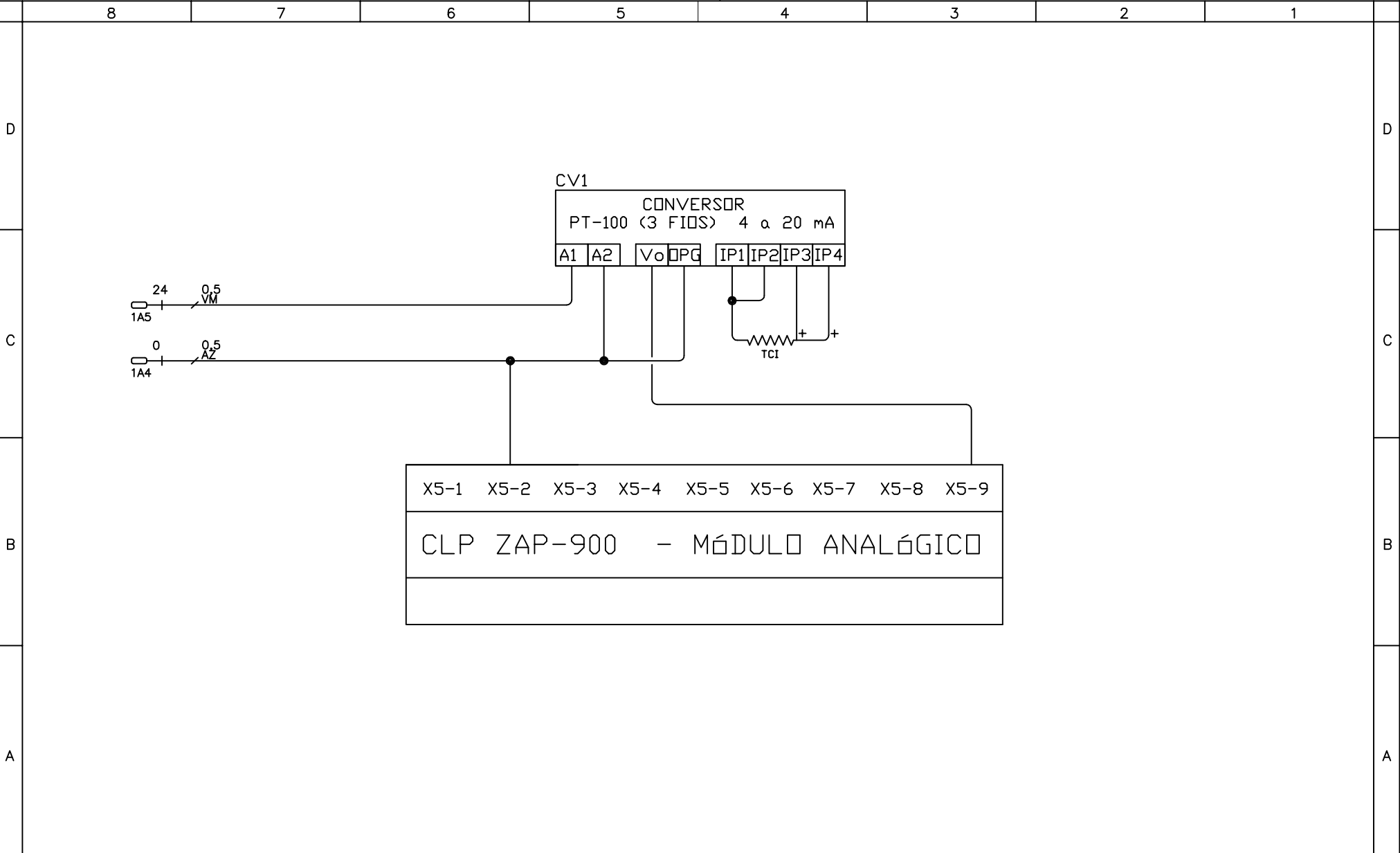

SUB-A: ADAPTACAO AO CLP ZAP-900
SUB-B: INCLUSAO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA
SUB-C:

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

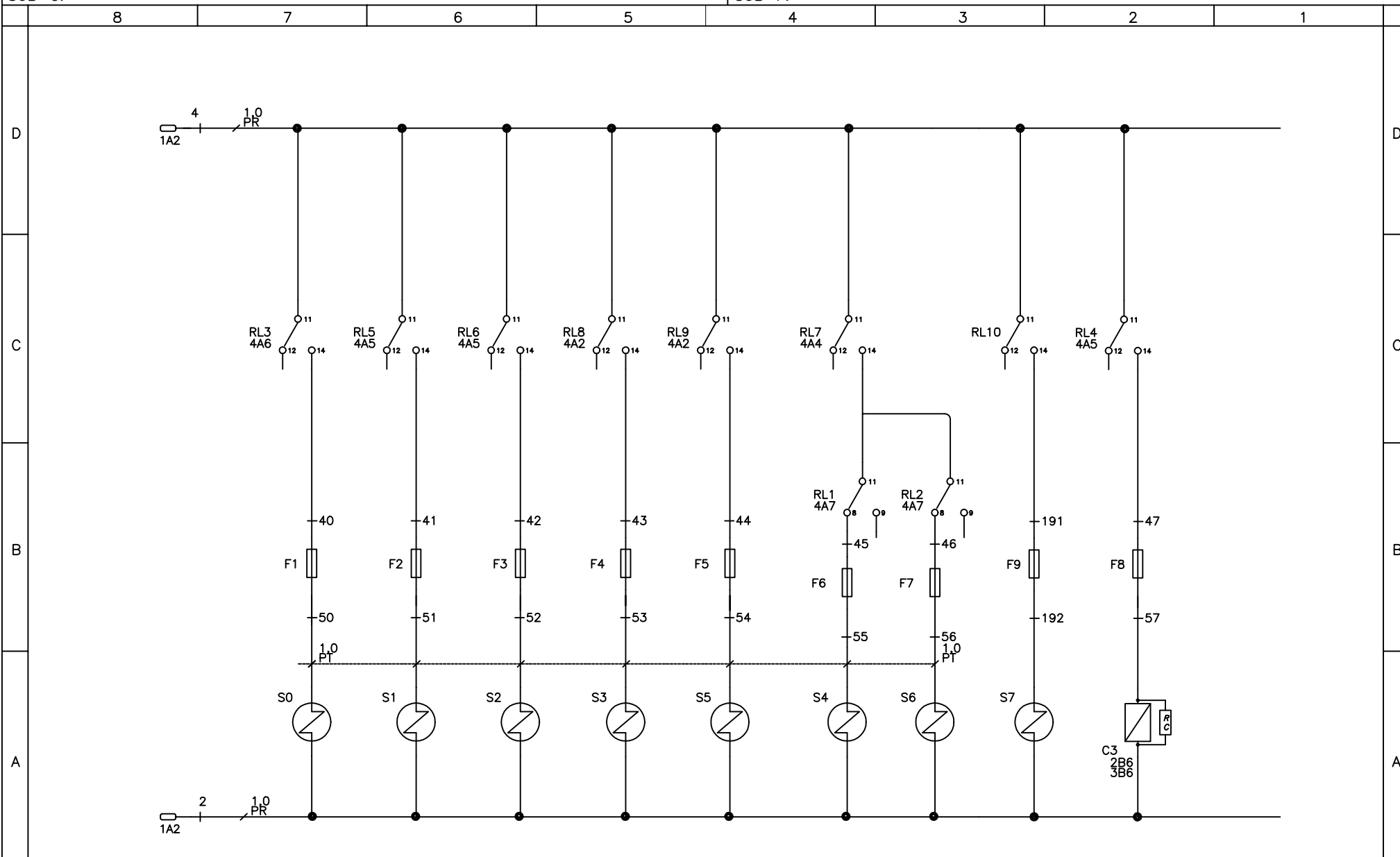

DENOMINAÇÃO: Relés para saídas

DES: PAULO

CONF: RIBEIRO

APROV: KOSEKI

Substitui: ee894666


Sub: A


FOLHA:


6/10

CÓDIGO:

ee894666


SUB-A: ADAPTACAO AO CLP ZAP-900					SUB-D:														
SUB-B: INCLUSAO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA					SUB-E:														
SUB-C:					SUB-F:														
8		7		6		5		4		3		2		1					
D	DJ3	Disjuntor motor da bomba de vácuo (vide pq. 02 e 03)										D							
	DJ1/DJ2	Disjuntor monopolares para o comando - 891149																	
	CH1	Chave liga/desliga - 88256																	
	BTS1	Botão de emergência - 98278																	
C	FA1	Fonte de alimentação 24Vcc - HI TECNOLOGIA - 891850										C							
	FP1	Fonte para a impressora 5Vcc - 87763																	
	RT1	Bloco auxiliar disjuntor motor - 891848																	
	C3	Contator para a bomba de vácuo - 47925																	
	M1	Bomba de vácuo de 1,5 CV																	
	BT1	Botão para a porta de carga - 890827																	
B	BT2	Botão para a porta de descarga - 890827										B							
	RL1	Relé porta de carga - 34156																	
	RL2	Relé porta de descarga - 34156																	
	MS1	Micro porta de carga																	
	MS2	Micro porta de descarga																	
	S7	Válvula de vapor na CE																	
A	BR1	Barra de aterramento										A							
	F1 a F9	Fusíveis de proteção (0,5A) - 87756																	
	AL1	Campainha para alarme - 88027																	
	TCI	Sensor PT-100 de controle																	
8		7		6		5		4		3		2		1					
		DENOMINAÇÃO: Componentes										CÓDIGO: ee894666							
		DES: PAULO			Substitui: ee894666			Sub: A								FOLHA: 7/10			
		CONF: RIBEIRO			SUB LETRA			A B											
		APROV: KOSEKI																	

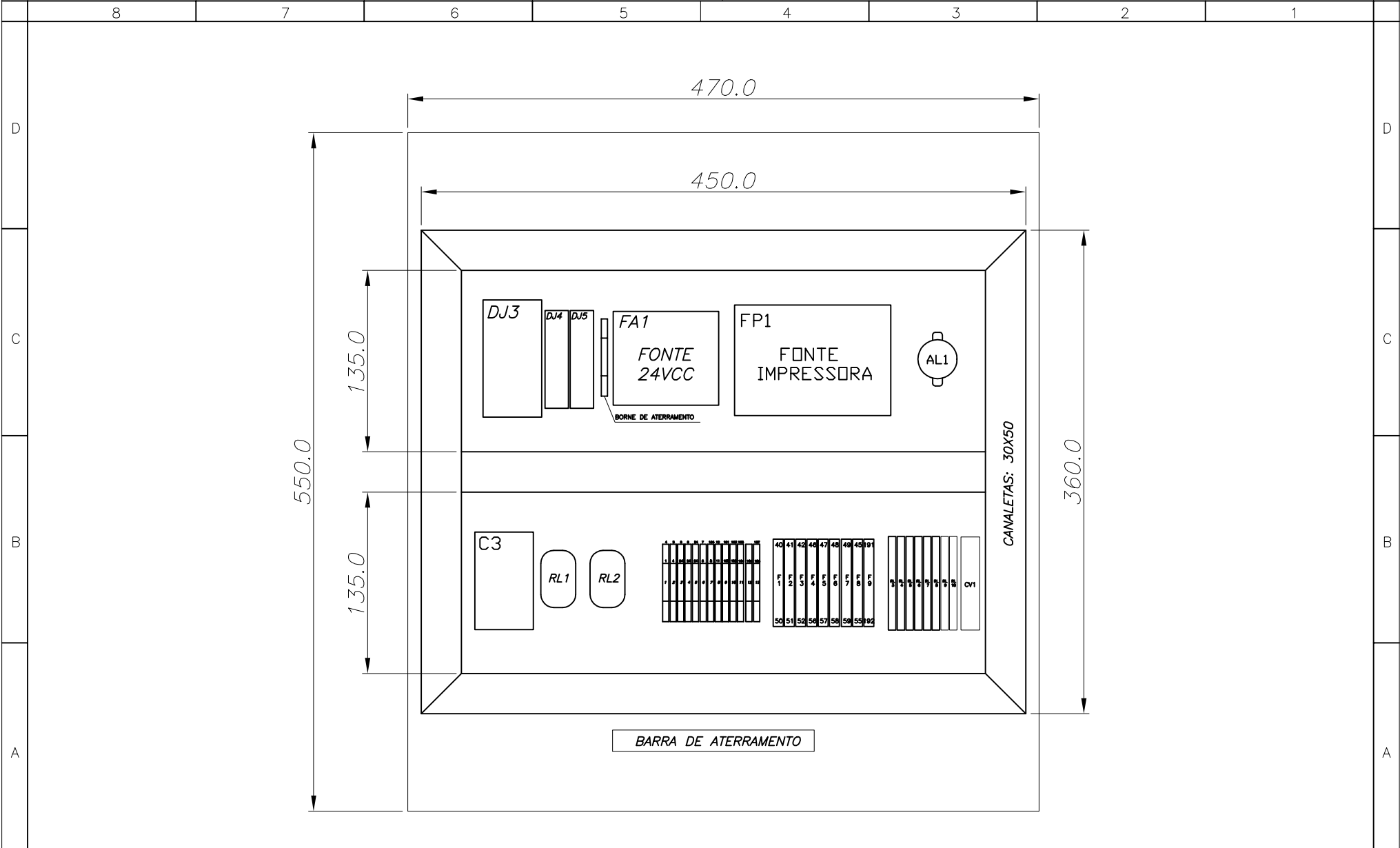

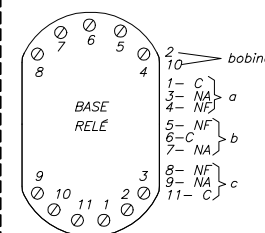	8	7	6	5	4	3	2	1																																																																							
D	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>—xx NÚMERO DE ANILHA DO FIO</p> <p>Øxx NÚMERO DE BORNE SIMPLES</p> <p>Øxx/x NÚMERO DE BORNE DUPLO</p> <p style="margin-left: 20px;">1—Borne externo 2—Borne interno</p> <p>xx COR E BITOLA DO FIO</p> <p>BR — Cabo branco</p> <p>VM — Cabo vermelho</p> <p>AZ — Cabo azul</p> <p>PR — Cabo preto</p> <p>REFERÊNCIA CRUZADA</p> <p>2A3</p> <p style="margin-left: 20px;">↑ Número da coluna ↑ Número da linha ↑ Número da página</p> </div> <div style="width: 40%; text-align: center;">  <p>BASE RL1 E RL2</p> </div> <div style="width: 25%; text-align: center;"> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">1 2 3 4</div> <p>FORNE 5VCC IMPRESSORA AMCP (MOD. NOVO)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 10px;">220VCA</div> </div> <p>LAYOUT DE LIGAÇÃO DA FONTE DA IMPRESSORA</p> </div> <div style="width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>OBS.: A LIGAÇÃO DOS TERRAS DEVEM SER FEITAS EM UMA BARRA DE COBRE PARAFUSADA NO CHASSI DO COMANDO.</p> </div> </div> </div>								D																																																																						
C									C																																																																						
B									B																																																																						
A	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>4</td><td>4</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>7</td><td>12</td><td>101</td><td>103</td><td>105</td><td>184</td></tr> <tr><td>1</td><td>4</td><td>2</td><td>2</td><td>24</td><td>6</td><td>8</td><td>11</td><td>100</td><td>102</td><td>104</td><td>106</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> </table> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> CH1 BTS1 ALIMENTAÇÃO 24V / 220V PRINTER CONTROLADOR </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> RELES DE CONTROLE DE PORTA </div> </div> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>191</td></tr> <tr><td>F 1</td><td>F 2</td><td>F 3</td><td>F 4</td><td>F 5</td><td>F 6</td><td>F 7</td><td>F 8</td><td>F 9</td></tr> <tr><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>192</td></tr> </table> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>RL 3</td><td>RL 4</td><td>RL 5</td><td>RL 6</td><td>RL 7</td><td>RL 8</td><td>RL 9</td><td>RL 10</td></tr> </table> </div>								4	4	2	2	0	7	12	101	103	105	184	1	4	2	2	24	6	8	11	100	102	104	106	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	40	41	42	43	44	45	46	47	191	F 1	F 2	F 3	F 4	F 5	F 6	F 7	F 8	F 9	50	51	52	53	54	55	56	57	192	RL 3	RL 4	RL 5	RL 6	RL 7	RL 8	RL 9	RL 10	A
4	4	2	2	0	7	12	101	103	105	184																																																																					
1	4	2	2	24	6	8	11	100	102	104	106																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																				
40	41	42	43	44	45	46	47	191																																																																							
F 1	F 2	F 3	F 4	F 5	F 6	F 7	F 8	F 9																																																																							
50	51	52	53	54	55	56	57	192																																																																							
RL 3	RL 4	RL 5	RL 6	RL 7	RL 8	RL 9	RL 10																																																																								

SUB-A: ADAPTACAO AO CLP ZAP-900
SUB-B: INCLUSAO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA
SUB-C:

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

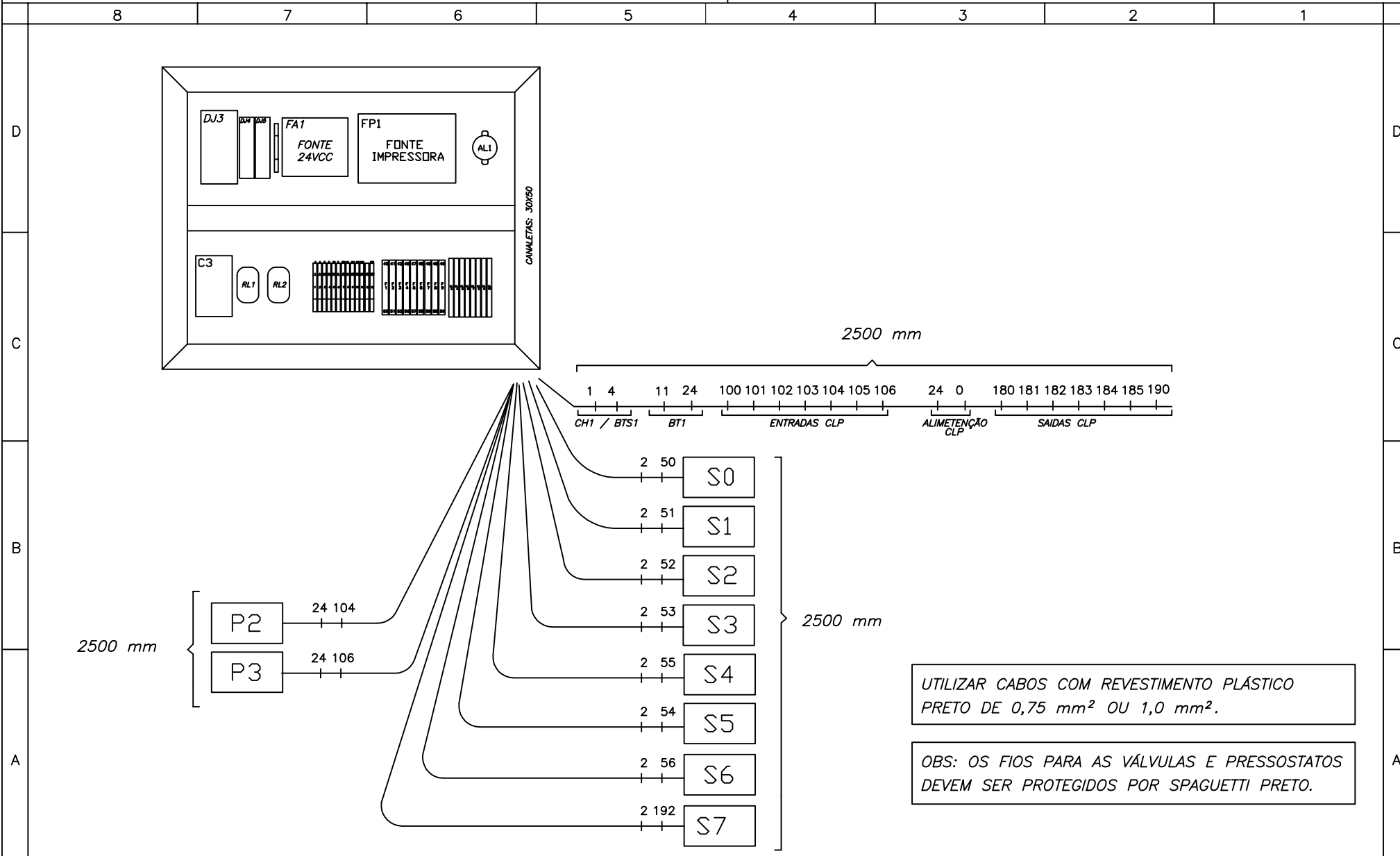

DENOMINAÇÃO: Chicote elétrico de ligação

DES: PAULO

CONF: RIBEIRO

APROV: KOSEKI

Substitui: ee894666

Sub: A

FOLHA:

10/10

CÓDIGO:

ee894666

EQUIPAMENTO: ESTERILIZADOR HI SPEED B-200/300/500-NL
COMANDO GERADOR 24 kW



DATA:

DES: Paulo

CONF: Ribeiro

APROV: Koseki

DESENHO ELÉTRICO

Substitui:

Sub:

SUB
LETRA

NÚMERO DE PÁGINAS: 4


FOLHA:

CAPA

CÓDIGO:



ee894843


SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

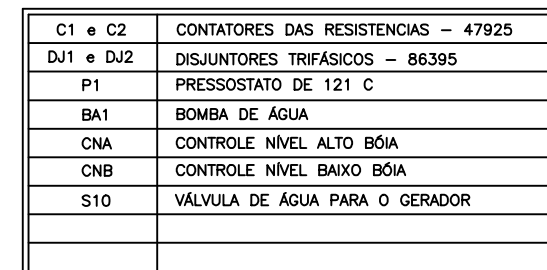

ee894843

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

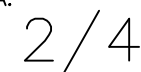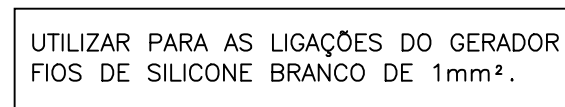

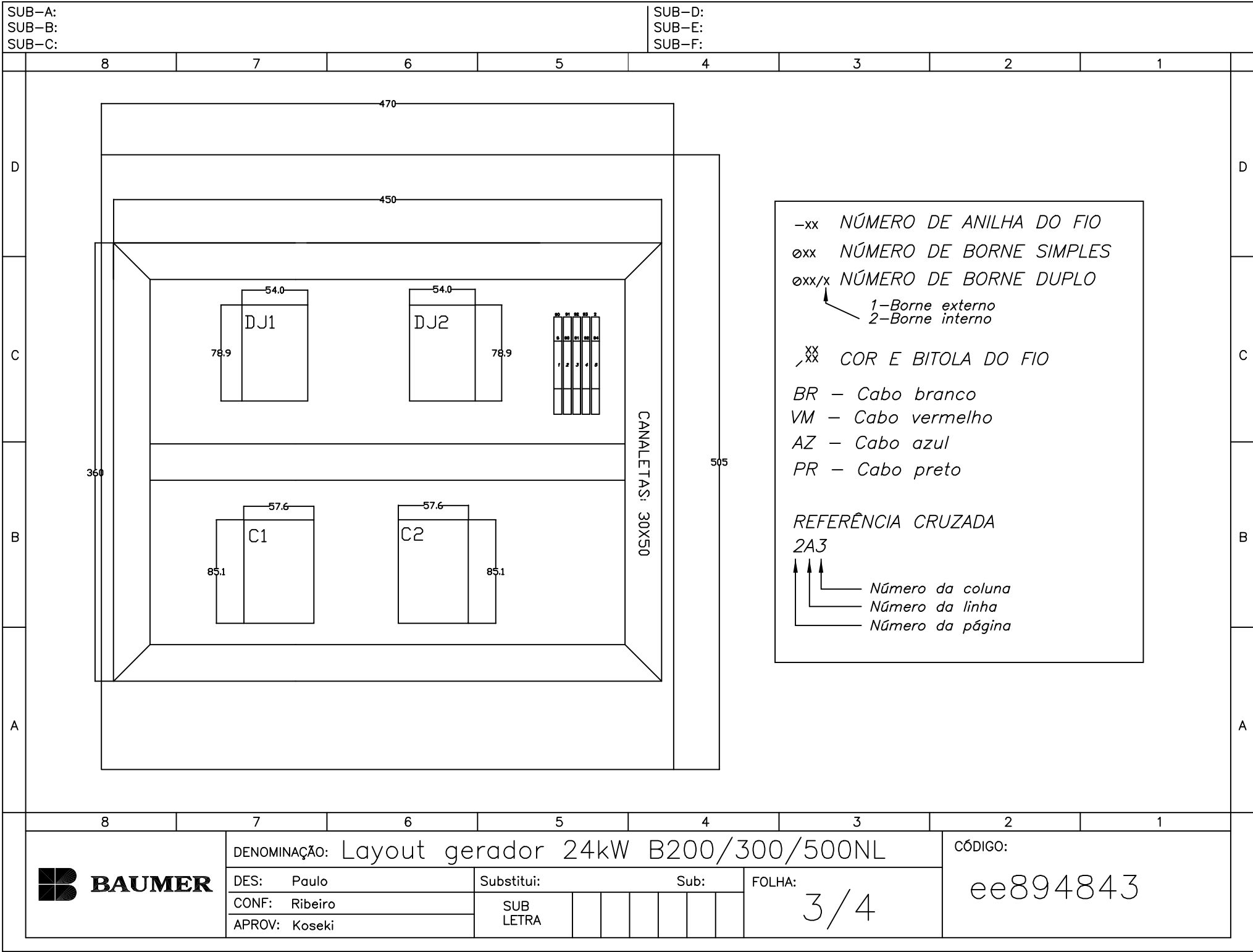

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:



1

D

C

B

A

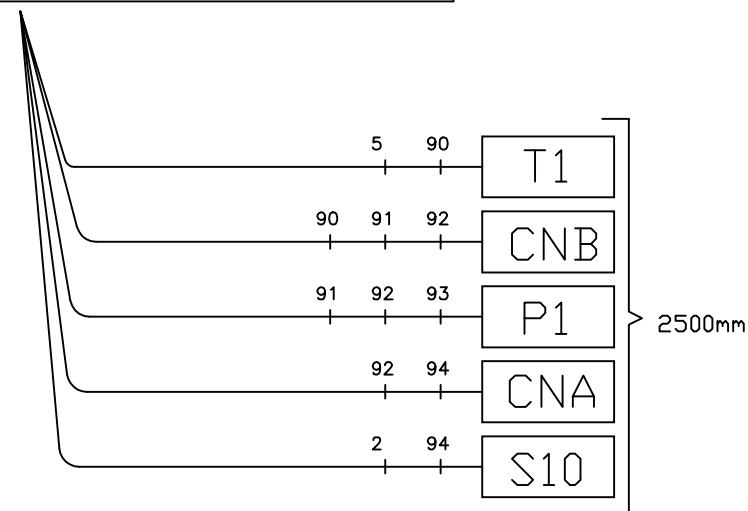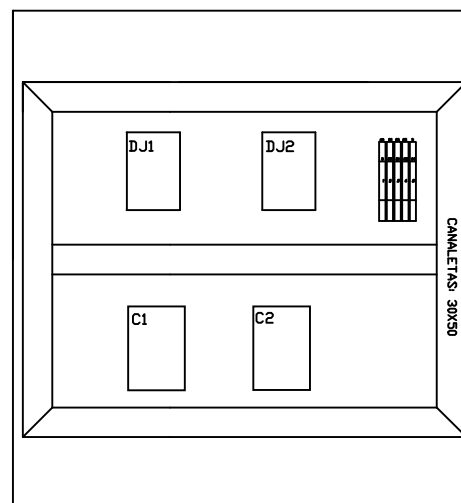

UTILIZAR PARA AS LIGAÇÕES DO GERADOR
FIOS DE SILICONE BRANCO DE 1mm²



BAUMER

DENOMINAÇÃO: Layout gerador 24kW B200/300/500-NL

DES:	Paulo
------	-------

Substitui:

Sub:

FOLHA:

CONF: Ribeiro

SUB
LETRA
$$4/4$$

CÓDIGO:

ee894843

EQUIPAMENTO: ESTERILIZADOR HI SPEED B-200/300/500-NL
COMANDO GERADOR 36kW



DATA:

DES: Paulo

CONF: Ribeiro

APROV: Koseki

DESENHO ELÉTRICO

Substitui:

Sub:

SUB
LETRA

NÚMERO DE PÁGINAS: 4

FOLHA:

CAPA

CÓDIGO:

ee894844

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:



220 VCA	380 VCA
47,4 [A]	27,4 [A]

TABELA 1 - REFERÊNCIA

C1 e C2	CONTADORES DAS RESISTÊNCIAS – 47926
DJ1 e DJ2	DISJUNTORES TRIFÁSICOS – 88456
P1	PRESSOSTATO DE 121 C
BA1	BOMBA DE ÁGUA
CNA	CONTROLE NÍVEL ALTO BÓIA
CNB	CONTROLE NÍVEL BAIXO BÓIA
S10	VÁLVULA DE ÁGUA PARA O GERADOR





CÓDIGO:

FOLHA:

SUB
LETRA
$$1/4$$

ee894844


SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

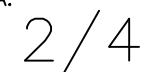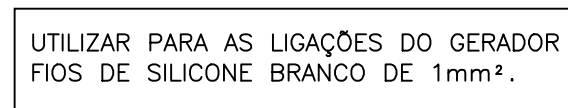

APROV: Koseki

SUB-A:
SUB-B:
SUB-C:

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

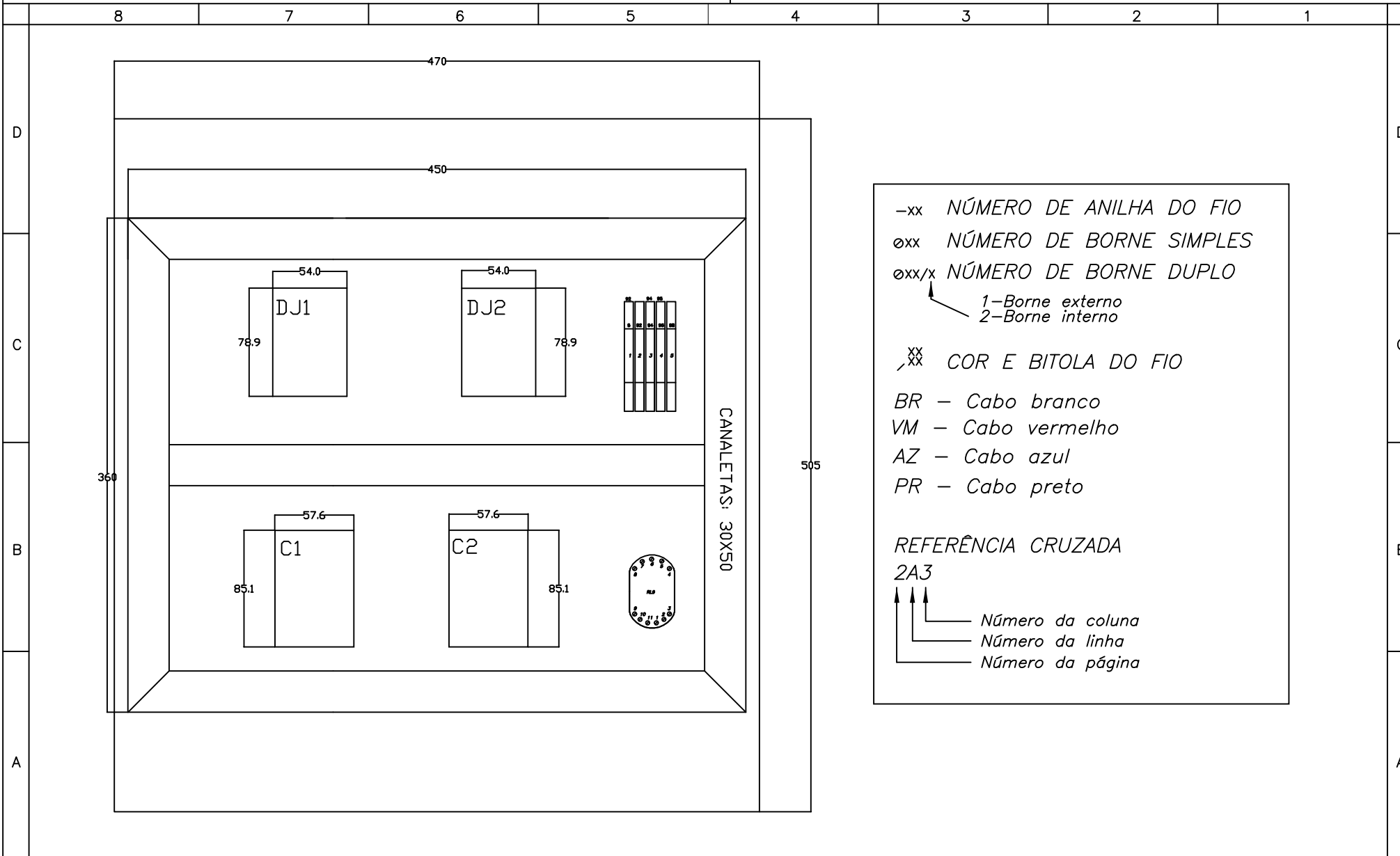

-xx NÚMERO DE ANILHA DO FIO
øxx NÚMERO DE BORNE SIMPLES
øxx/x NÚMERO DE BORNE DUPLO
1-Borne externo
2-Borne interno

xx COR E BITOLA DO FIO
BR - Cabo branco
VM - Cabo vermelho
AZ - Cabo azul
PR - Cabo preto

REFERÊNCIA CRUZADA
2A3
Número da coluna
Número da linha
Número da página



DENOMINAÇÃO: Layout gerador 36kW B200/300/500-NL

DES: Paulo

CONF: Ribeiro

APROV: Koseki

Substitui:

SUB
LETRA

Sub:

FOLHA:

3/4

CÓDIGO:

ee894844

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:



1

D

C

B

A

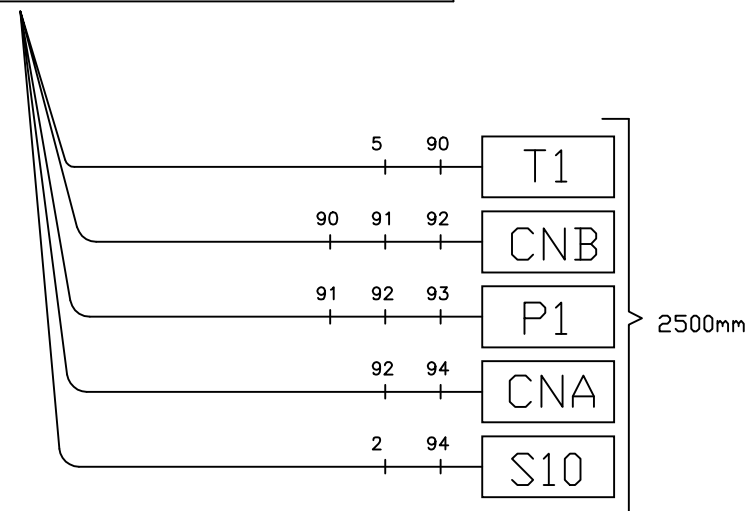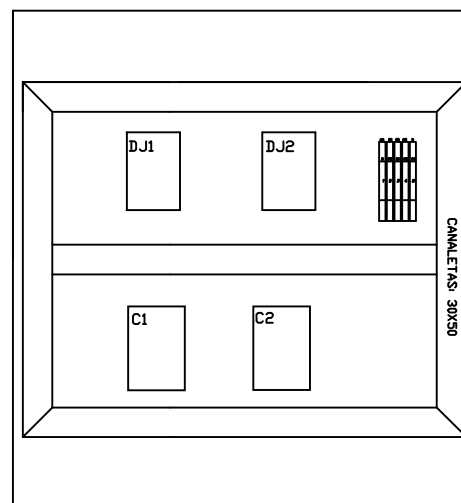

UTILIZAR PARA AS LIGAÇÕES DO GERADOR
FIOS DE SILICONE BRANCO DE 1mm²



BAUMER

DENOMINAÇÃO: Layout gerador 36kW B200/300/500-NL

DES:	Paulo
------	-------

CONF: Ribeiro

APROV: Koseki

Substitui:

Sub:


FOLHA:


SUB
LETRA
$$4/4$$


CÓDIGO:


ee894844

EQUIPAMENTO: ESTERILIZADOR HI SPEED B-200/300/500-NL
COMANDO GERADOR 52kW

 BAUMER	DATA:	DESENHO ELÉTRICO					NÚMERO DE PÁGINAS: 4	CÓDIGO: ee894845
	DES: Paulo	Substitui: Sub:					FOLHA: CAPA	
	CONF: Ribeiro							
	APROV: Koseki	SUB LETRA						

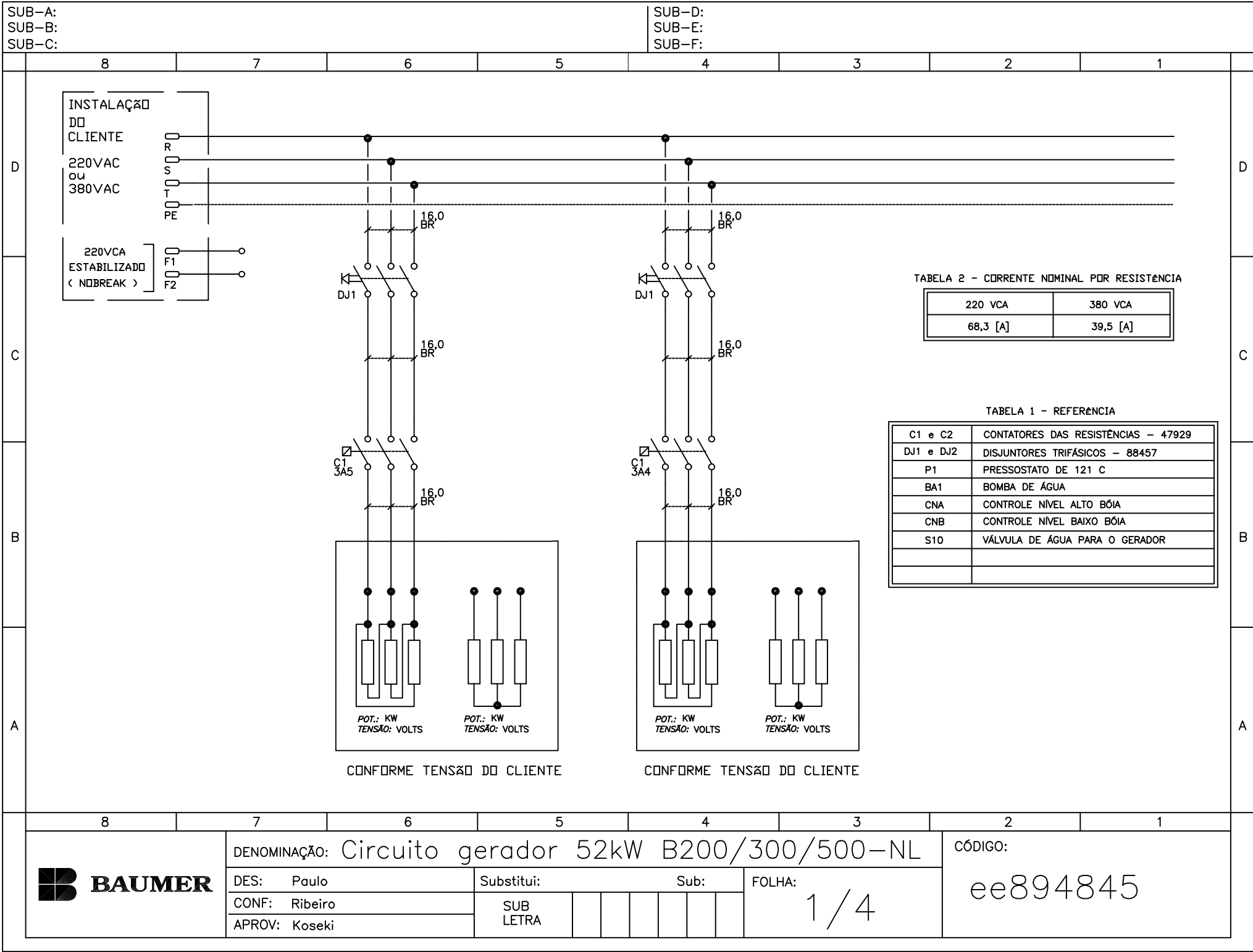

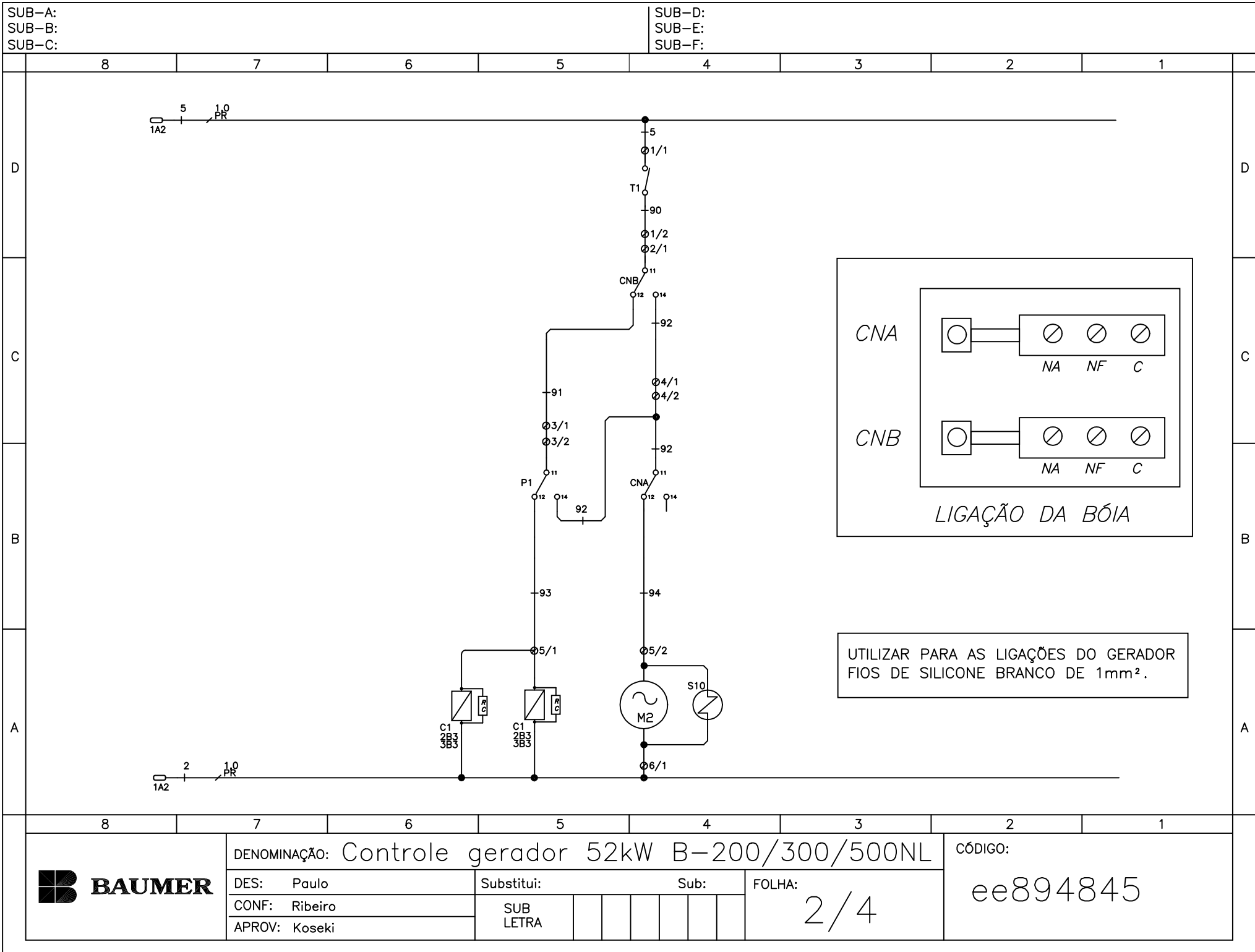

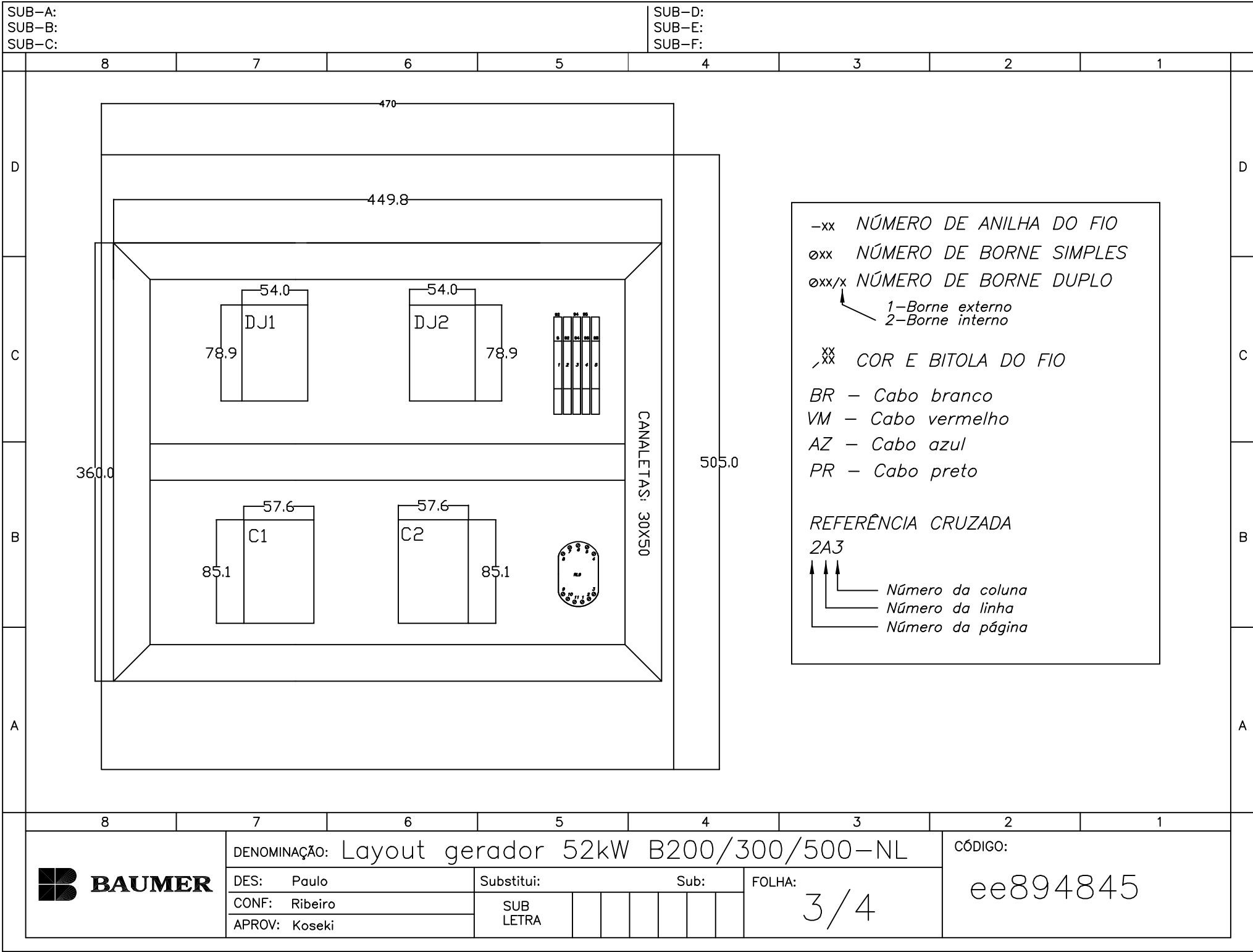

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:



1

D

C

B

A

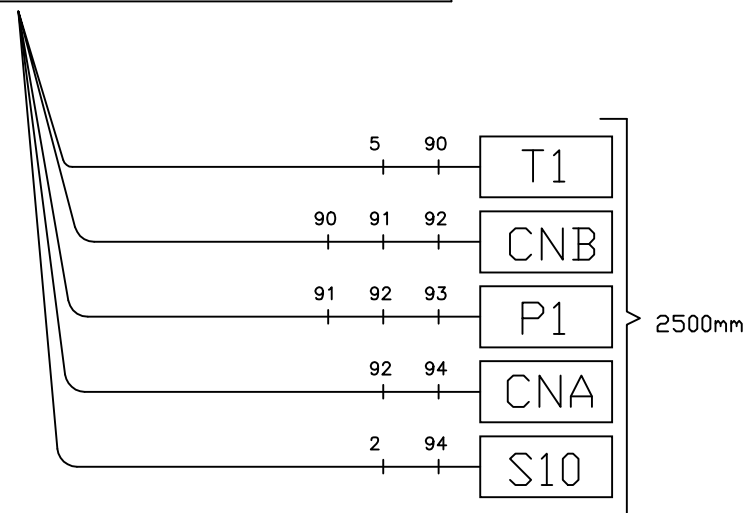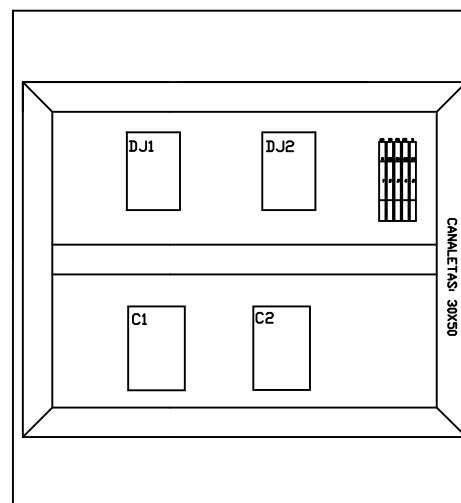

UTILIZAR PARA AS LIGAÇÕES DO GERADOR
FIOS DE SILICONE BRANCO DE 1mm²



BAUMER

DENOMINAÇÃO: Layout gerador 52kW B200/300/500-NL

DES:	Paulo
------	-------

CONF: Ribeiro

APROV: Koseki

Substitui:

Sub:

FOLHA:


SUB
LETRA
$$4/4$$

CÓDIGO:

ee894845

N. H1-LAC

— LINHA DE VAPOR
— LINHA DE AR COMPRIMIDO
— LINHA DE VÁCUO
— LINHA DE ÁGUA
— LINHA DE AR ATMOSFÉRICO
- - - LINHA DE DRENAGEM

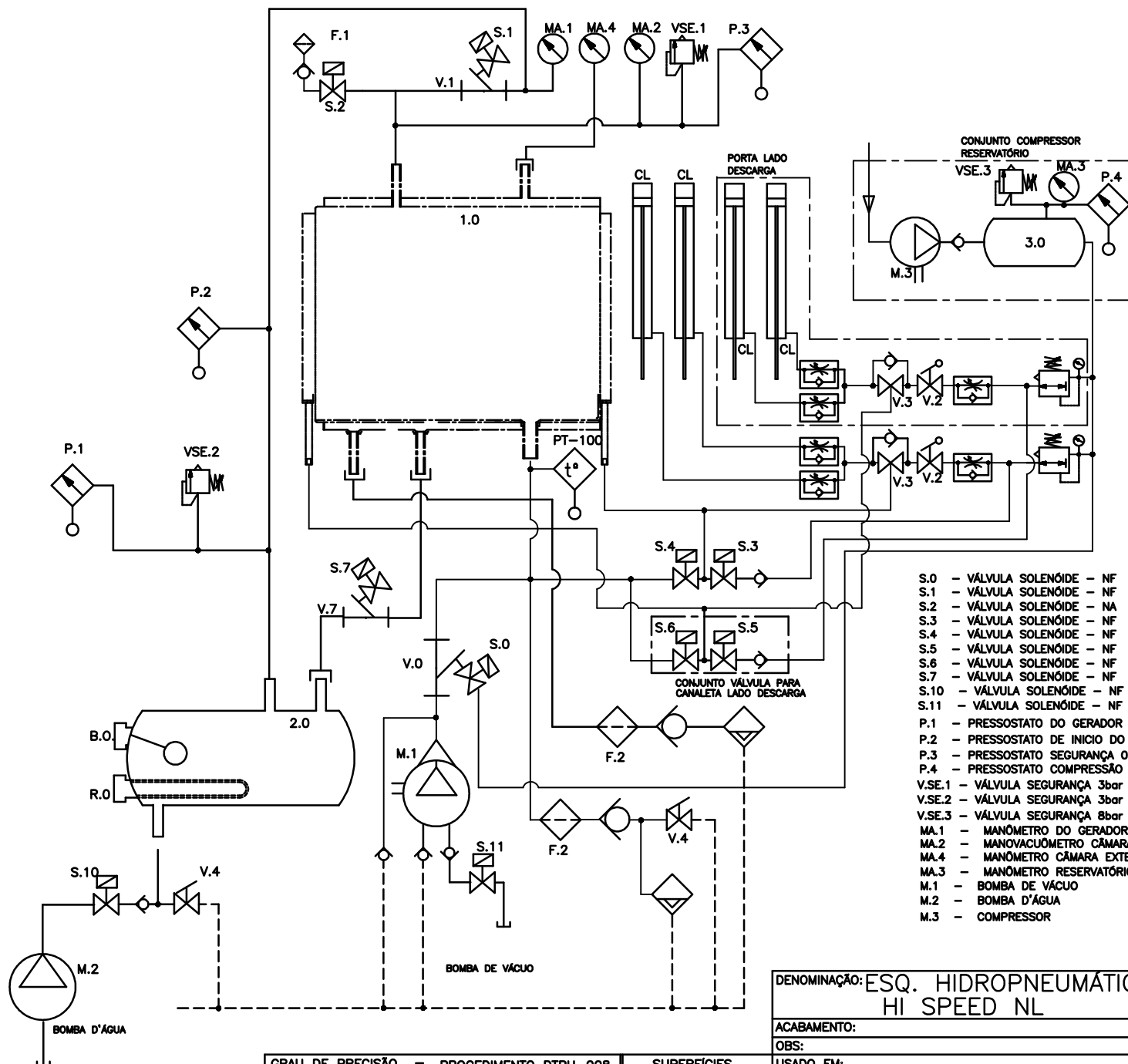


S.0 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
S.1 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
S.2 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NA
S.3 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
S.4 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
S.5 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
S.6 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
S.7 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
S.10 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
S.11 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
P.1 - PRESSOSTATO DO GERADOR 1,5bar
P.2 - PRESSOSTATO DE INÍCIO DO CICLO
P.3 - PRESSOSTATO SEGURANÇA 0,2
P.4 - PRESSOSTATO COMPRESSÃO 6bar
V.SE.1 - VÁLVULA SEGURANÇA 3bar
V.SE.2 - VÁLVULA SEGURANÇA 3bar
V.SE.3 - VÁLVULA SEGURANÇA 8bar
MA.1 - MANÔMETRO DO GERADOR
MA.2 - MANOVACUÔMETRO CÂMARA INTERNA
MA.4 - MANÔMETRO CÂMARA EXTERNA
MA.3 - MANÔMETRO RESERVATÓRIO AR
M.1 - BOMBA DE VÁCUO
M.2 - BOMBA D'ÁGUA
M.3 - COMPRESSOR

R.0 - RESISTÊNCIA
B.0 - BÓIA DE NÍVEL
PT-100 - SENSOR TEMPERATURA
CL - CILINDRO PNEUMÁTICO
V.0 - VÁLVULA PNEUMÁTICA NA
V.1 - VÁLVULA PNEUMÁTICA NF
V.2 - VÁLVULA PNEUMÁTICA SELETORA
V.3 - VÁLVULA PNEUMÁTICA PILOTADA
V.4 - VÁLVULA ESFERA
V.7 - VÁLVULA PNEUMÁTICA NF
◊ - VÁLVULA RETENÇÃO
◊ - F.1 - FILTRO AR
◊ - F.2 - FILTRO VAPOR
◊ - PURGADOR
◊ - REGULADOR DE FLUXO
◊ - REGULADOR DE PRESSÃO
1.0 - ESTERILIZADOR
2.0 - GERADOR DE VAPOR
3.0 - RESERVATÓRIO DE AR

DENOMINAÇÃO: ESQ. HIDROPNEUMÁTICO HI SPEED NL		MATERIAL:		N:	
ACABAMENTO:		DIMENSÃO:		PESO:	
OBS:		TRATAMENTO:		SUBSTITUI:	
USADO EM:		DES:RILDO		SUB LETRA	
CONF:		ESCALA:		CÓDIGO	
APROV:				H1-LAC	

GRAU DE PRECISÃO = PROCEDIMENTO DTBH-008		SUPERFÍCIES	
MÉDIO (m)	USINAGEM	limpo em bruto	
GROSSO (g)	FURADEIRA/CORTE/ESTAMPARIA/VIRADEIRA	desbastado	
MUITO GROSSO (mg)	CALDEIRARIA / SOLDA	alisado	
		polido	



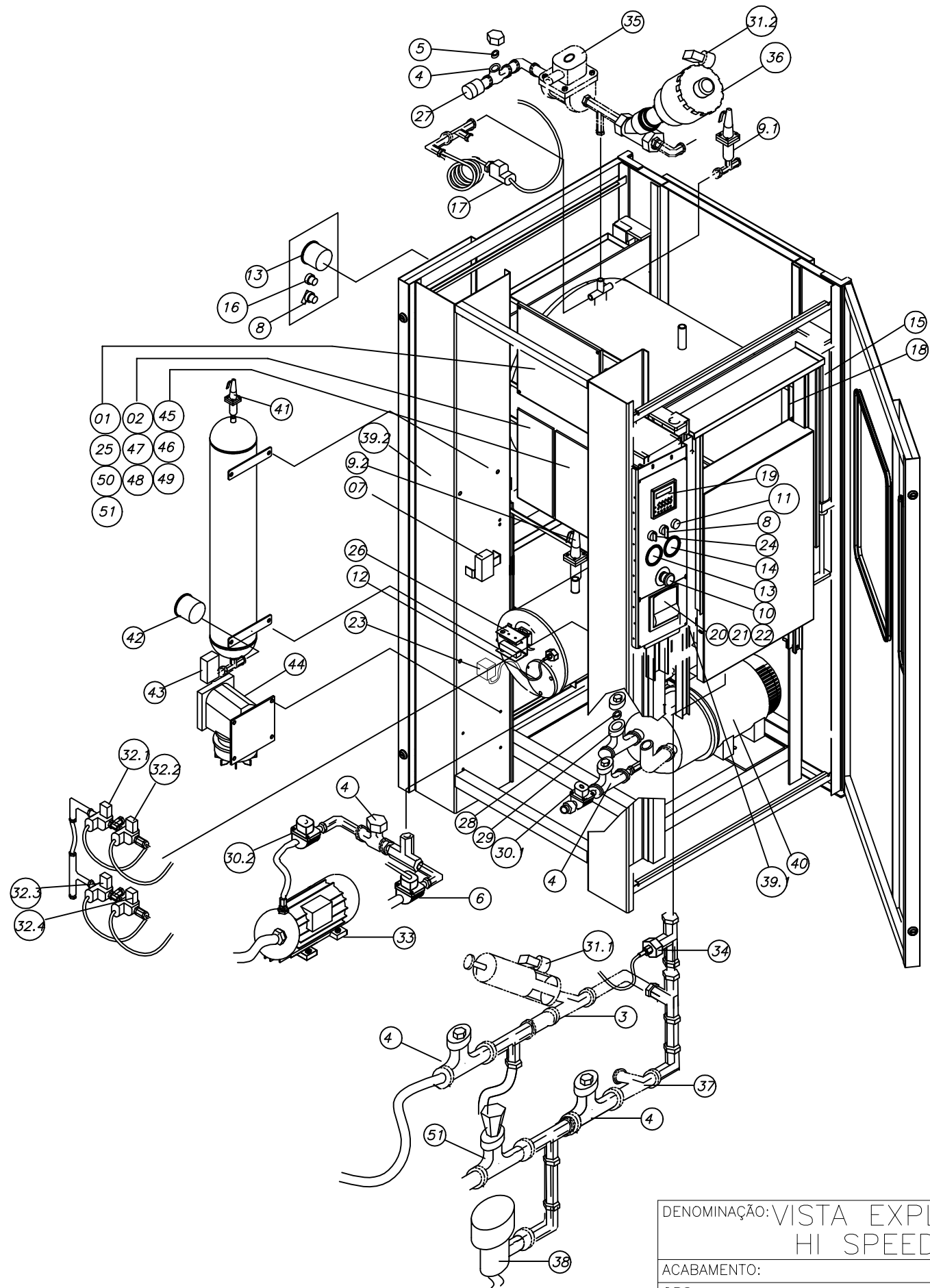

DENOMINAÇÃO: VISTA EXPLODIDA HI SPEED NL			MATERIAL:		N:	
ACABAMENTO:			DIMENSÃO:			
OBS:			TRATAMENTO:		PESO:	
USADO EM:			SUBSTITUI:		SUB	
			SUB LETRA			
			CÓDIGO		V1 – LAC	

GRAU DE PRECISÃO = PROCEDIMENTO DTBH-008	
MÉDIO (m)	USINAGEM
GROSSO (g)	FURADEIRA/CORTE/ESTAMPARIA/VIRADEIRA
MUITO GROSSO (mg)	CALDEIRARIA / SOLDA

SUPERFÍCIES	
~	limpo em bruto
▽	desbastado
▽▽	alisado
▽▽▽	polido



DES:RILDO	05/09/05
CONF:	
APROV:	

ESCALA:

EQUIPAMENTO: ESTERILIZADOR HI SPEED NX

ENTRADAS DIGITAIS

X1-9 - Relé da porta de carga (RL1)
X1-8 - Relé da porta de descarga (RL2)
X1-7 - Micro da porta de carga (MS1)
X1-6 - Micro da porta de descarga (MS2)
X1-5 - Pressostato segurança de vapor (P1)
X1-4 - Pressostato segurança de ar (P2)
X1-3 - Pressostato segurança de água (P3)
X1-2 - Configura leitura de temperatura

ENTRADAS ANALÓGICAS

X5-4 - Sensor PT-100 de controle (TCI)
X5-6 - Sensor PT-100 testemunho (TTS)
X5-7 - Transdutor de pressão da C.I. (PCI)
X5-8 - Transdutor de pressão da C.E. (PCE)

SAÍDAS DIGITAIS

X1-1 - Válvula de vácuo na C.I. (S0)
X2-8 - Bomba de vácuo (C3)
X2-7 - Válvula de vapor na C.I. (S1)
X2-6 - Válvula de ar na C.I. (S2)
X2-5 - Válvula de vapor para líquidos (S8)
X2-4 - Válvula de vapor na C.E. (S0)
X2-3 - Alarme (AL1)
X2-2 - Controle das portas (RL9)



DATA:

DES: RIBEIRO
CONF: CANATTO
APROV: KOSEKI

DESENHO ELÉTRICO

Substitui: ee893813 Sub: B
SUB LETRA A B C

NÚMERO DE PÁGINAS: 10

FOLHA:


CAPA

CÓDIGO:

ee893813

SUB-A: ADAPTAÇÃO PARA O CLP ZAP-900
 SUB-B: INCLUSÃO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA
 SUB-C: INCLUSÃO PRESSOSTATOS DE SUPRIMENTOS (OPCIONAL)

SUB-D:
 SUB-E:
 SUB-F:

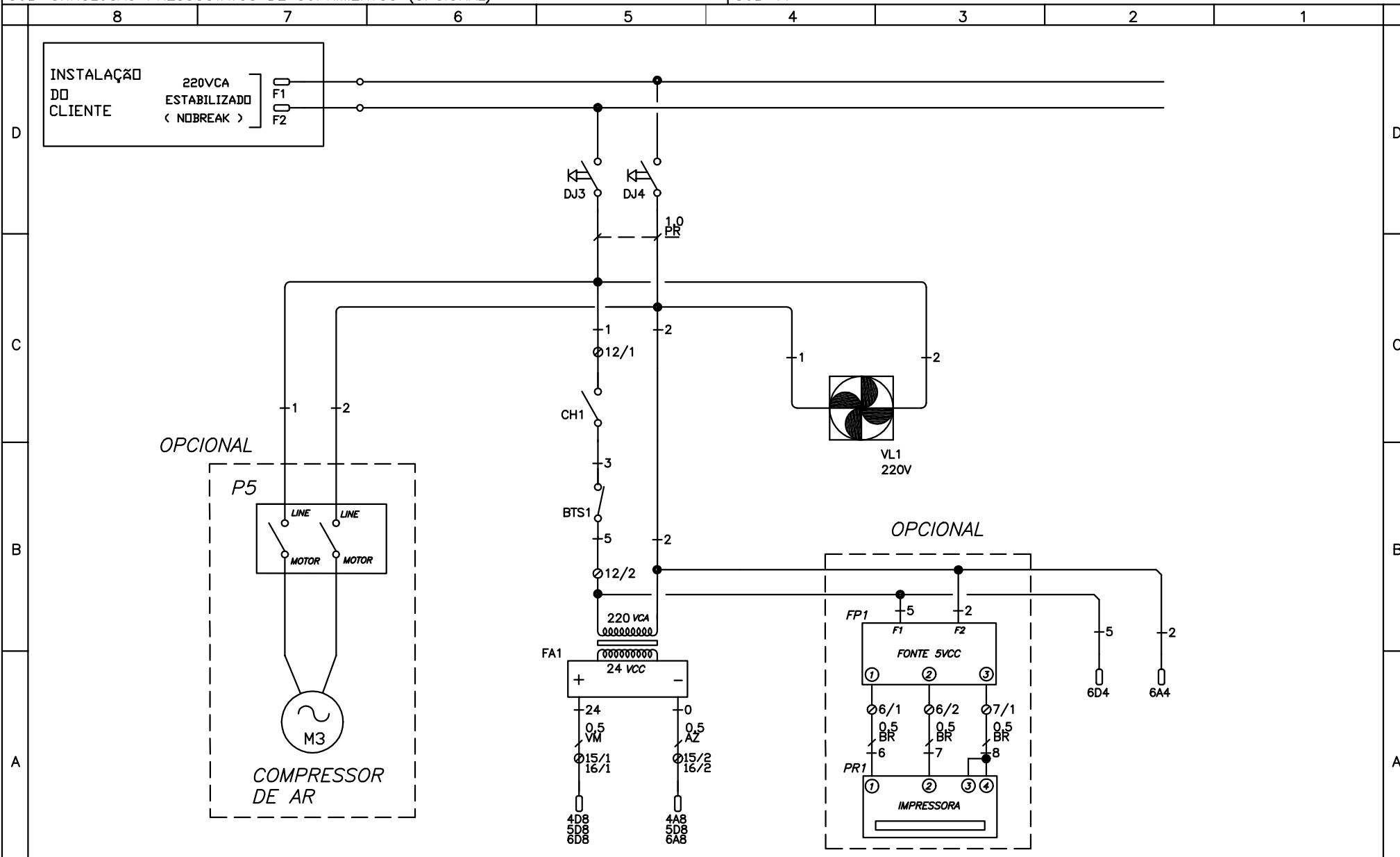

DENOMINAÇÃO: Circuito das fontes de alimentação

DES: RIBEIRO

CONF: CANATTO

APROV: KOSEKI

Substitui: ee893813

Sub: B

FOLHA:


1/10

CÓDIGO:

ee893813

SUB-A: ADAPTAÇÃO PARA O CLP ZAP-900
 SUB-B: INCLUSÃO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA
 SUB-C: INCLUSÃO PRESSOSTATOS DE SUPRIMENTOS (OPCIONAL)

SUB-D:
 SUB-E:
 SUB-F:

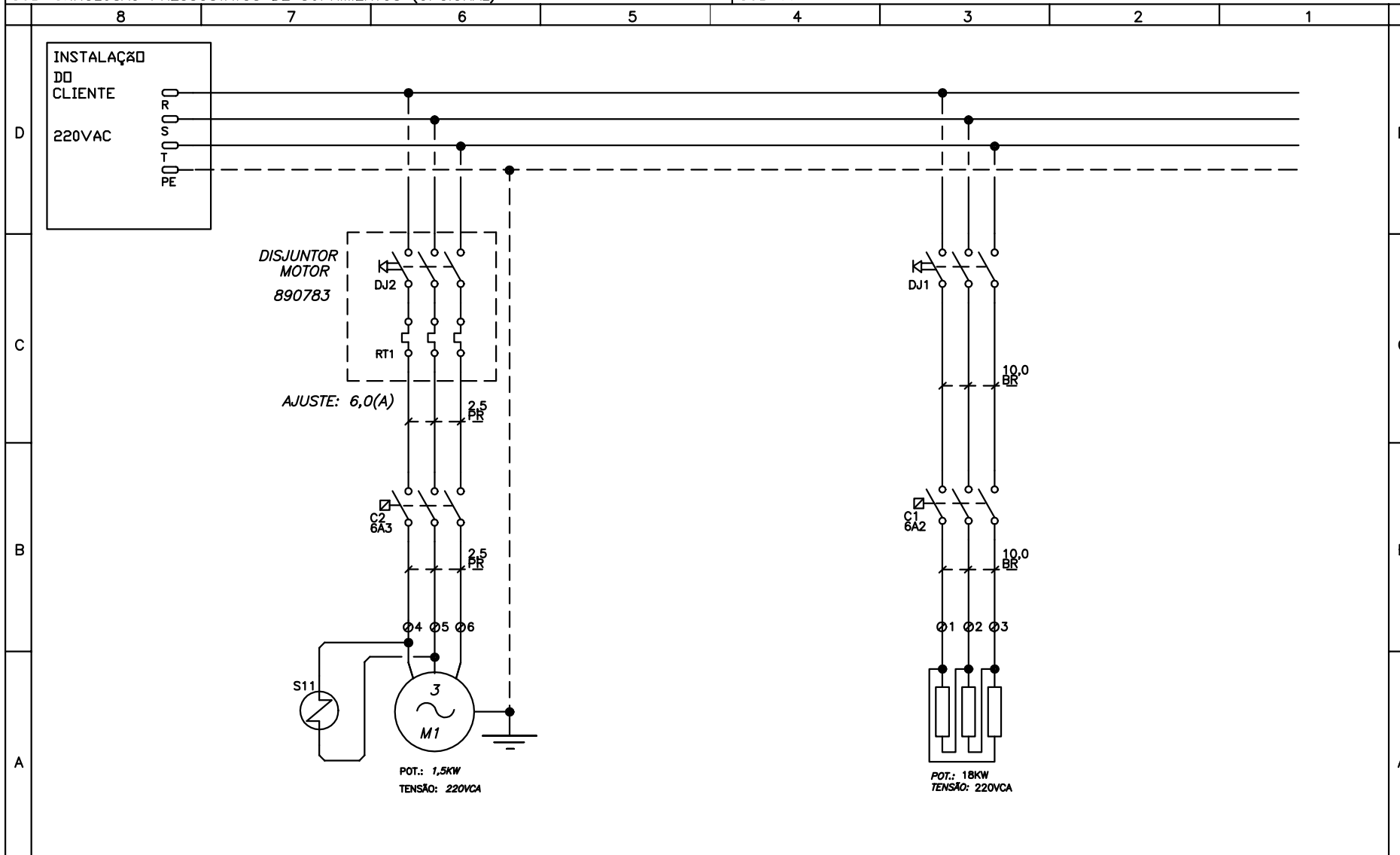

DENOMINAÇÃO: Circuito de potência para 220 VCA

DES: RIBEIRO

CONF: CANATTO

APROV: KOSEKI

Substitui: ee893813

Sub: B

FOLHA:


2/10

CÓDIGO:

ee893813

SUB-A: ADAPTACAO PARA O CLP ZAP-900
 SUB-B: INCLUSAO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA
 SUB-C: INCLUSAO PRESSOSTATOS DE SUPRIMENTOS (OPCIONAL)

SUB-D:
 SUB-E:
 SUB-F:

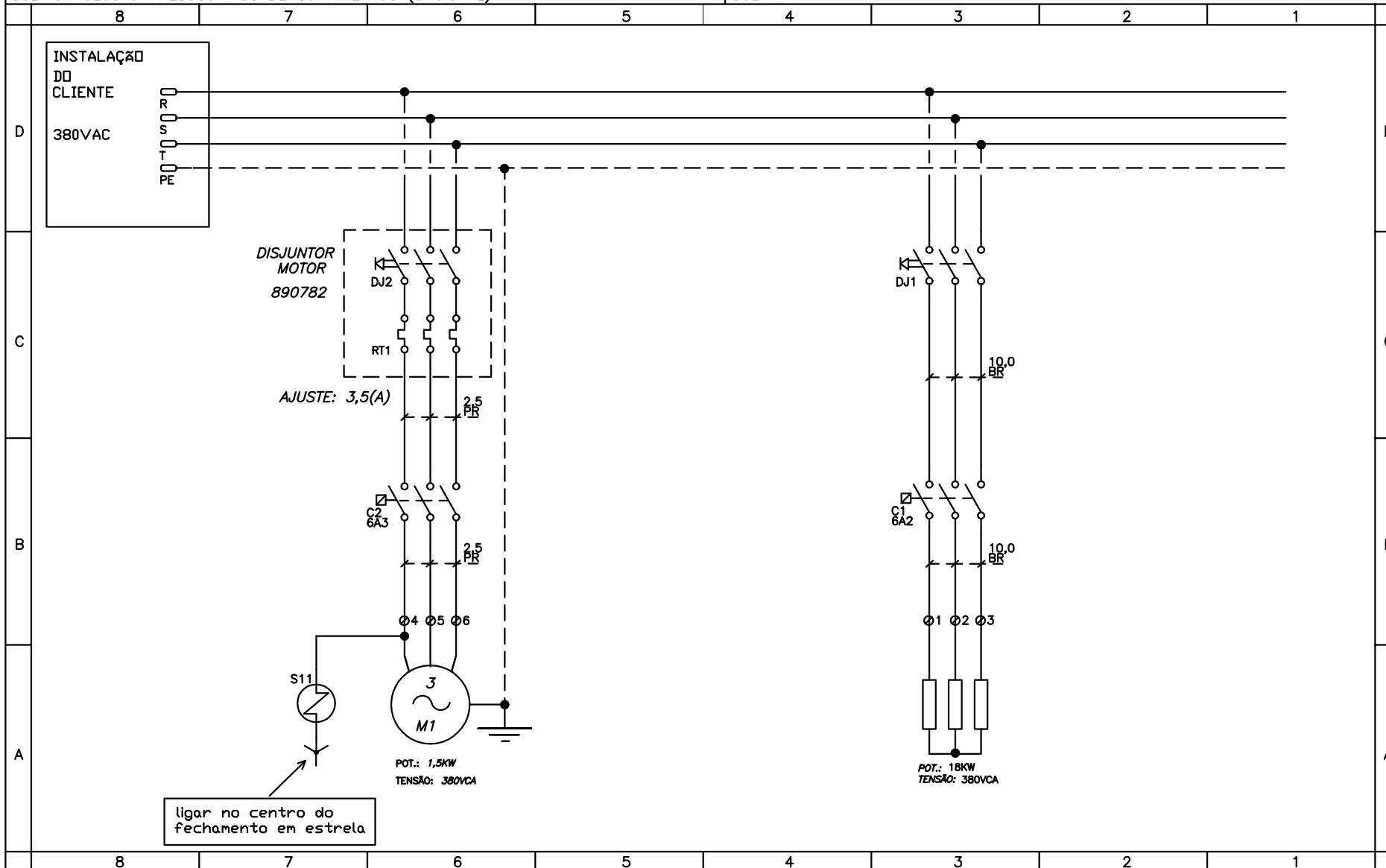

DENOMINAÇÃO: Circuito de potência para 380 VCA

DES: RIBEIRO

CONF: CANATTO

APROV: KOSEKI

Substitui: ee893813

Sub: B

FOLHA:


3/10

CÓDIGO:

ee893813

SUB-A: ADAPTAÇÃO PARA CLP ZAP-900
SUB-B: INCLUSÃO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA
SUB-C: INCLUSÃO PRESSOSTATOS DE SUPRIMENTOS (OPCIONAL)

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

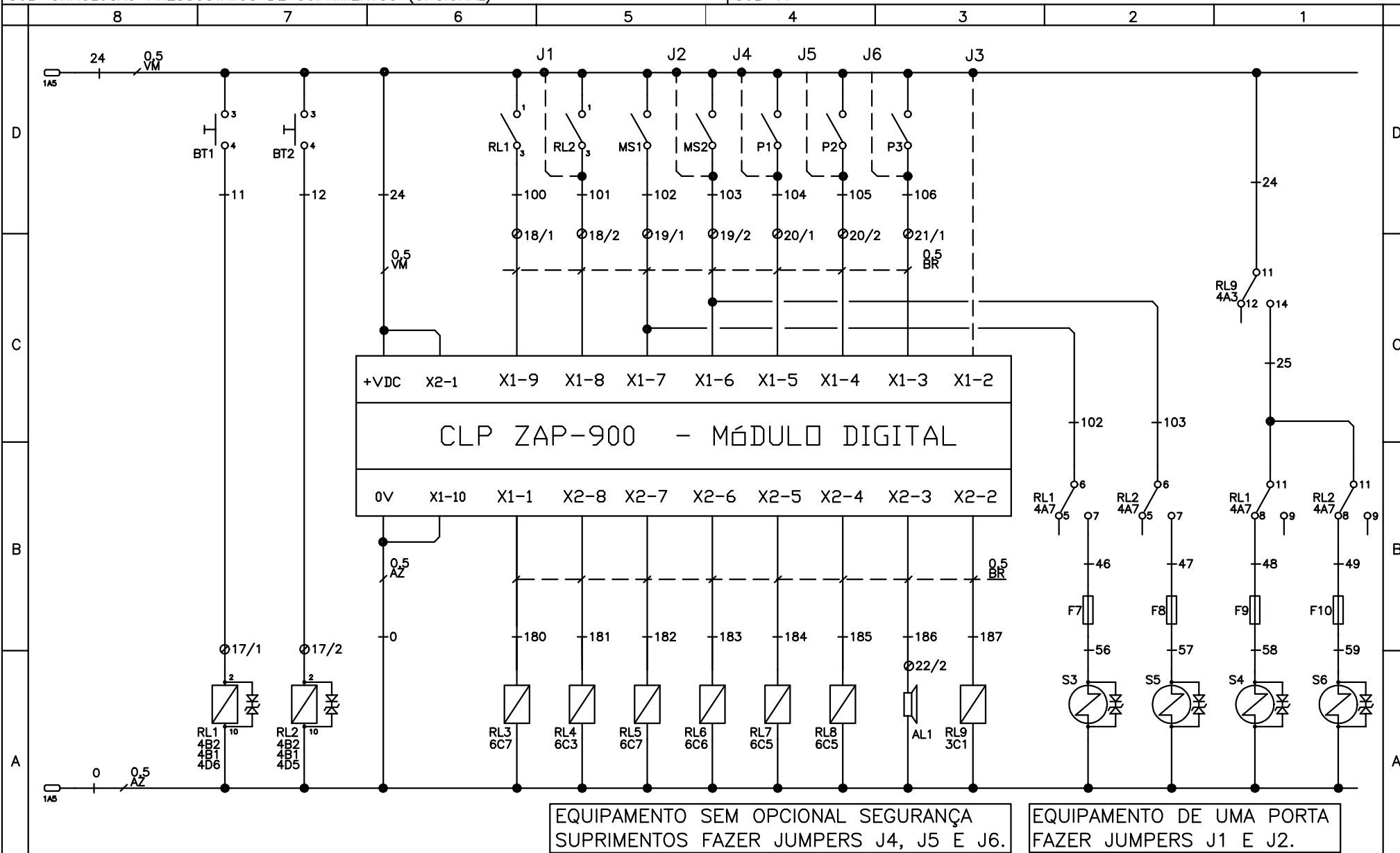

DENOMINAÇÃO: Circuito de entradas e saídas digitais

DES: RIBEIRO

CONF: CANATTO

APROV: KOSEKI

Substitui: ee893813

Sub: B

FOLHA:


4/10

CÓDIGO:

ee893813

SUB-A: ADAPTAÇÃO PARA CLP ZAP-900
SUB-B: INCLUSÃO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA
SUB-C: INCLUSÃO PRESSOSTATOS DE SUPRIMENTOS (OPCIONAL)

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

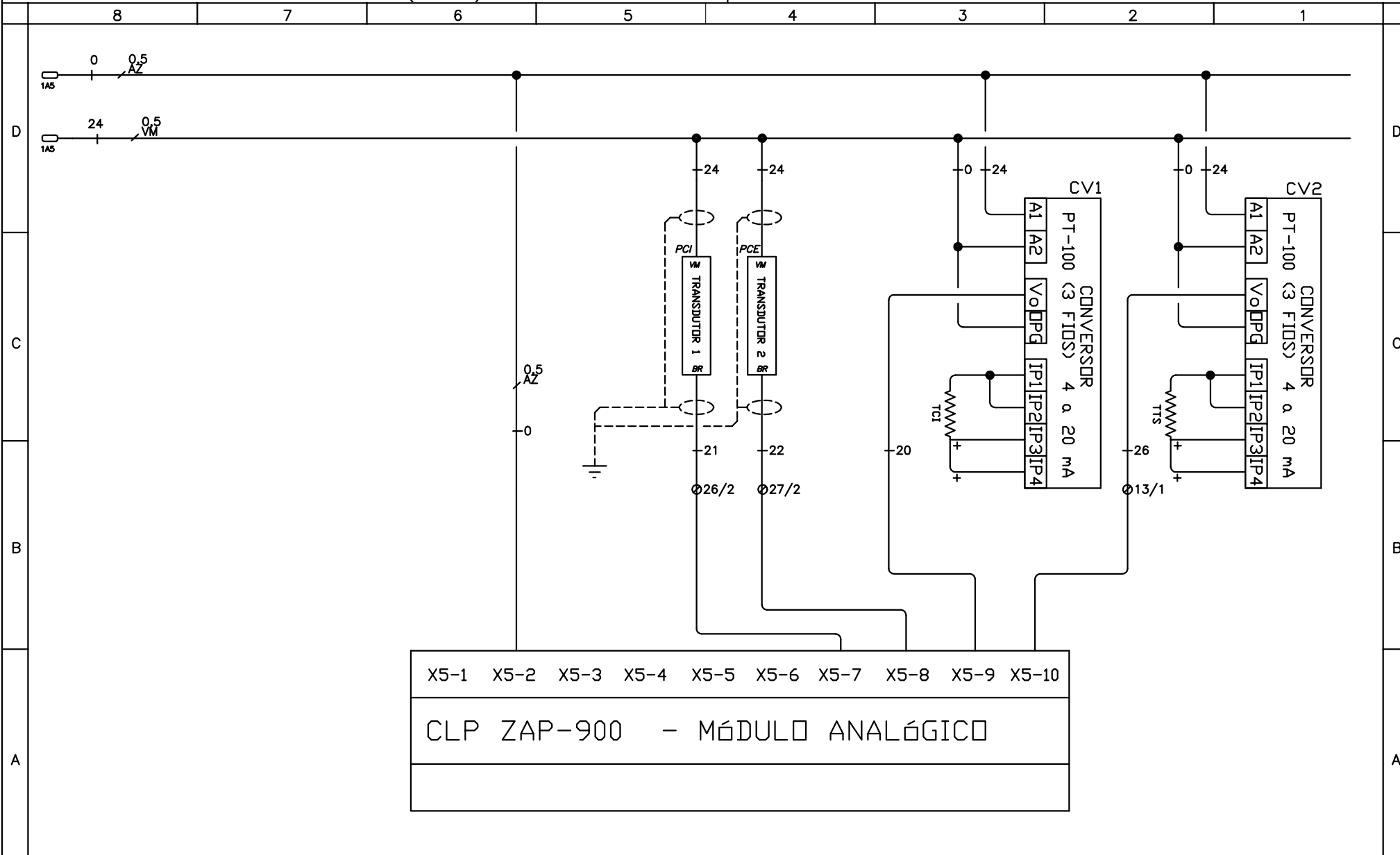

DENOMINAÇÃO: Circuito de entradas analógicas

DES: RIBEIRO

CONF: CANATTO

APROV: KOSEKI

Substitui: ee893813

Sub: B

FOLHA:


5/10

CÓDIGO:

ee893813

SUB-A: ADAPTACAO PARA O CLP ZAP-900
 SUB-B: INCLUSAO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA
 SUB-C: INCLUSAO PRESSOSTATOS DE SUPRIMENTOS (OPCIONAL)

SUB-D:
 SUB-E:
 SUB-F:

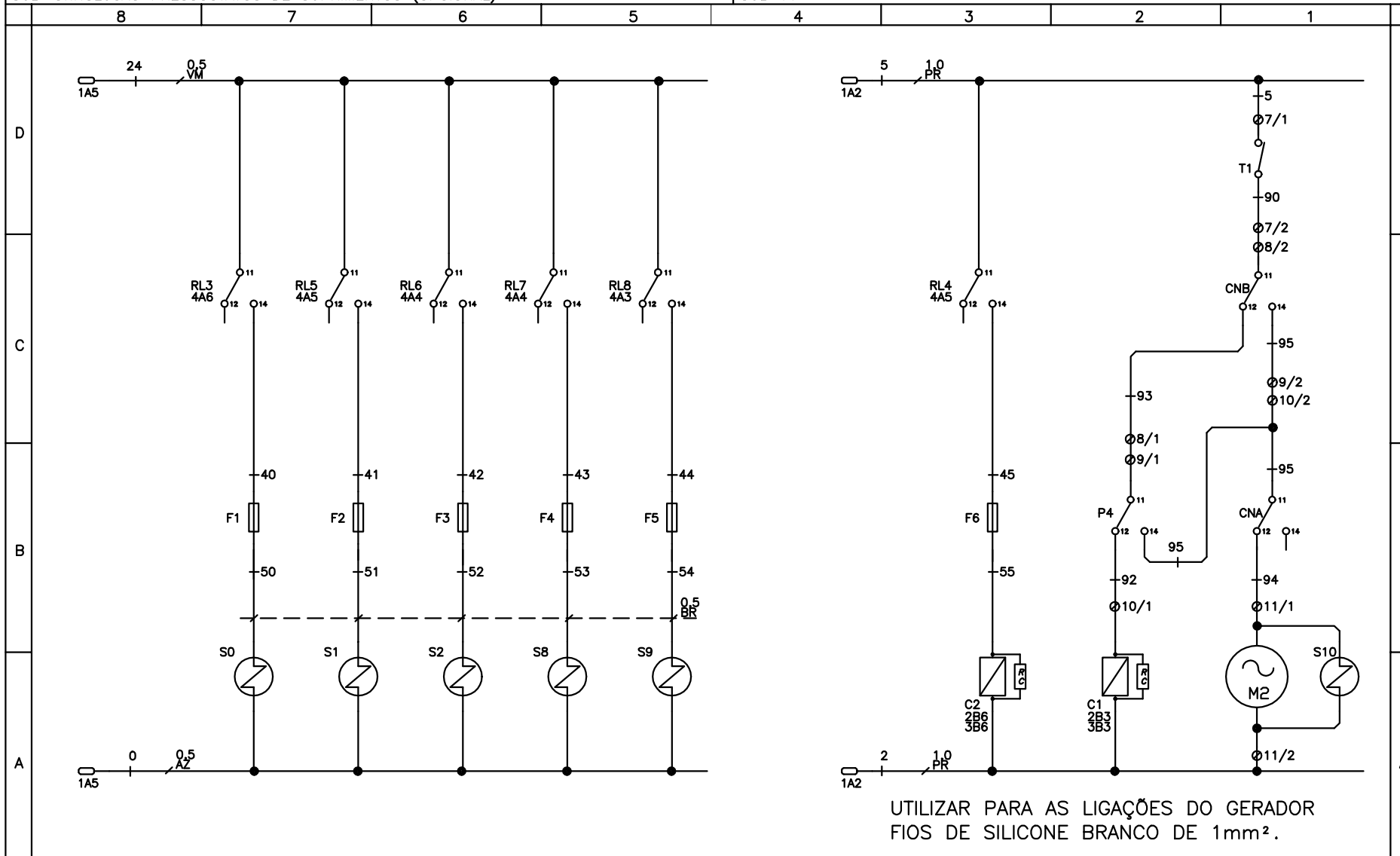

DENOMINAÇÃO: Acoplamento para as saídas e gerador

DES: RIBEIRO
 CONF: CANATTO
 APROV: KOSEKI

Substitui: ee893813
 SUB
 LETRA


Sub: B

FOLHA:


6/10

CÓDIGO:


ee893813

SUB-A: ADAPTACAO PARA O CLP ZAP-900					SUB-D:										
SUB-B: INCLUSAO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA					SUB-E:										
SUB-C: INCLUSAO PRESSOSTATOS DE SUPRIMENTOS (OPCIONAL)					SUB-F:										
8		7		6		5		4		3		2		1	
D	DJ1	Disjuntor trifásico para a resistência - 88456			F1 a F10		Fusíveis de proteção (0,5A) - 87756			D					
	DJ2	Disjuntor motor da bomba de vácuo (vide pg. 02 e 03)			AL1		Campainha para alarme - 88027								
	DJ3/DJ4	Disjuntores monopolares para o comando - 891149			PCI		Transdutor de pressão da câmara interna								
	CH1	Chave liga/desliga - 88256			PCE		Transdutor de pressão da câmara externa								
	BST1	Botão de emergência - 98278			TTS		Conversor PT-100 para 4 a 20mA - 89964								
C	FA1	Fonte de alimentação 24Vcc 3A - 891684			TCI		Sensor PT-100 de controle			C					
	FP1	Fonte para a impressora 5Vcc - 87763			S0		Válvula de vácuo na câmara interna								
	RT1	Bloco auxiliar disjuntor motor - 891848			S1		Válvula de vapor na câmara interna								
	C1	Contator para a resistência de 18kW - 47926			S2		Válvula de ar na câmara interna								
	C2	Contator para a bomba de vácuo - 47925			S3		Válvula de ar na canaleta de carga								
B	M1	Bomba de vácuo de 1,5 CV			S4		Válvula de vácuo na canaleta de carga			B					
	M2	Bomba de água do gerador			S5		Válvula de ar na canaleta de descarga								
	BT1	Botão para a porta de carga - 890827			S6		Válvula de vácuo na canaleta de descarga								
	BT2	Botão para a porta de descarga - 890827			S8		Válvula de vapor para o ciclo de líquidos								
	RL1	Relé para a porta de carga - 34156			S9		Válvula de vapor na câmara externa								
A	RL2	Relé para a porta de descarga - 34156			S10		Válvula de água para o gerador de vapor			A					
	MS1	Micro da porta de carga			S11		Válvula de água para a bomba de vácuo								
	MS2	Micro da porta de descarga			CNB		Nível baixo da bôia de controle de água								
	P5	Pressostato compressor de ar			CNA		Nível alto da bôia de controle de água								
	RL3 a RL9	Relé de acoplamento das saídas - 55291			T1		Termostato de segurança do gerador								
8		7		6		5		4		3		2		1	
		DENOMINAÇÃO: Descrição dos componentes										CÓDIGO: ee893813			
		DES: RIBEIRO			Substitui: ee893813			Sub: B		FOLHA: 7/10					
		CONF: CANATTO			SUB LETRA		A B C								
		APROV: KOSEKI													

SUB-D:	
SUB-E:	
SUB-F:	

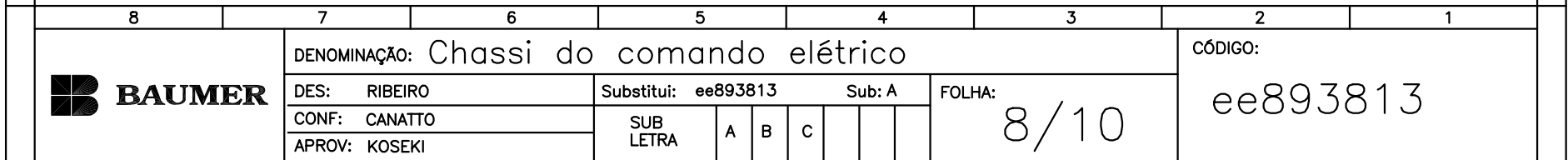


SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

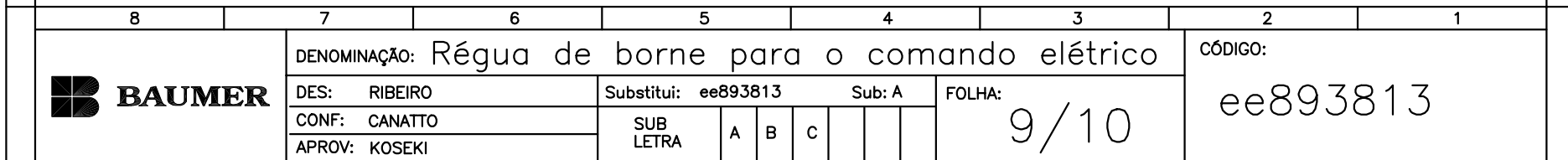

SUB-A: ADAPTACAO PARA O CLP ZAP-900
 SUB-B: INCLUSAO CONVERSOR PT-100 PARA 4 A 20mA
 SUB-C: INCLUSAO PRESSOSTATOS DE SUPRIMENTOS (OPCIONAL)

SUB-D:
 SUB-E:
 SUB-F:

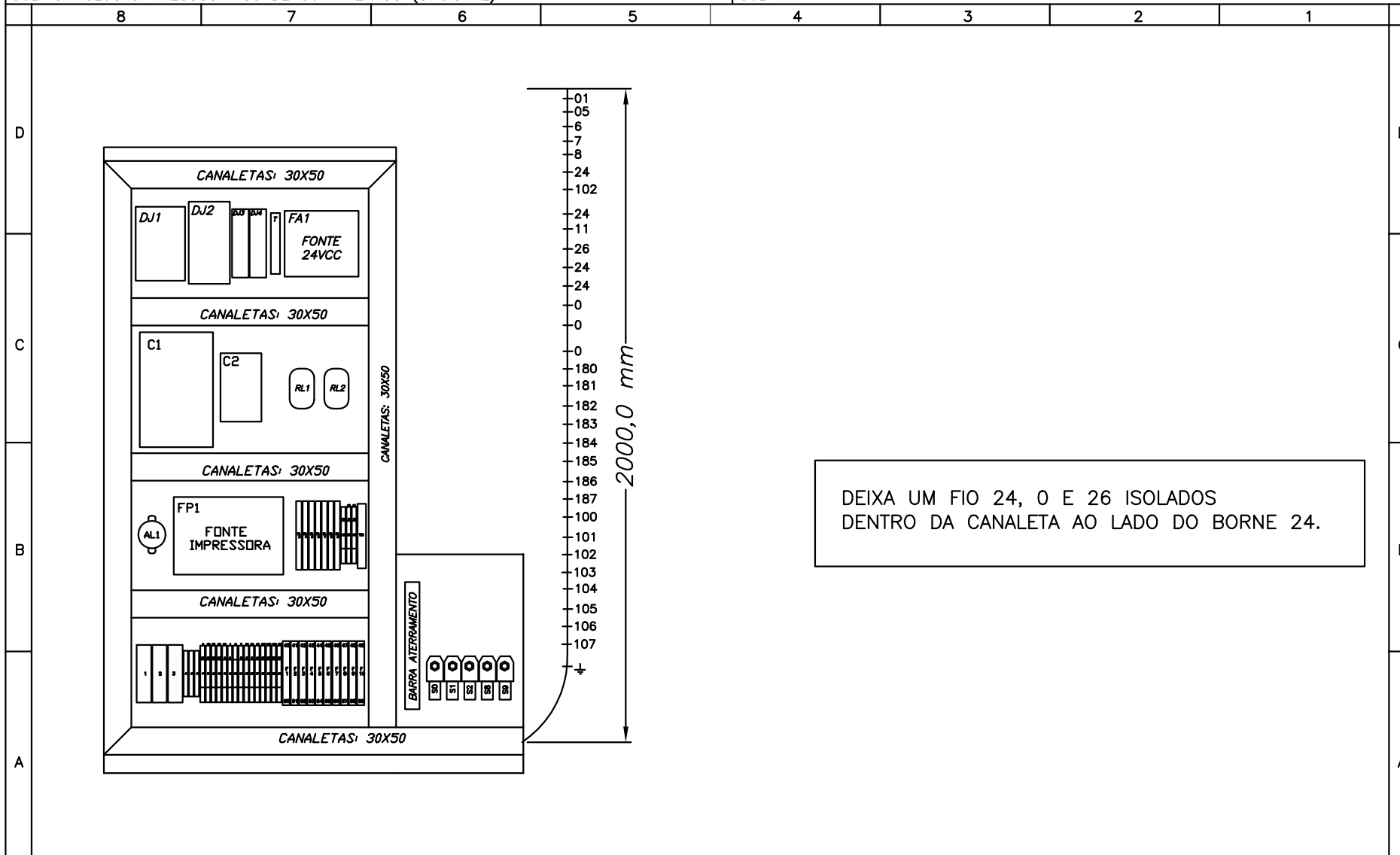

DENOMINAÇÃO: Chicote elétrico de ligação

DES: RIBEIRO

CONF: CANATTO

APROV: KOSEKI

Substitui: ee893813

Sub: A

FOLHA:

10/10

CÓDIGO:

ee893813

EQUIPAMENTO: ESTERILIZADOR HI SPEED 200/300/500 NX

ENTRADAS DIGITAIS

X1-9 - Relé da porta de carga (RL1)
X1-8 - Relé da porta de descarga (RL2)
X1-7 - Micro da porta de carga (MS1)
X1-6 - Micro da porta de descarga (MS2)
X1-5 - Pressostato segurança de vapor (P1)
X1-4 - Pressostato segurança de ar (P2)
X1-3 - Pressostato segurança de água (P3)
X1-2 - Configura leitura de temperatura

ENTRADAS ANALÓGICAS

X5-4 - Sensor PT-100 de controle (TCI)
X5-6 - Sensor PT-100 testemunho (TTS)
X5-7 - Transdutor de pressão da C.I. (PCI)
X5-8 - Transdutor de pressão da C.E. (PCE)

SAÍDAS DIGITAIS

X1-1 - Válvula de vácuo na C.I. (S0)
X2-8 - Bomba de vácuo (C3)
X2-7 - Válvula de vapor na C.I. (S1)
X2-6 - Válvula de ar na C.I. (S2)
X2-5 - Válvula de vapor para líquidos (S8)
X2-4 - Válvula de vapor na C.E. (S0)
X2-3 - Alarme (AL1)
X2-2 - Controle das portas (RL9)



DATA:

DES: MARQUEZINI

CONF: RIBEIRO

APROV: KOSEKI

DESENHO ELÉTRICO

Substitui:

Sub:

SUB
LETRA

NÚMERO DE PÁGINAS: 10

FOLHA:


CAPA

CÓDIGO:

ee898460

SUB-A:
SUB-B:
SUB-C:

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

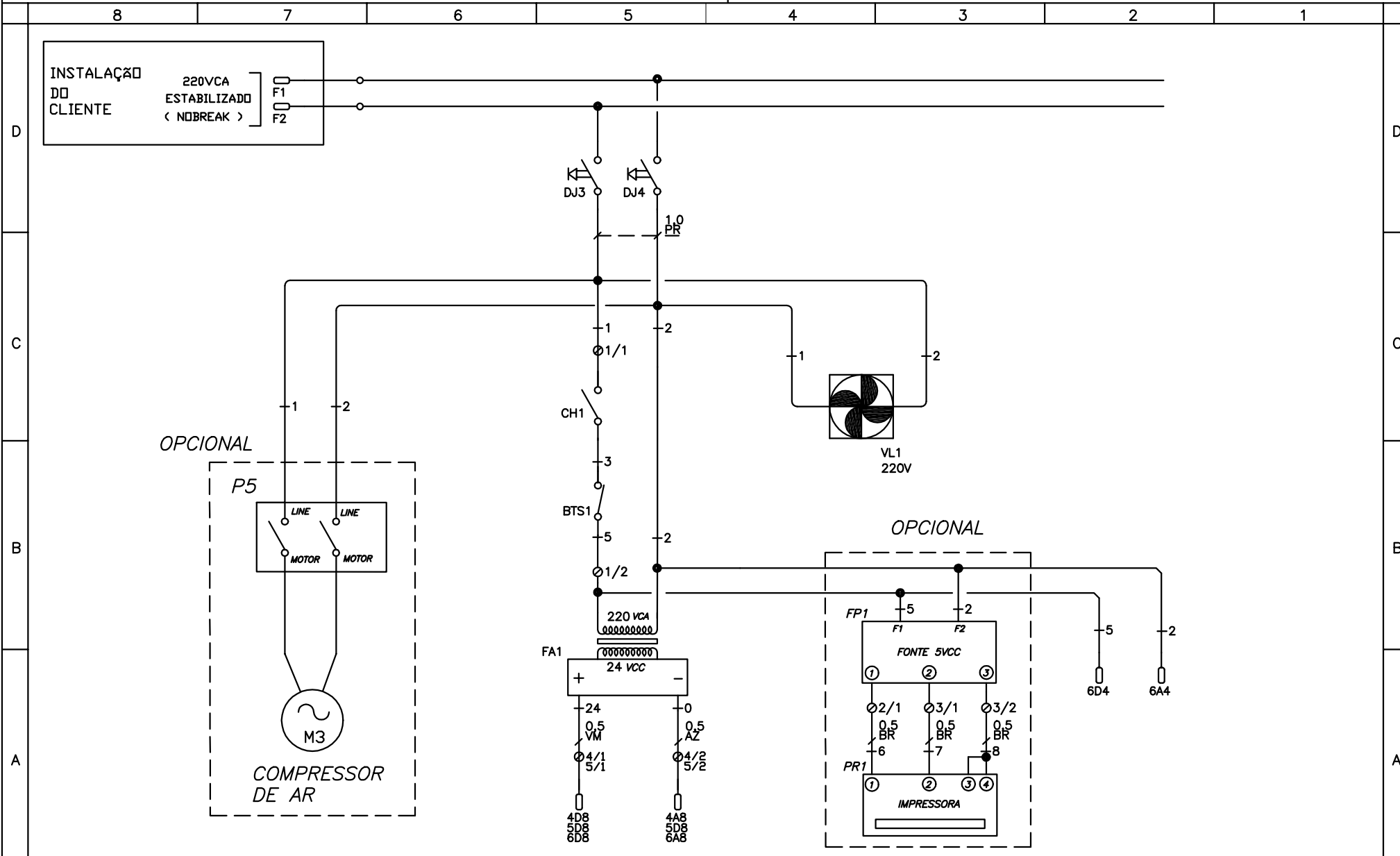

DENOMINAÇÃO: Circuito das fontes de alimentação

DES: MARQUEZINI

CONF: CANATTO

APROV: KOSEKI

Substitui:

SUB

LETRA


Sub:


FOLHA:


1/10

CÓDIGO:

ee898460

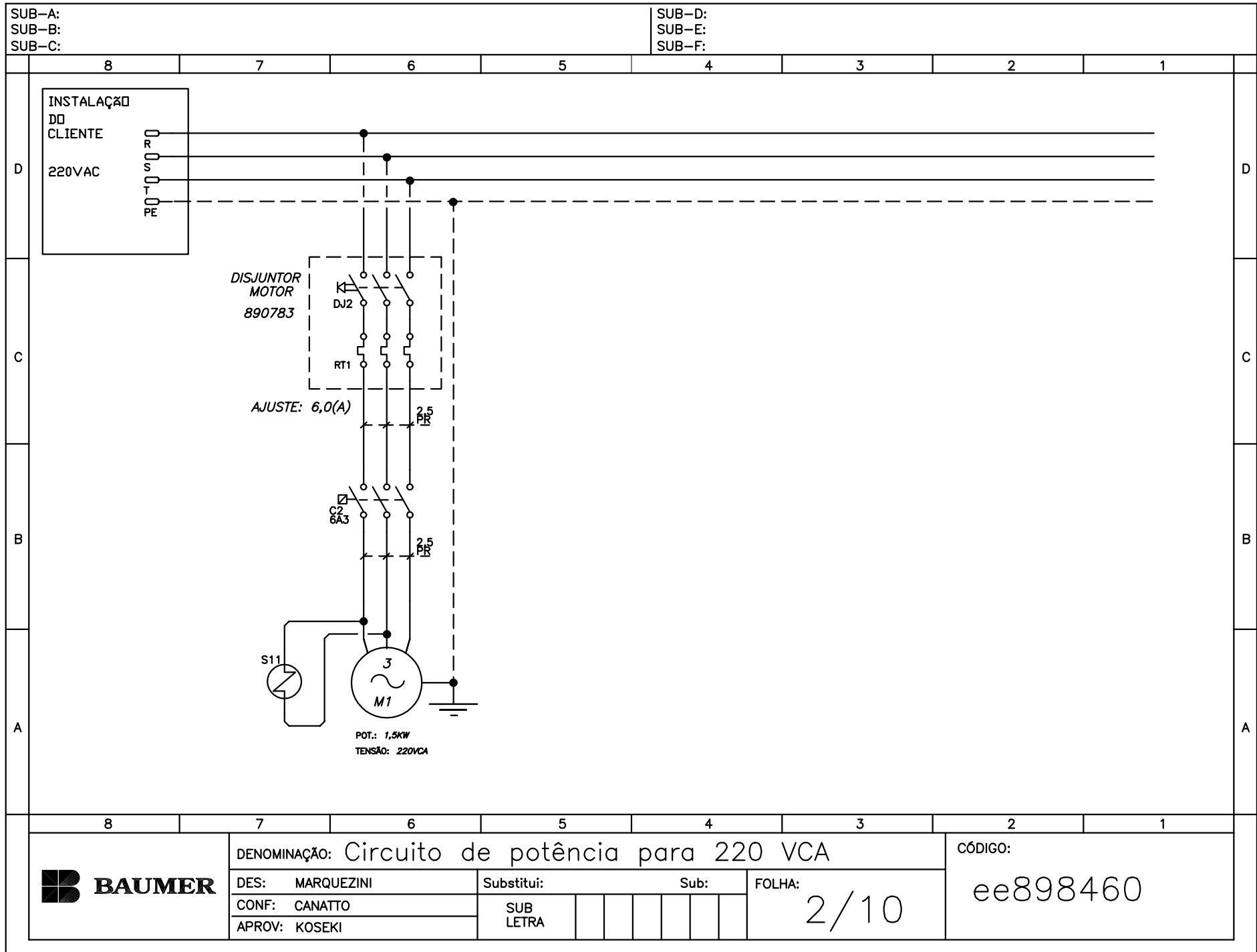


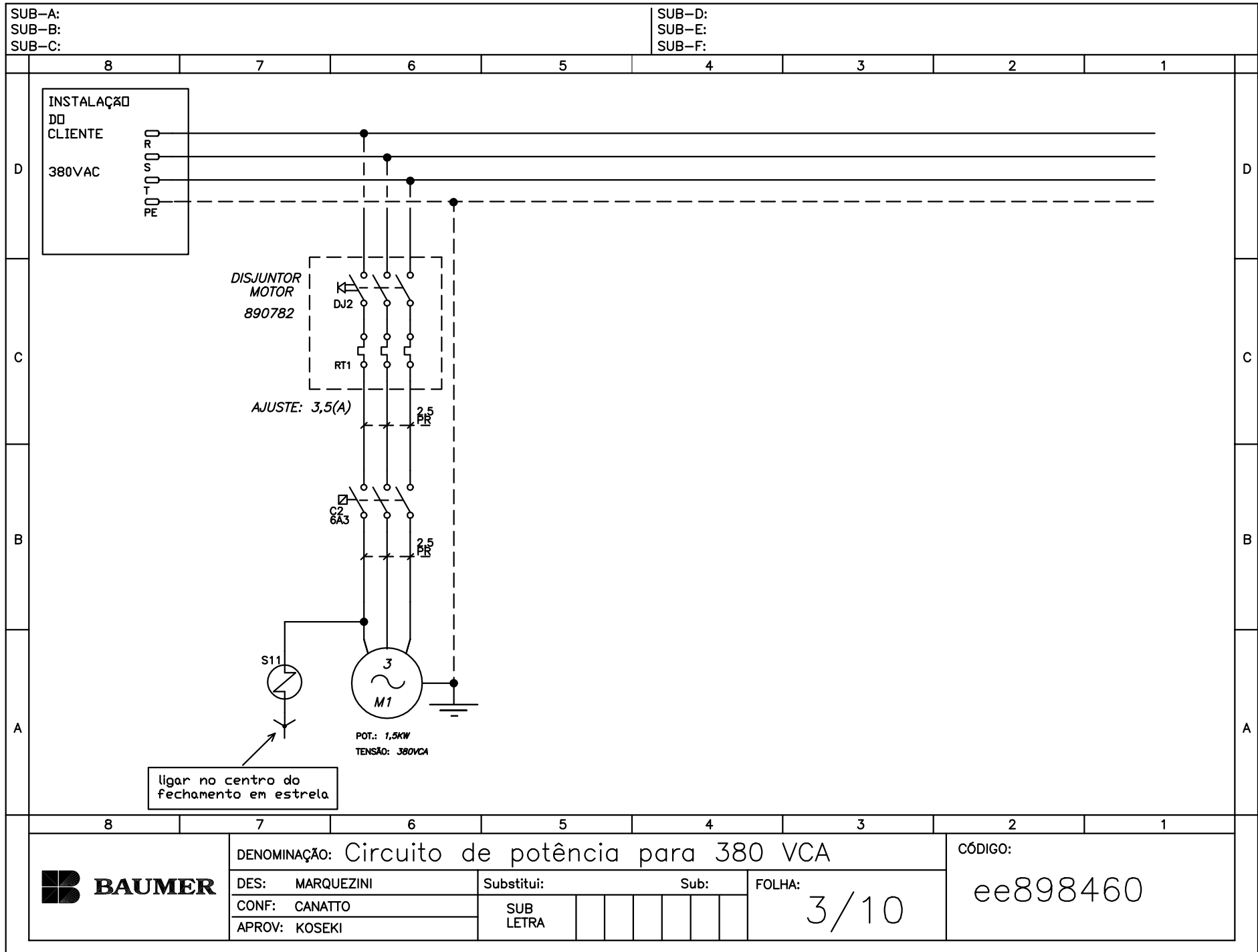

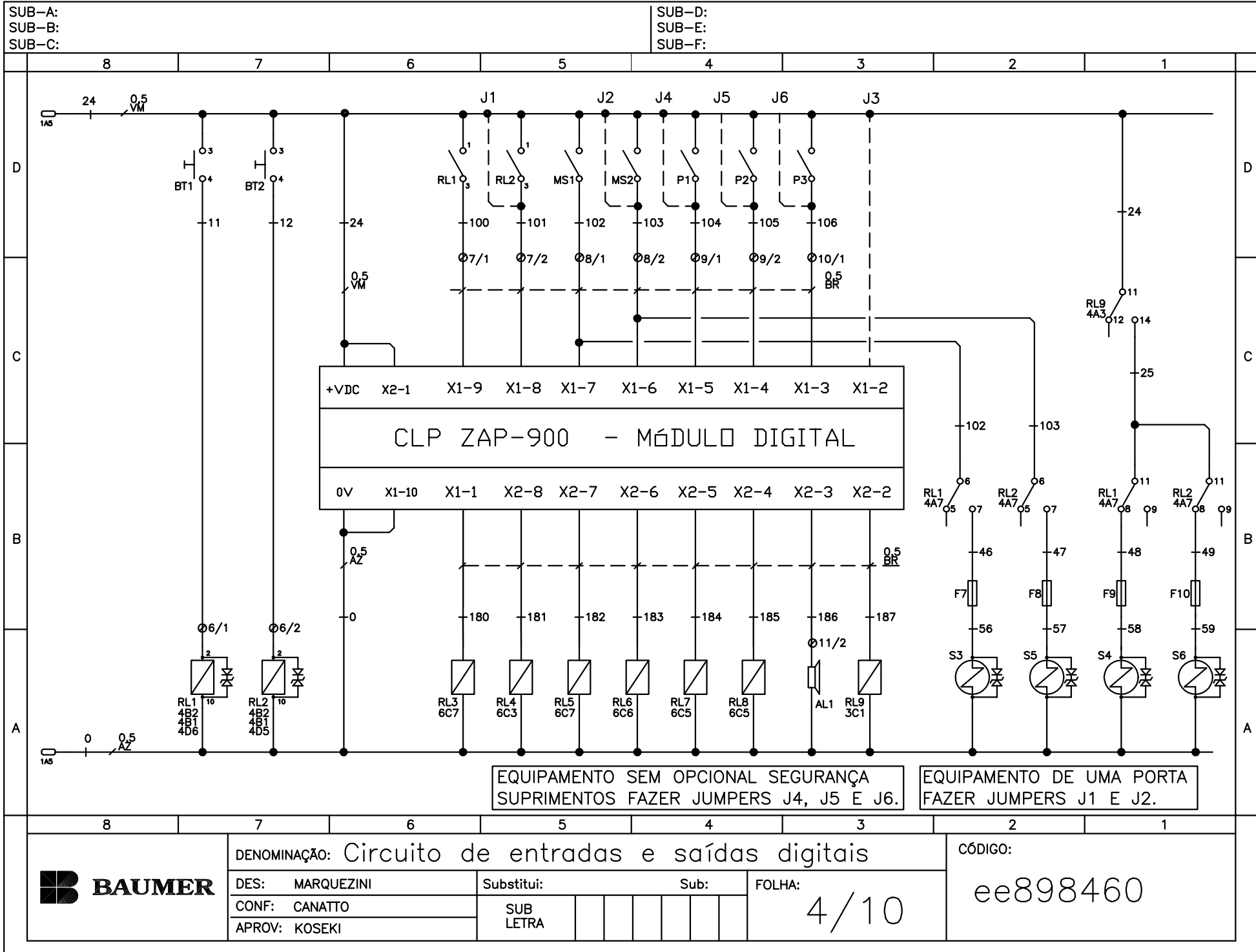

SUB-A:
SUB-B:
SUB-C:

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

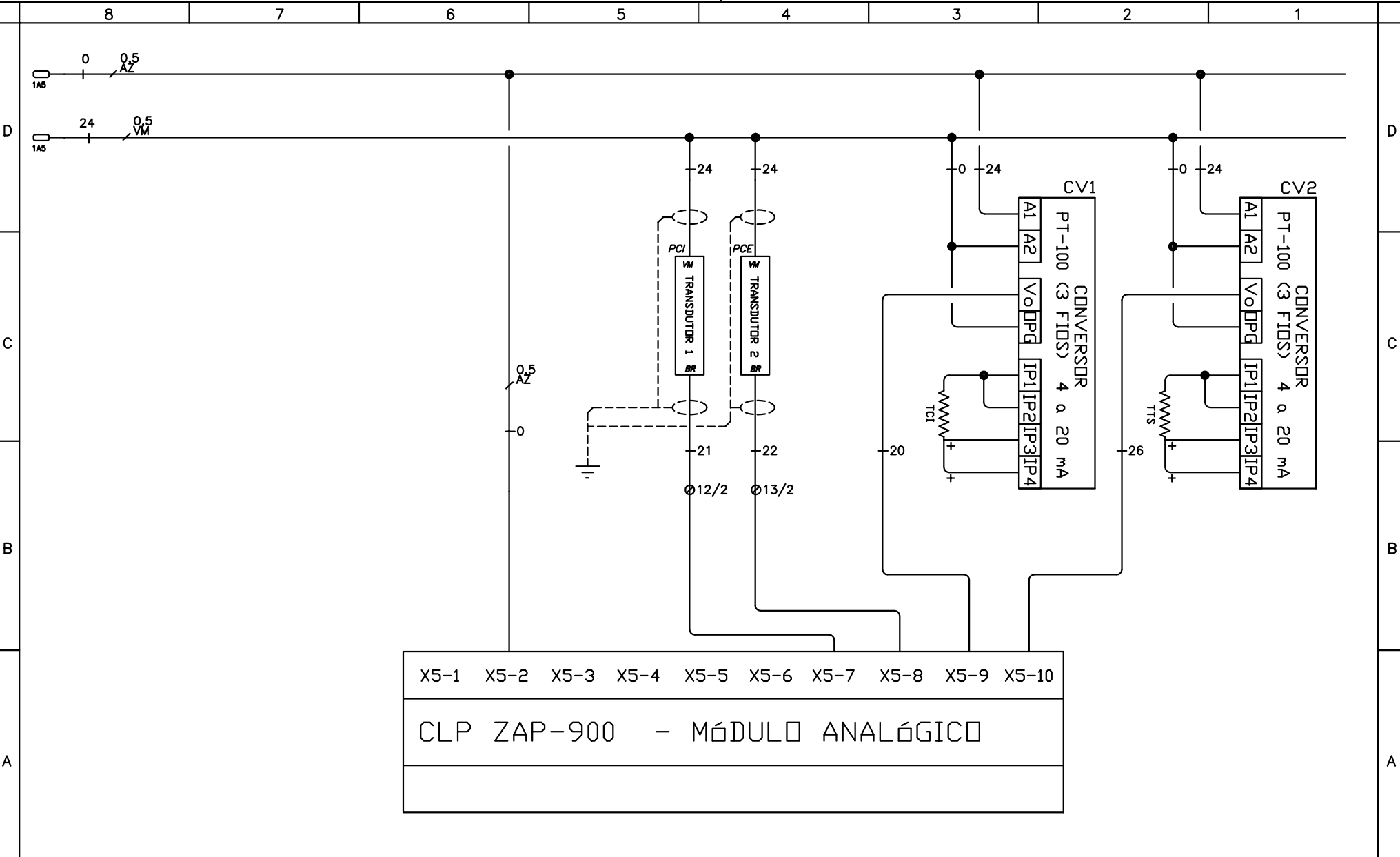

X5-1	X5-2	X5-3	X5-4	X5-5	X5-6	X5-7	X5-8	X5-9	X5-10
CLP ZAP-900 - MÓDULO ANALÓGICO									



DENOMINAÇÃO: Circuito de entradas analógicas

DES: MARQUEZINI
CONF: CANATTO
APROV: KOSEKI


Substitui: Sub:
SUB
LETRA

FOLHA:
5/10

CÓDIGO:
ee898460

SUB-A:
SUB-B:
SUB-C:

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

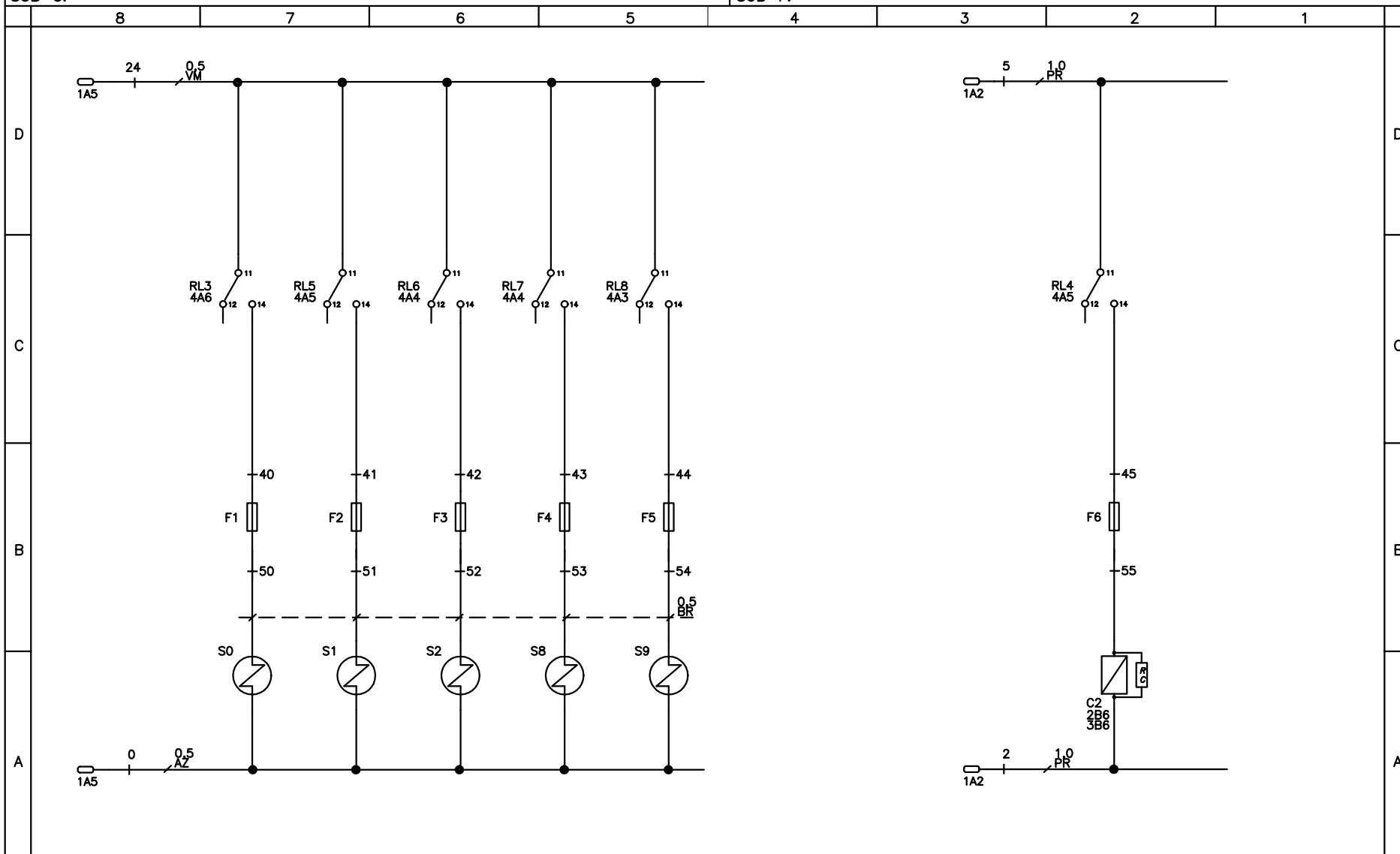

DENOMINAÇÃO: Acoplamento para as saídas e gerador

DES: MARQUEZINI

CONF: CANATTO

APROV: KOSEKI

Substitui:

SUB
LETRA


Sub:

FOLHA:

6/10


CÓDIGO:

ee898460

SUB-A: SUB-B: SUB-C:				SUB-D: SUB-E: SUB-F:											
8		7		6		5		4		3		2		1	
D								F1 a F10	Fusíveis de proteção (0,5A) – 87756						D
	DJ2	Disjuntor motor da bomba de vácuo (vide pg. 02 e 03)						AL1	Campainha para alarme – 88027						
	DJ3/DJ4	Disjuntores monopolares para o comando – 891149						PCI	Transdutor de pressão da câmara interna						
	CH1	Chave liga/desliga – 88256						PCE	Transdutor de pressão da câmara externa						
	BST1	Botão de emergência – 98278						TTS	Conversor PT-100 para 4 a 20mA – 89964						
C	FA1	Fonte de alimentação 24Vcc 3A – 891684						TCI	Sensor PT-100 de controle						C
	FP1	Fonte para a impressora 5Vcc – 87763						S0	Válvula de vácuo na câmara interna						
	RT1	Bloco auxiliar disjuntor motor – 891848						S1	Válvula de vapor na câmara interna						
								S2	Válvula de ar na câmara interna						
	C2	Contator para a bomba de vácuo – 47925						S3	Válvula de ar na canaleta de carga						
B	M1	Bomba de vácuo de 1,5 CV						S4	Válvula de vácuo na canaleta de carga						B
								S5	Válvula de ar na canaleta de descarga						
	BT1	Botão para a porta de carga – 890827						S6	Válvula de vácuo na canaleta de descarga						
	BT2	Botão para a porta de descarga – 890827						S8	Válvula de vapor para o ciclo de líquidos						
	RL1	Relé para a porta de carga – 34156						S9	Válvula de vapor na câmara externa						
A	RL2	Relé para a porta de descarga – 34156													A
	MS1	Micro da porta de carga						S11	Válvula de água para a bomba de vácuo						
	MS2	Micro da porta de descarga													
	P5	Pressostato compressor de ar													
	RL3 a RL9	Relé de acoplamento das saídas – 55291													
	M3	Compressor de ar						P4							
	CV1	Conversor PT-100 p/ 4 a 20mA (TCI) – 890083						CV2	Conversor PT-100 p/ 4 a 20mA (TTS) – 890083						
8		7		6		5		4		3		2		1	
		DENOMINAÇÃO: Descrição dos componentes						CÓDIGO:							
		DES: MARQUEZINI		Substitui:		Sub:		FOLHA:		ee898460					
		CONF: CANATTO		SUB LETRA				7/10							
		APROV: KOSEKI													

SUB-A:
SUB-B:
SUB-C:

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

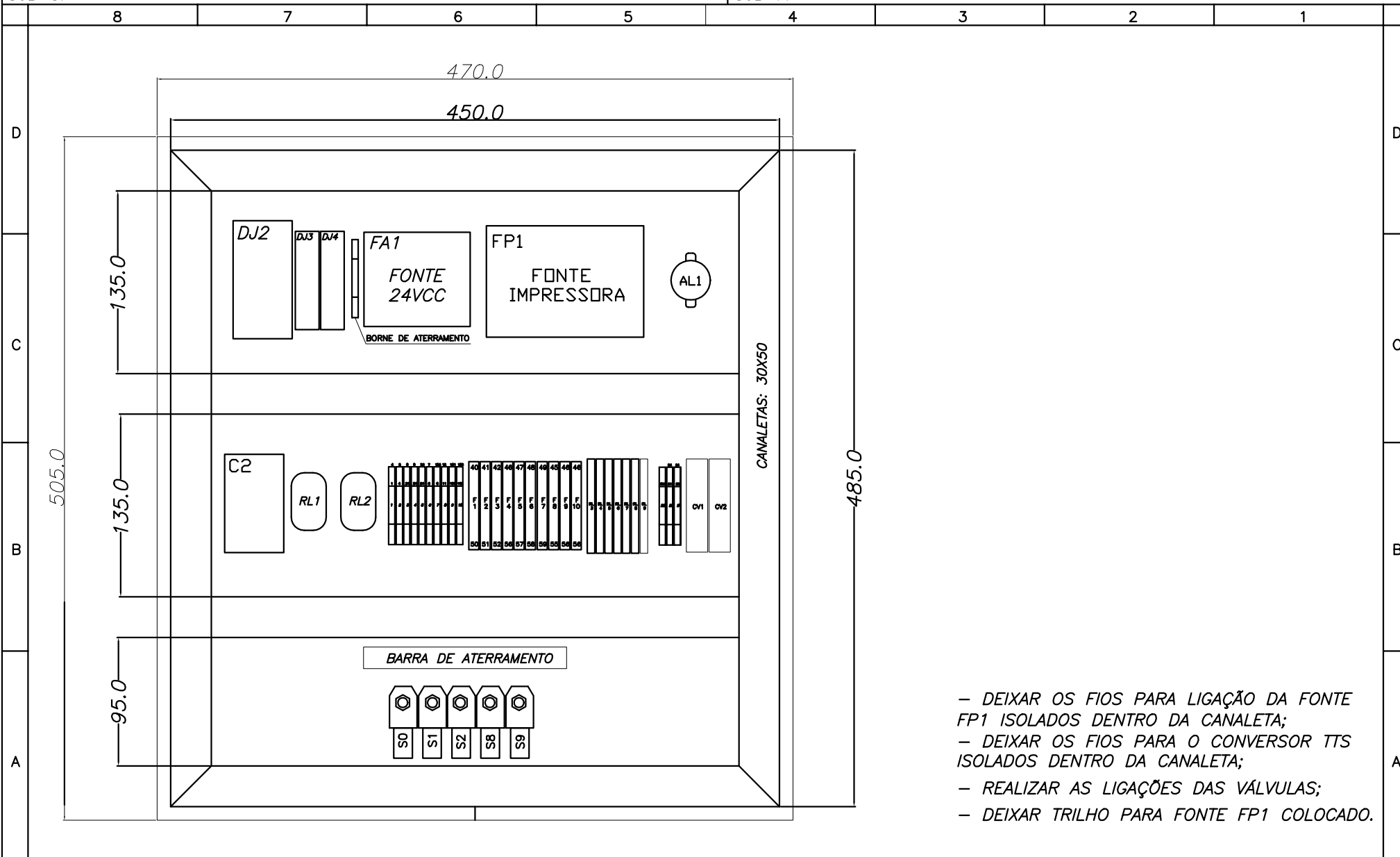

- DEIXAR OS FIOS PARA LIGAÇÃO DA FONTE FP1 ISOLADOS DENTRO DA CANALETA;
- DEIXAR OS FIOS PARA O CONVERSOR TTS ISOLADOS DENTRO DA CANALETA;
- REALIZAR AS LIGAÇÕES DAS VÁLVULAS;
- DEIXAR TRILHO PARA FONTE FP1 COLOCADO.



DENOMINAÇÃO: Chassi do comando

DES: MARQUEZINI

CONF: RIBEIRO

APROV: KOSEKI

Substitui:

Sub:

FOLHA:

8/10

CÓDIGO:

ee898460

SUB-A:
SUB-B:
SUB-C:

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

8

7

6

5

4

3

2

1

D

C

B

A

D

C

B

A

-xx NÚMERO DE ANILHA DO FIO
øxx NÚMERO DE BORNE SIMPLES
øxx/x NÚMERO DE BORNE DUPLO

1-Borne externo
2-Borne interno


xx COR E BITOLA DO FIO

BR - Cabo branco
VM - Cabo vermelho
AZ - Cabo azul
PR - Cabo preto


REFERÊNCIA CRUZADA

2A3

↑ Número da coluna
↑ Número da linha
↑ Número da página

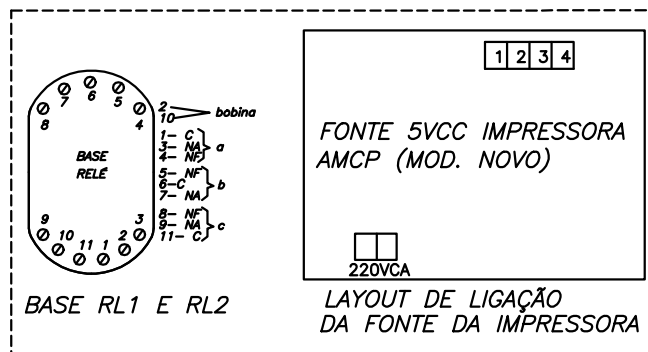

OBS.: A LIGAÇÃO DOS TERRAS DEVEM SER FEITAS EM UMA BARRA DE COBRE PARAFUSADA NO CHASSI DO COMANDO.

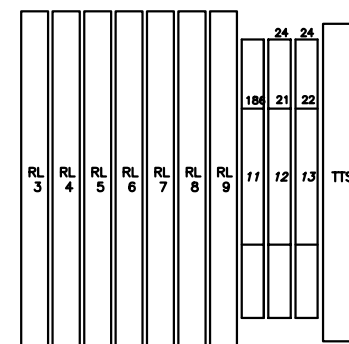

1	8	7	24	24	12	100	102	104	106	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
5	25	8	0	0	11	10	103	105	107	F 1	F 2	F 3	F 4	F 5	F 6	F 7	F 8	F 9	F 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59



DENOMINAÇÃO: Régua de borne para o comando elétrico

DES: MARQUEZINI

Substitui:

Sub:

FOLHA:

CONF: RIBEIRO

SUB
LETRA

APROV: KOSEKI


9/10

CÓDIGO:

ee898460

SUB-A:
SUB-B:
SUB-C:

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

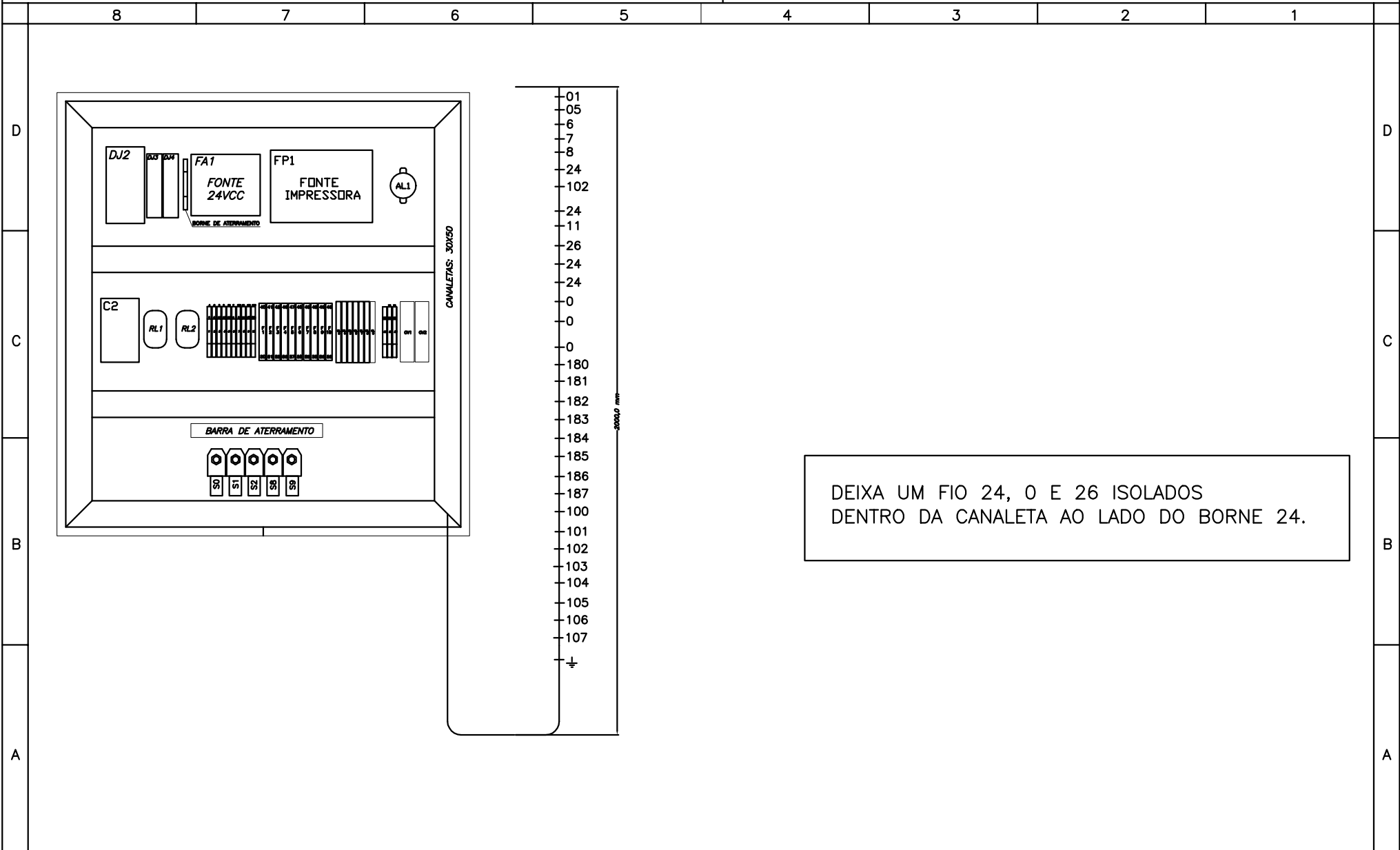

DENOMINAÇÃO: Chicote elétrico de ligação

DES: MARQUEZINI

CONF: RIBEIRO

APROV: KOSEKI

Substitui:

Sub:

FOLHA:

10/10

CÓDIGO:

ee898460

EQUIPAMENTO: ESTERILIZADOR HI SPEED B-200/300/500-NX
COMANDO GERADOR 24 kW



DATA:

DES: MARQUEZINI

CONF: RIBEIRO

APROV: KOSEKI

DESENHO ELÉTRICO

Substitui:

Sub:

SUB
LETRA

--	--	--	--	--	--	--

NÚMERO DE PÁGINAS: 4

FOLHA:

CAPA

CÓDIGO:

ee898461

SUB-A:
SUB-B:
SUB-C:

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

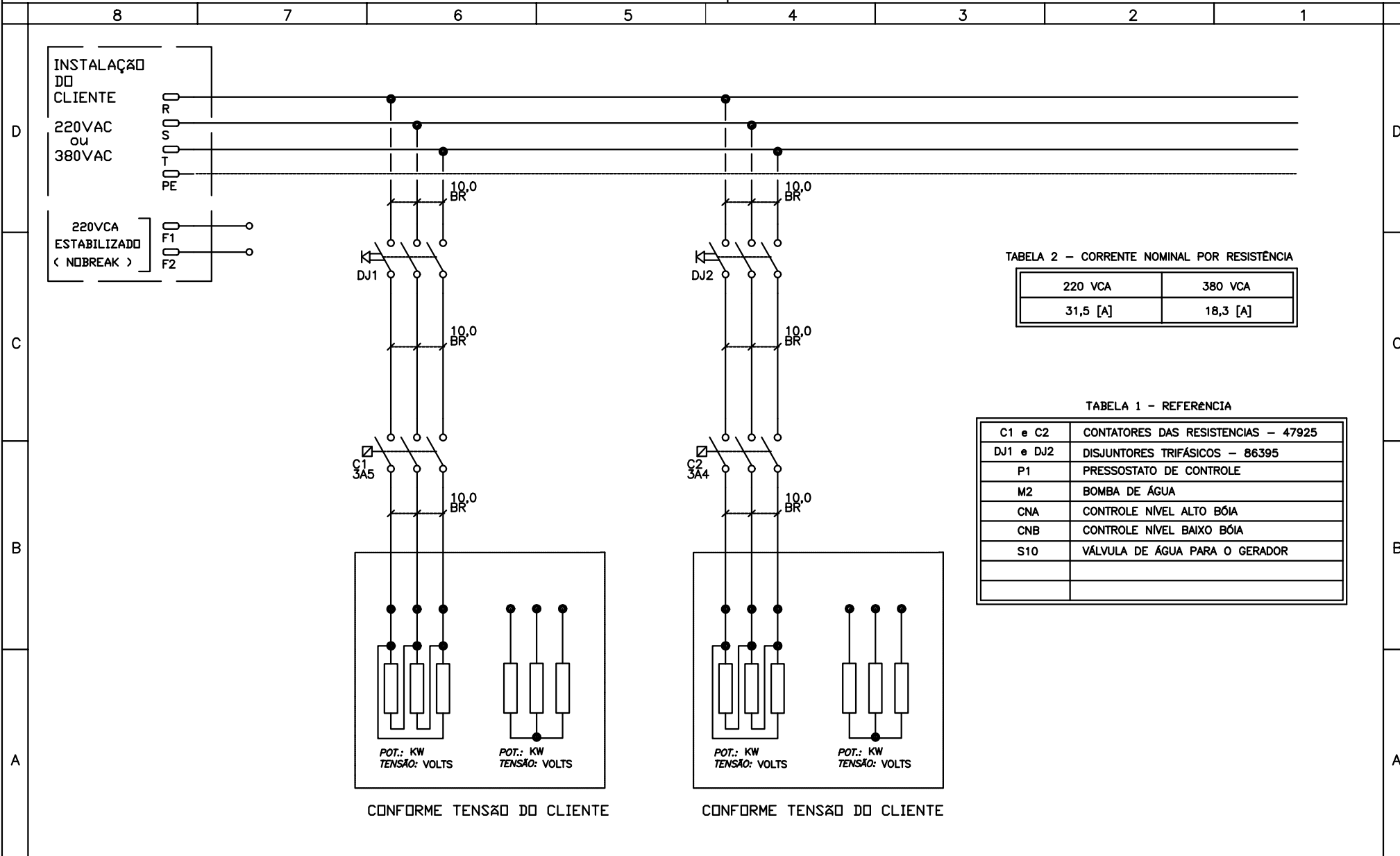


TABELA 2 - CORRENTE NOMINAL POR RESISTÊNCIA

220 VCA	380 VCA
31,5 [A]	18,3 [A]

TABELA 1 - REFERÊNCIA

C1 e C2	CONTADORES DAS RESISTENCIAS - 47925
DJ1 e DJ2	DISJUNTORES TRIFÁSICOS - 86395
P1	PRESSOSTATO DE CONTROLE
M2	BOMBA DE ÁGUA
CNA	CONTROLE NÍVEL ALTO BÓIA
CNB	CONTROLE NÍVEL BAIXO BÓIA
S10	VÁLVULA DE ÁGUA PARA O GERADOR



DENOMINAÇÃO: Circuito gerador 24kW B-200/300/500NX

DES: MARQUEZINI

CONF: RIBEIRO

APROV: KOSEKI

Substitui:

Sub:

FOLHA:


1/4

CÓDIGO:

ee898461

SUB-A:
SUB-B:
SUB-C:

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

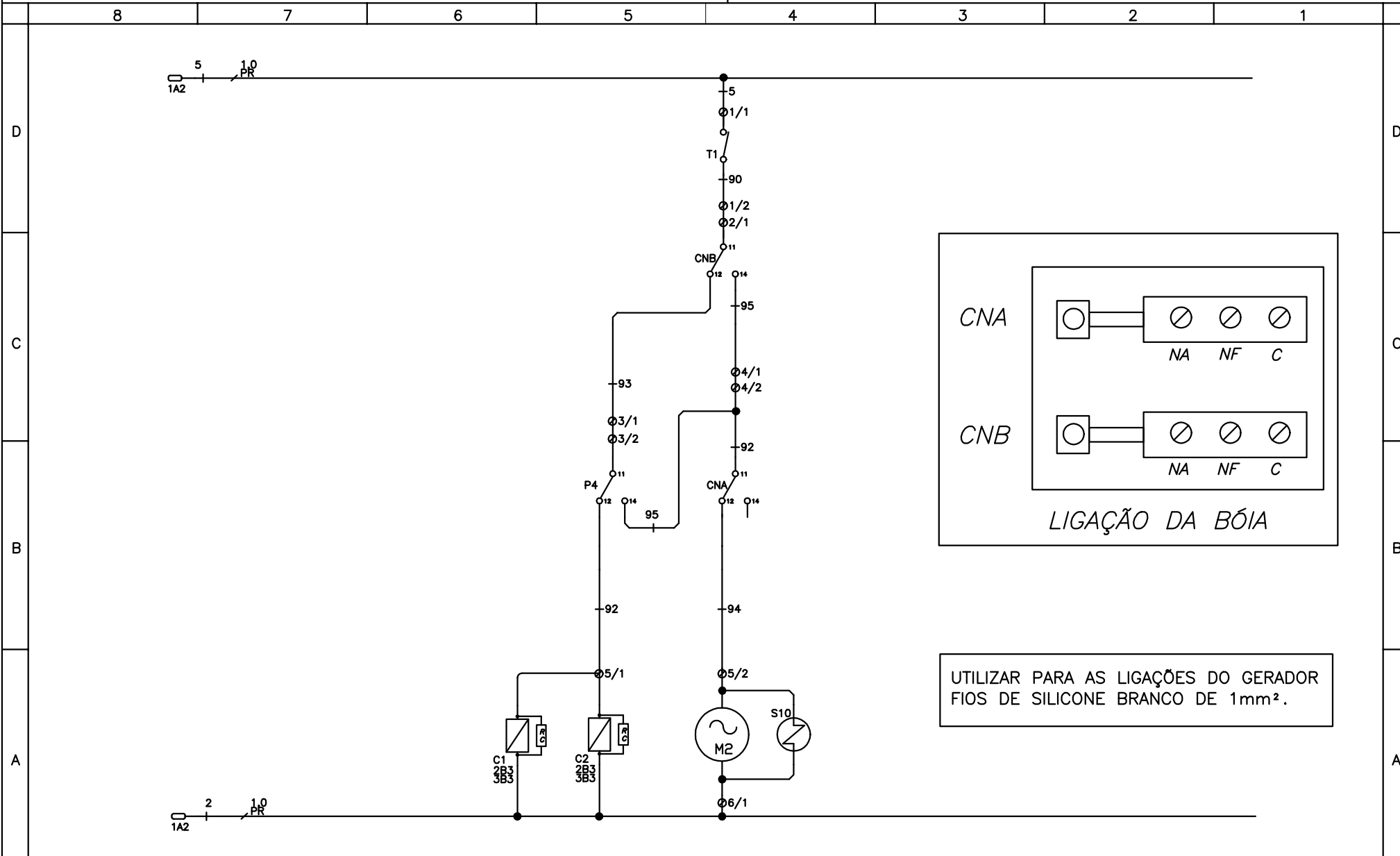

DENOMINAÇÃO: Controle gerador 24kW B-200/300/500NX

DES: MARQUEZINI

CONF: RIBEIRO

APROV: KOSEKI

Substitui:

Sub:

FOLHA:


2/4

CÓDIGO:

ee898461

SUB-A:
SUB-B:
SUB-C:

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

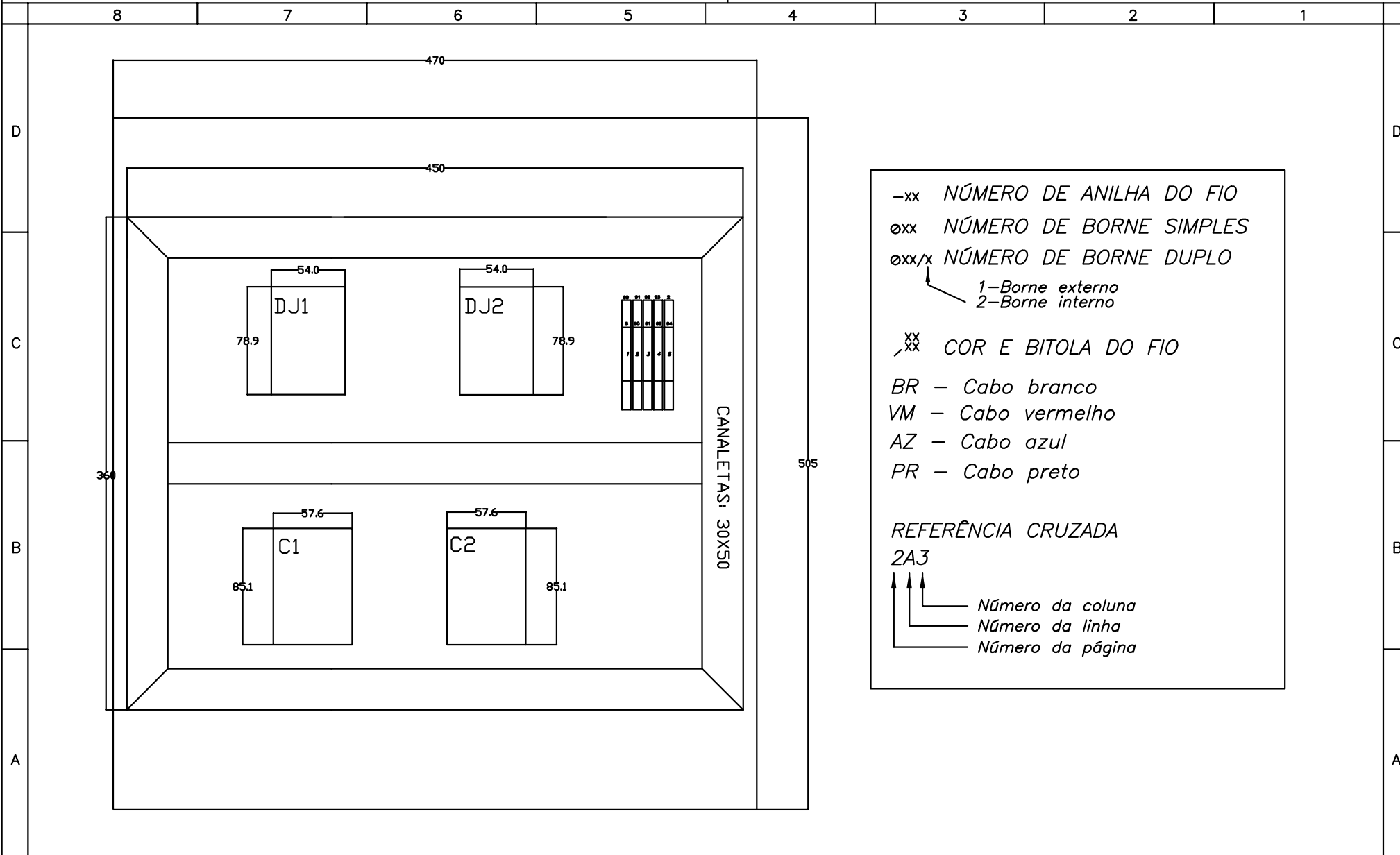

—xx NÚMERO DE ANILHA DO FIO
øxx NÚMERO DE BORNE SIMPLES
øxx/x NÚMERO DE BORNE DUPLO
1—Borne externo
2—Borne interno
/xx COR E BITOLA DO FIO
BR — Cabo branco
VM — Cabo vermelho
AZ — Cabo azul
PR — Cabo preto
REFERÊNCIA CRUZADA
2A3
Número da coluna
Número da linha
Número da página



DENOMINAÇÃO: Layout gerador 24kW B200/300/500NX

DES: MARQUEZINI

CONF: RIBEIRO

APROV: KOSEKI

Substitui:

Sub:

FOLHA:

SUB
LETRA


3/4

CÓDIGO:

ee898461

SUB-A:
SUB-B:
SUB-C:

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

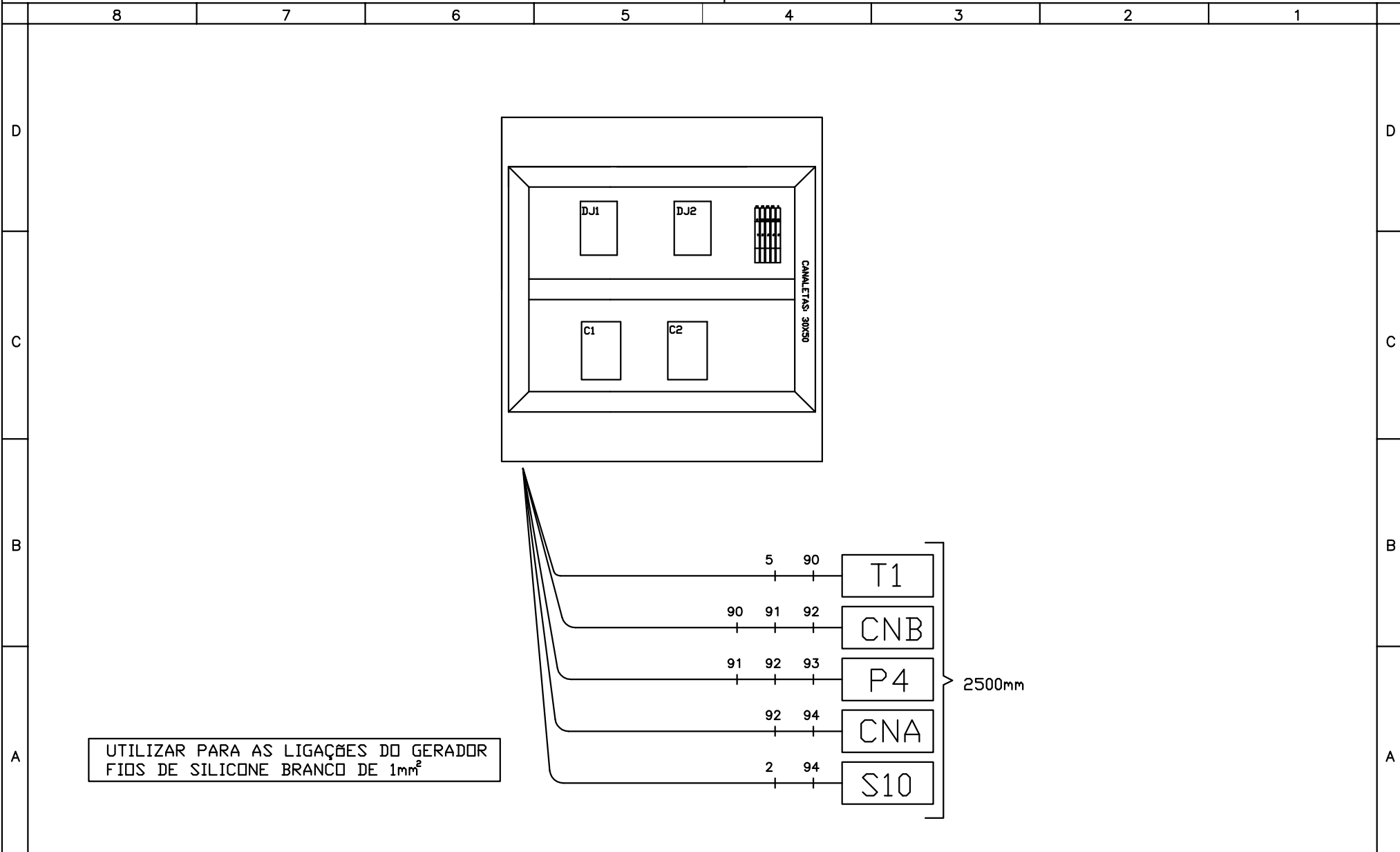

DENOMINAÇÃO: Layout gerador 24kW B200/300/500-NX

DES: MARQUEZINI

CONF: RIBEIRO

APROV: KOSEKI

Substitui:

Sub:

FOLHA:

SUB
LETRA

4/4

CÓDIGO:

ee898461

EQUIPAMENTO: ESTERILIZADOR HI SPEED B-200/300/500-NX
COMANDO GERADOR 36kW



DATA:

DES: MARQUEZINI

CONF: RIBEIRO

APROV: KOSEKI

DESENHO ELÉTRICO

Substitui:

Sub:

SUB
LETRA

--	--	--	--	--	--	--


NÚMERO DE PÁGINAS: 4

FOLHA:


CAPA

CÓDIGO:

ee898462

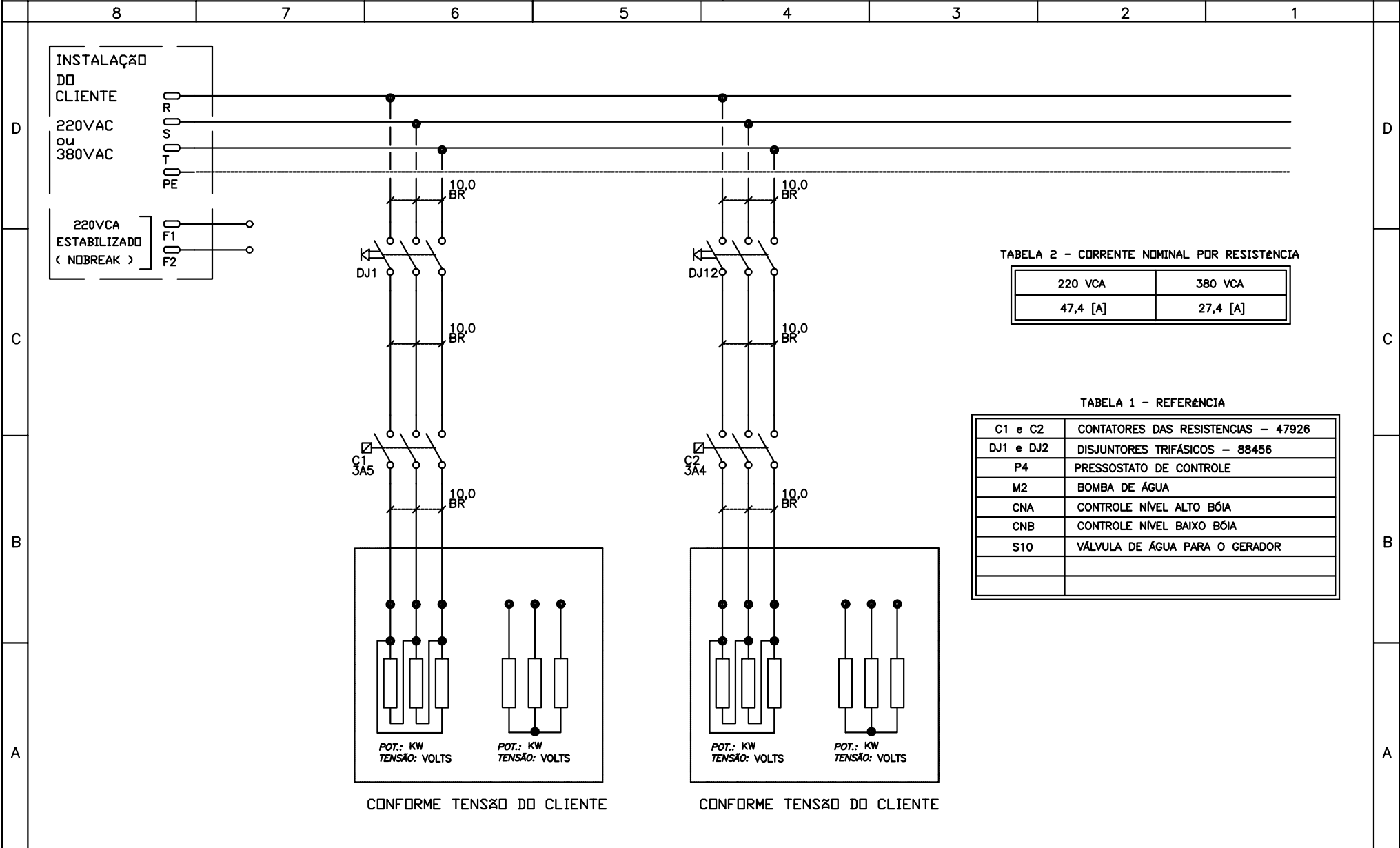


SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

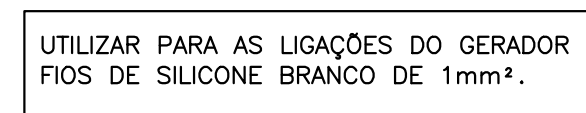

SUB-A:
SUB-B:
SUB-C:

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

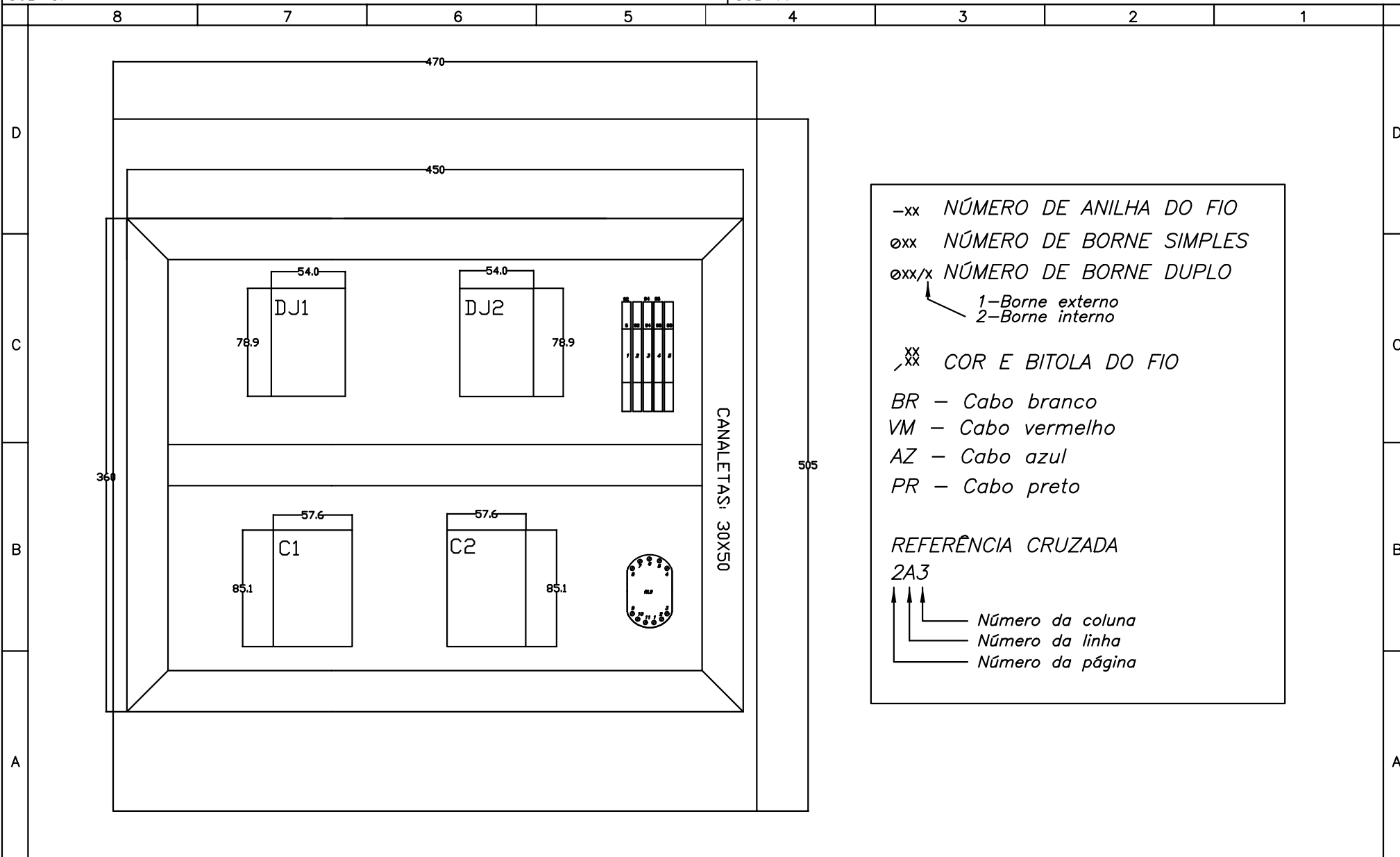

-xx NÚMERO DE ANILHA DO FIO
øxx NÚMERO DE BORNE SIMPLES
øxx/x NÚMERO DE BORNE DUPLO
1-Borne externo
2-Borne interno
xx COR E BITOLA DO FIO
BR - Cabo branco
VM - Cabo vermelho
AZ - Cabo azul
PR - Cabo preto
REFERÊNCIA CRUZADA
2A3
Número da coluna
Número da linha
Número da página



DENOMINAÇÃO: Layout gerador 36kW B200/300/500-NX

DES: MARQUEZINI

CONF: RIBEIRO

APROV: KOSEKI

Substitui:

Sub:

FOLHA:

SUB
LETRA


3/4

CÓDIGO:

ee898462

SUB-A:
SUB-B:
SUB-C:

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

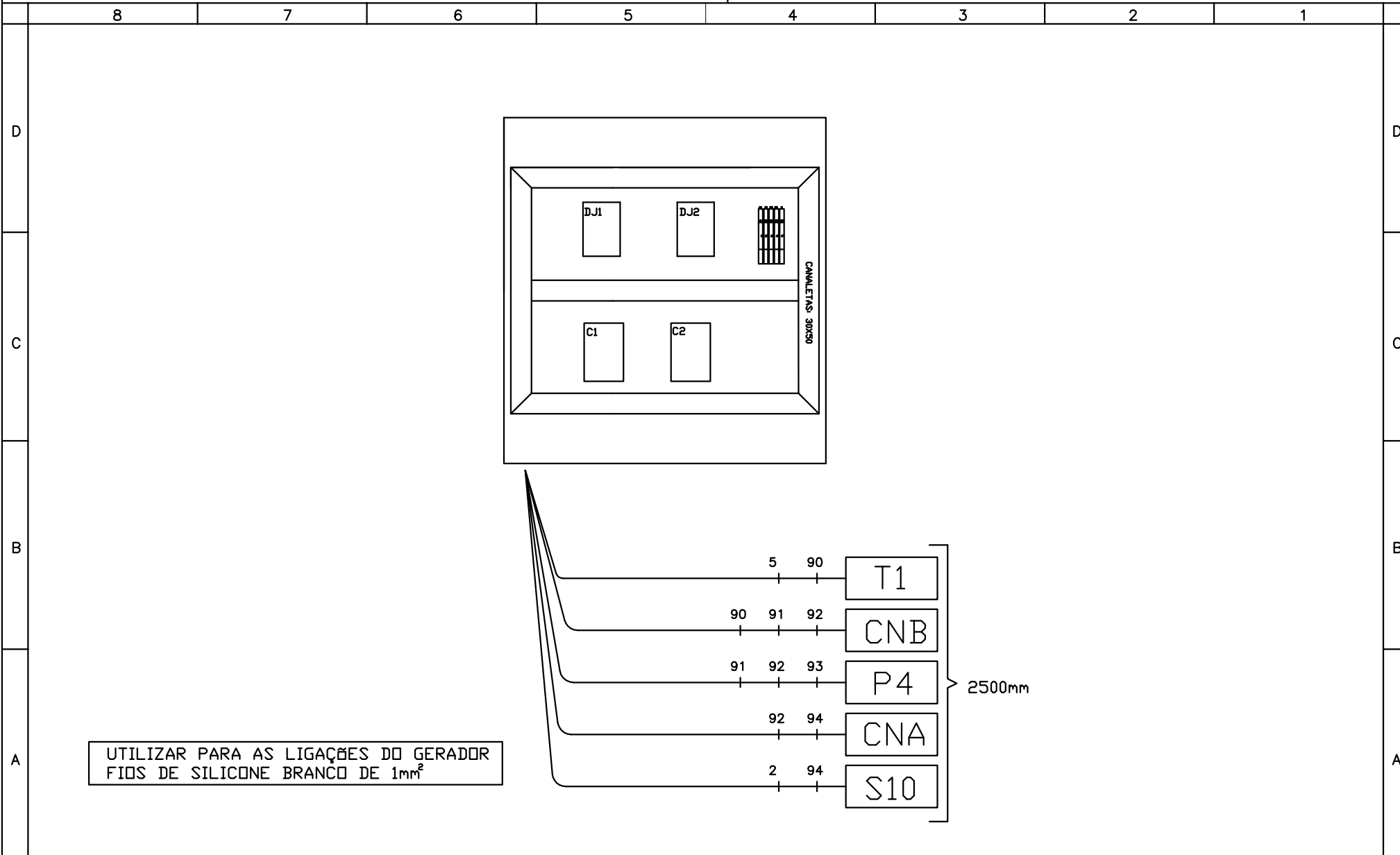

DENOMINAÇÃO: Layout gerador 36kW B200/300/500-NX

DES: MARQUEZINI

CONF: RIBEIRO

APROV: KOSEKI

Substitui:

Sub:

FOLHA:

4/4

CÓDIGO:

ee898462

EQUIPAMENTO: ESTERILIZADOR HI SPEED B-200/300/500-NX
COMANDO GERADOR 52kW



DATA:

DES: MARQUEZINI

CONF: RIBEIRO

APROV: KOSEKI

DESENHO ELÉTRICO

Substitui:

Sub:

SUB
LETRA

--	--	--	--	--	--	--	--

NÚMERO DE PÁGINAS: 4

FOLHA:

CAPA

CÓDIGO:

ee898463

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

TABELA 1 - REFERÊNCIA


C1 e C2	CONTADORES DAS RESISTÊNCIAS – 47929
DJ1 e DJ2	DISJUNTORES TRIFÁSICOS – 88457
P4	PRESSOSTATO DE CONTROLE
M2	BOMBA DE ÁGUA
CNA	CONTROLE NÍVEL ALTO BÓIA
CNB	CONTROLE NÍVEL BAIXO BÓIA
S10	VÁLVULA DE ÁGUA PARA O GERADOR


FOLHA:

$$1/4$$

ee898463


SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

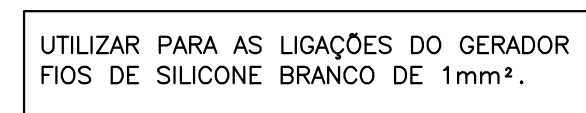

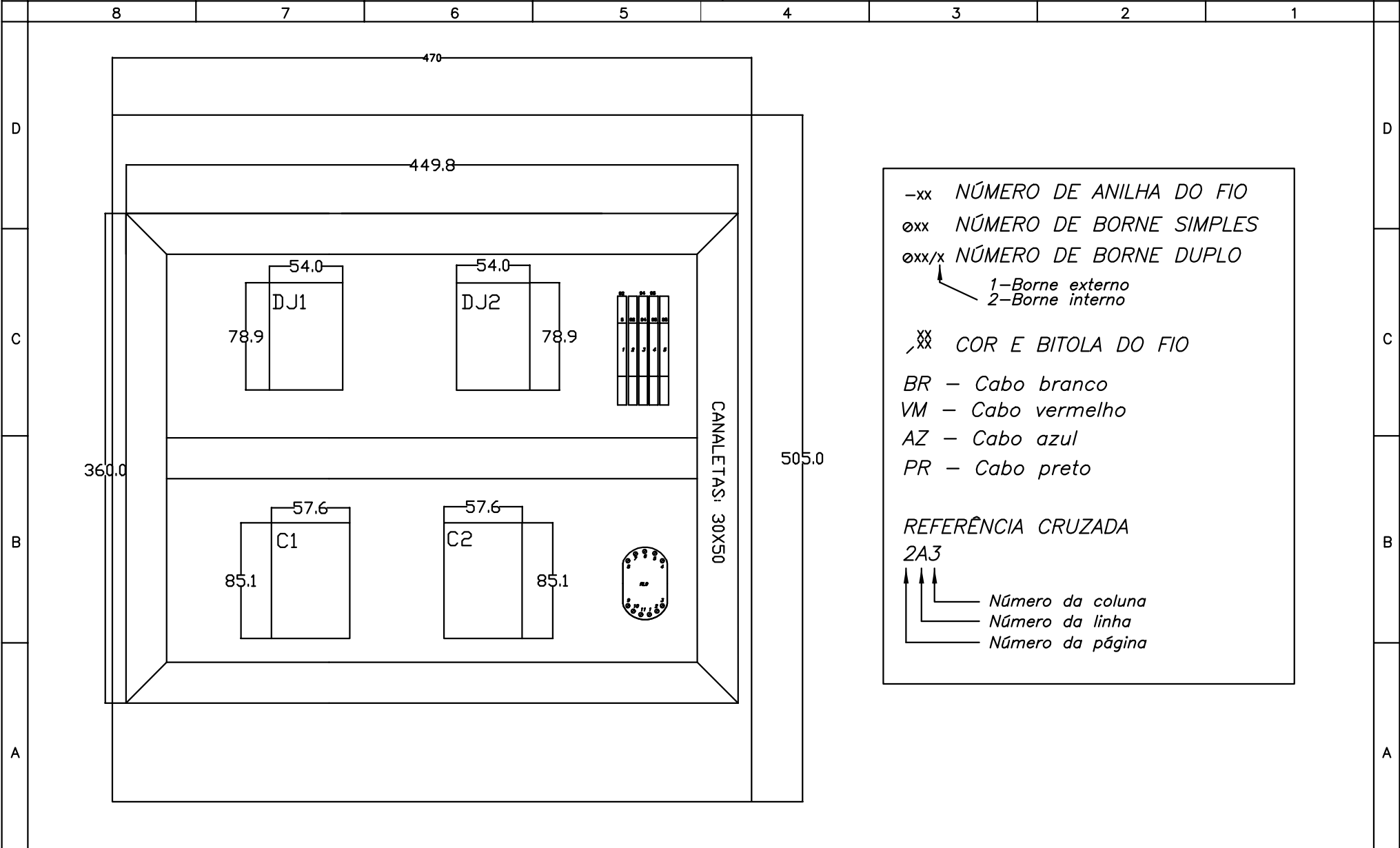

SUB-A:
SUB-B:
SUB-C:

SUB-D:
SUB-E:
SUB-F:

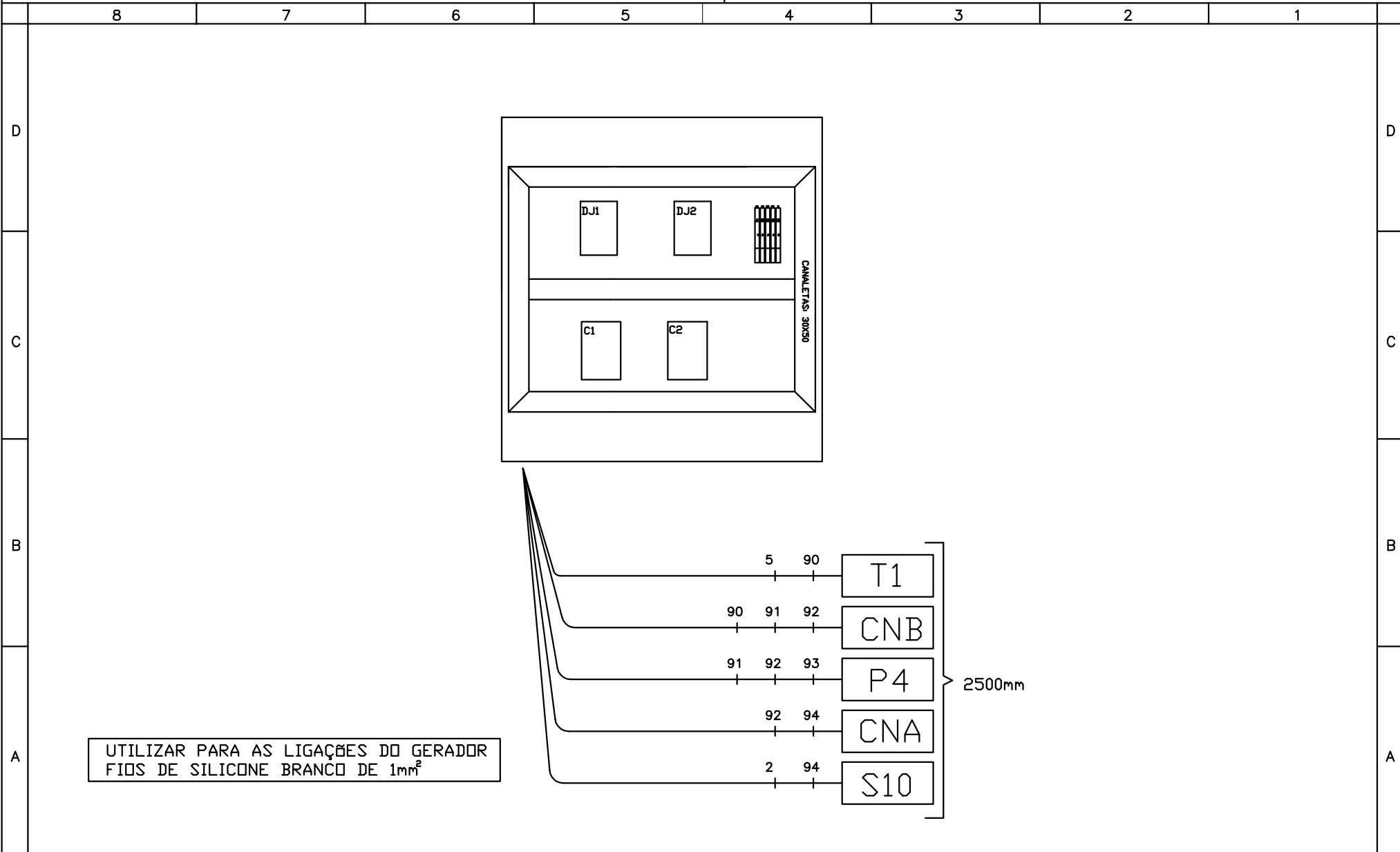

DENOMINAÇÃO: Layout gerador 52kW B200/300/500-NX

DES: MARQUEZINI

CONF: RIBEIRO

APROV: KOSEKI

Substitui:

Sub:

FOLHA:

SUB
LETRA


4/4

CÓDIGO:

ee898463

N. H1-NX

- LINHA DE VAPOR
— LINHA DE AR COMPRIMIDO
— LINHA DE VÁCUO
— LINHA DE ÁGUA
— LINHA DE AR ATMOSFÉRICO
— LINHA DE DRENAGEM

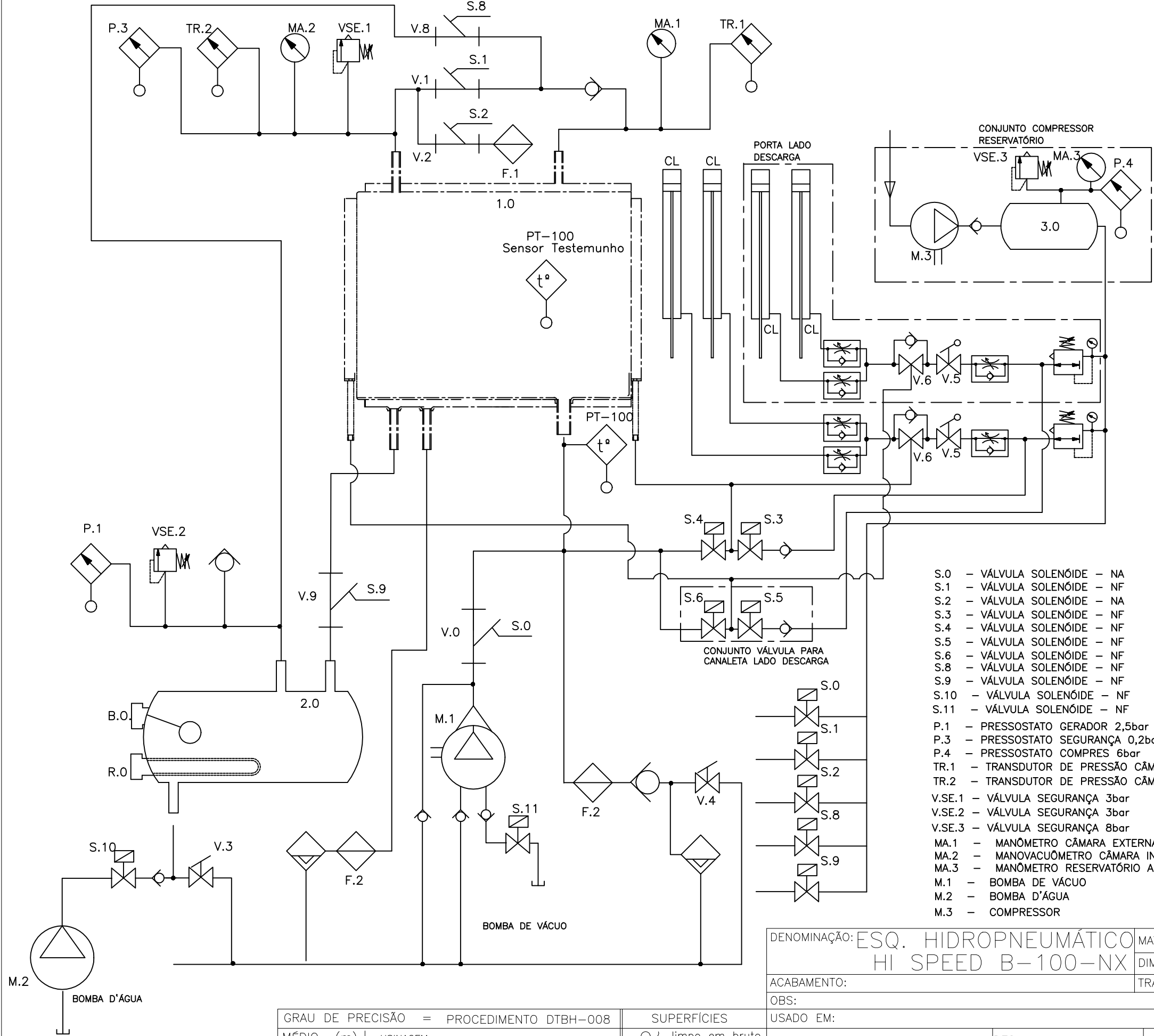


- S.0 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NA
S.1 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
S.2 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NA
S.3 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
S.4 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
S.5 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
S.6 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
S.8 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
S.9 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
S.10 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
S.11 - VÁLVULA SOLENÓIDE - NF
P.1 - PRESSOSTATO GERADOR 2,5bar
P.3 - PRESSOSTATO SEGURANÇA 0,2bar
P.4 - PRESSOSTATO COMPRES 6bar
TR.1 - TRANSDUTOR DE PRESSÃO CÂMARA EXTERNA
TR.2 - TRANSDUTOR DE PRESSÃO CÂMARA INTERNA.
V.SE.1 - VÁLVULA SEGURANÇA 3bar
V.SE.2 - VÁLVULA SEGURANÇA 3bar
V.SE.3 - VÁLVULA SEGURANÇA 8bar
MA.1 - MANÔMETRO CÂMARA EXTERNA
MA.2 - MANOVACUÔMETRO CÂMARA INTERNA.
MA.3 - MANÔMETRO RESERVATÓRIO AR
M.1 - BOMBA DE VÁCUO
M.2 - BOMBA D'ÁGUA
M.3 - COMPRESSOR
B.0 - BÓIA DE NÍVEL
PT-100 - SENSOR TEMPERATURA
CL - CILINDRO PNEUMÁTICO
V.0 ; V.1; V.2; V.8; V.9 - VÁLV. PNEUM.
V.3 - VÁLVULA ESFERA
V.4 - VÁLVULA AGULHA
V.5 - VÁLVULA PNEUMÁTICA SELETORA
V.6 - VÁLVULA PNEUMÁTICA PILOTADA
— VÁLVULA RETENÇÃO
— F.1 - FILTRO AR
— F.2 - FILTRO VAPOR
— PURGADOR
— REGULADOR DE FLUXO
— REGULADOR DE PRESSÃO
1.0 - ESTERILIZADOR
2.0 - GERADOR DE VAPOR
3.0 - RESERVATÓRIO DE AR


DENOMINAÇÃO: ESQ. HIDROPNEUMÁTICO HI SPEED B-100-NX		MATERIAL:		N:	
ACABAMENTO:		DIMENSÃO:		PESO:	
OBS:		TRATAMENTO:		SUBSTITUI: SUB	
USADO EM:		DES:RILDO		ESCALA:	
CONF:		APROV:		SUB LETRA	
CÓDIGO		H1-NX			





GRAU DE PRECISÃO = PROCEDIMENTO DTBH-008		SUPERFÍCIES	
MÉDIO (m)	USINAGEM	~	limpo em bruto
GROSSO (g)	FURADEIRA/CORTE/ESTAMPARIA/VIRADEIRA	▽	desbastado
MUITO GROSSO (mg)	CALDEIRARIA / SOLDA	▽▽	alisado
		▽▽▽	polido

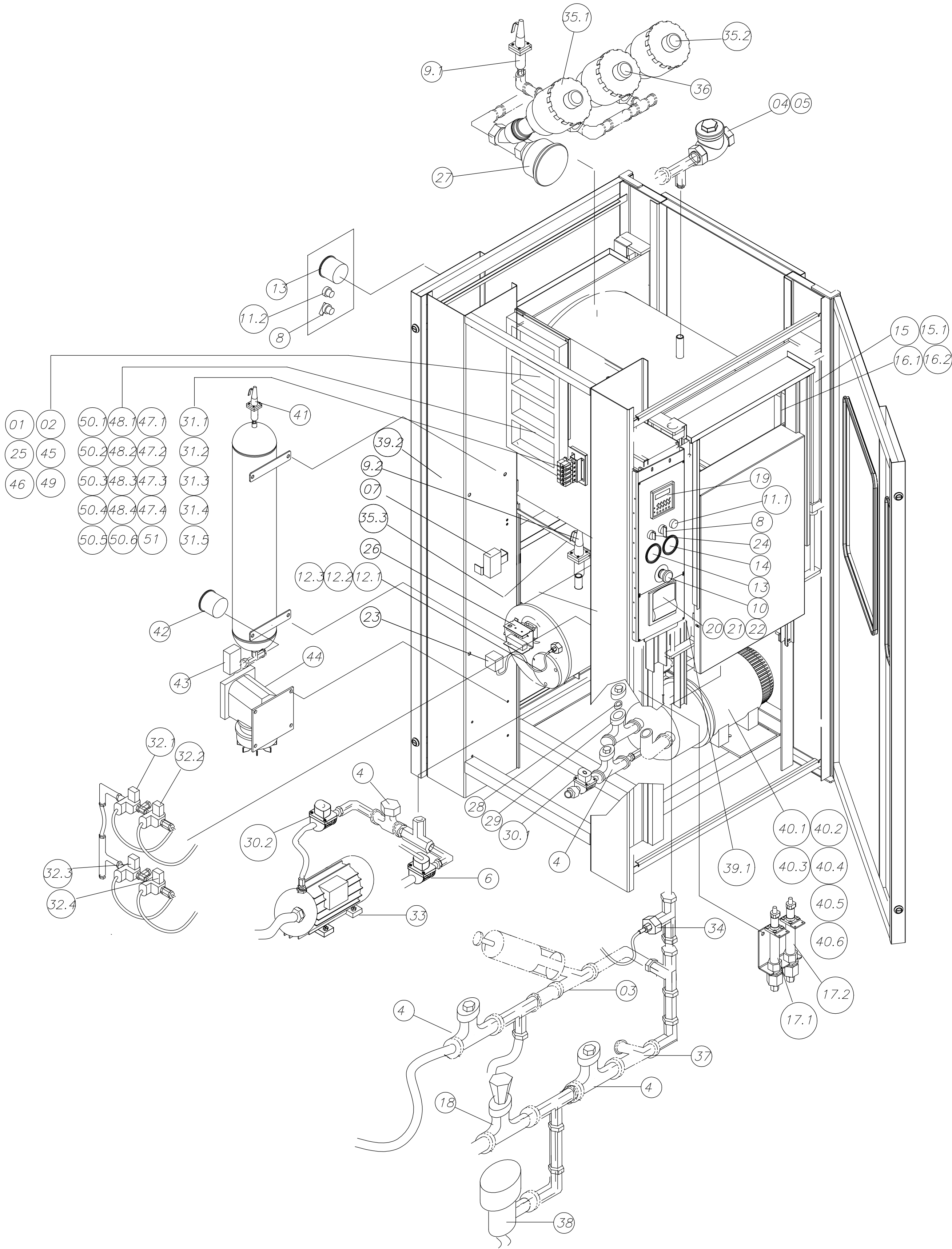

N. V1-NX

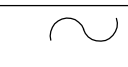

DENOMINAÇÃO: VISTA EXPLODIDA HI SPEED NX				MATERIAL:				N:									
				DIMENSÃO:													
ACABAMENTO:				TRATAMENTO:								PESO:					
OBS:						SUBSTITUI: V1 – NX						SUB –					
USADO EM:						SUB LETRA		A									
		DES: RILDO		03/12/08		ESCALA:		CÓDIGO									
		CONF:						V1 – NX									
		APROV:															

GRAU DE PRECISÃO = PROCEDIMENTO DTBH-008		SUPERFÍCIES	
MÉDIO (m)	USINAGEM		limpo em bruto
GROSSO (g)	FURADEIRA/CORTE/ESTAMPARIA/VIRADEIRA		desbastado
MUITO GROSSO (mg)	CALDEIRARIA / SOLDA		alisado
			polido